




Exerto do Manual do JAPAtecno Iridoscópio

O equipamento JAPAtecno Iridoscópio é constituído por:

Acessórios

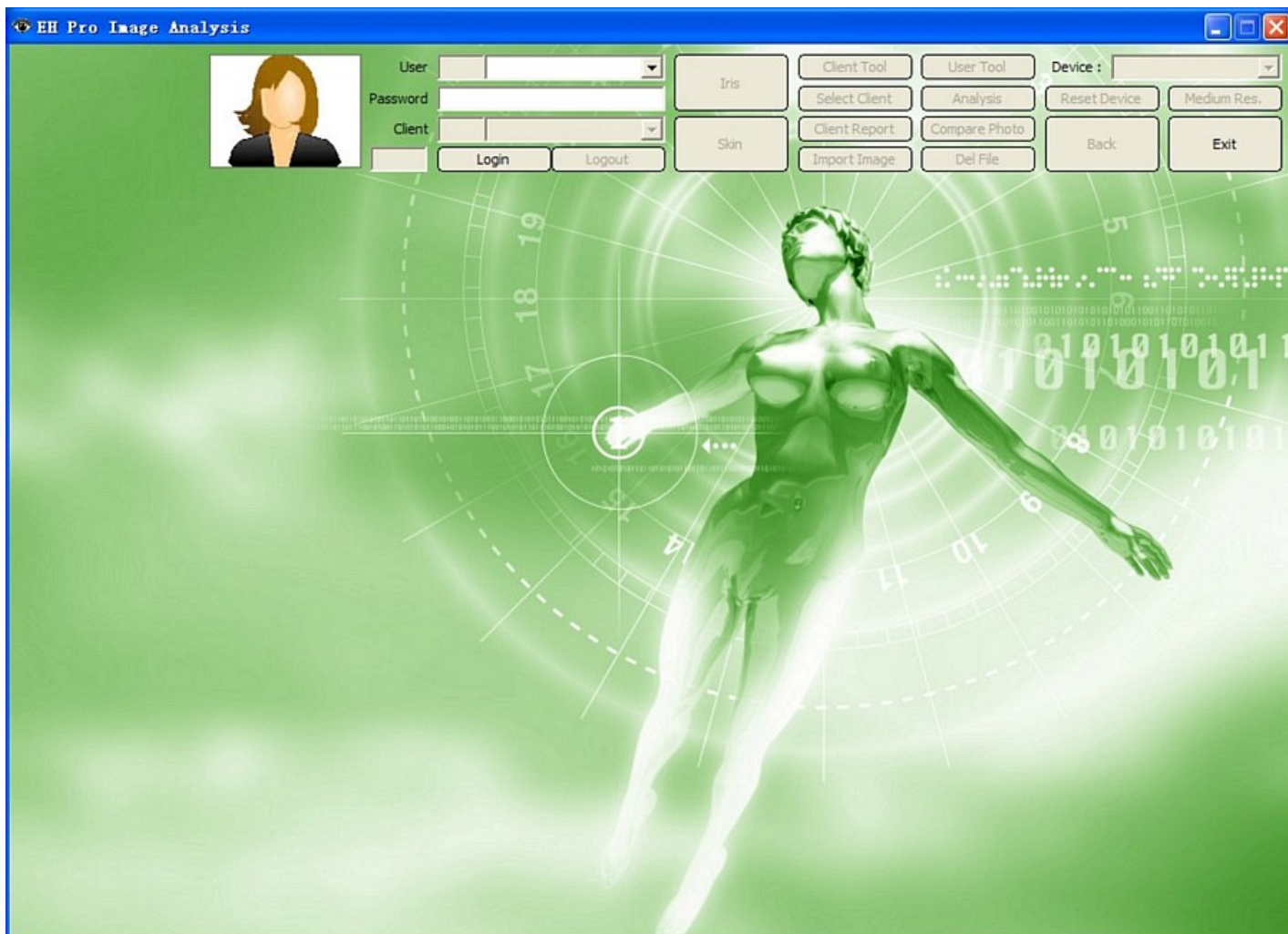

1. Caixa de alumínio 2. Linha USB 3. Câmera 4. Base do instrumento
5. Cabo do instrumento 6. Gráfico de iridologia 7. Software de iridologia

Aqui são apresentadas apenas algumas das 33 páginas do Manual que acompanha o JAPAtecno Iridoscópio

5、Criar utilizador analista

5-1、Clique 【Ferramenta do utilizador】 diagrama de interface pop-up:

User ID	User	Build Date	Password
001	User	1/7/2011	111111

User

Password

Confirm

Add

Clear

Edit

Delete

Admin. Password

Import Old Version Data

Edit Iris Product

Edit Iris Content

Edit Skin Product

Edit Skin Content

Backup

Restore

Edit Company info

Close

2、Interface de login dos analistas:

EH Pro Image Analysis



User: 001 User
Password:
Client: 001 Client
Female Login Logout

Iris

Skin

Client Tool
Select Client
Client Report
Import Image

User Tool
Analysis
Compare Photo
Del File

Device:
Reset Device
Medium Res.
Back
Exit

Capture Right Eye

Eye Samples

Capture Left Eye






3、 Estabeleça os dados do cliente:


3-1. Clique **【Ferramenta Cliente】** ,Introduza as informações do cliente,clique em **【Adicionar】** Clique **【Instantâneo】** instantâneo Foto do cliente;

Clique **【Selecione a foto】** Num computador ou disco U Selecione Foto do Cliente

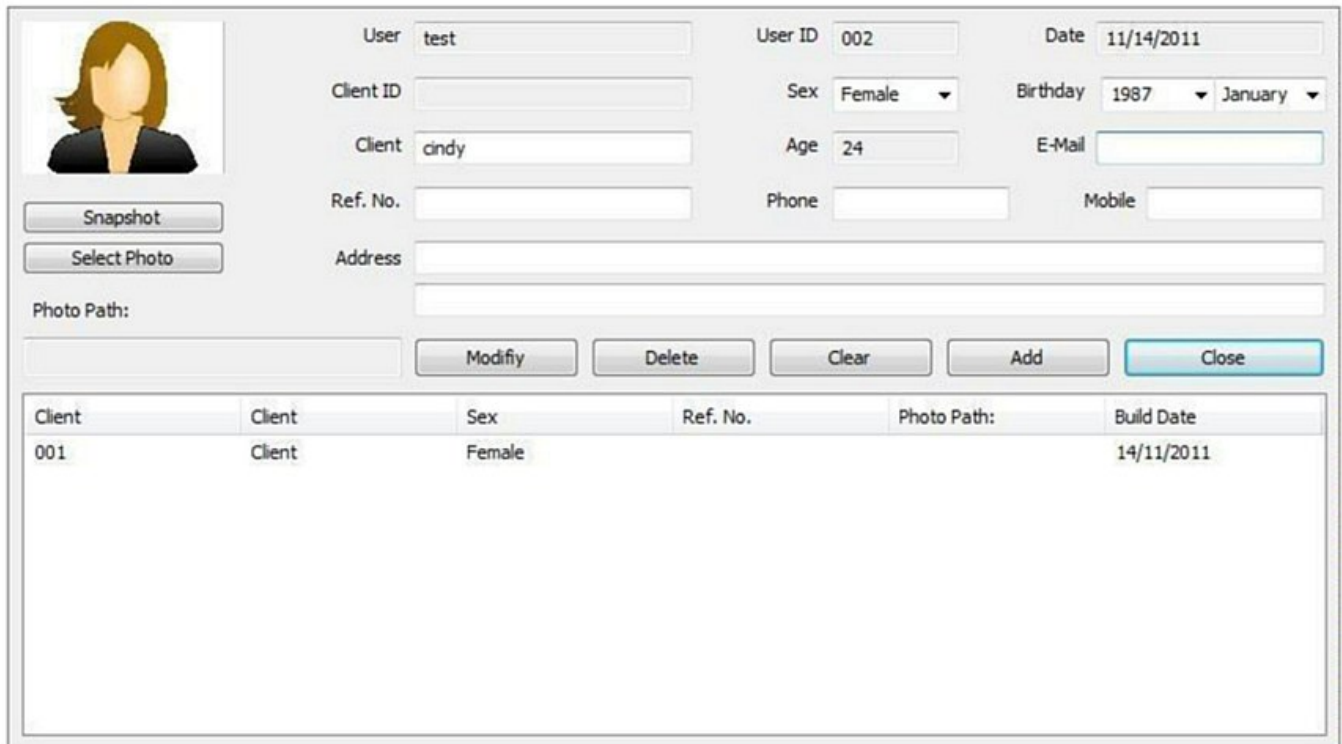

Client	Client	Sex	Ref. No.	Photo Path:	Build Date
001	Client	Female			14/11/2011


5-1、 Selecione imagens da íris do olho esquerdo e direito

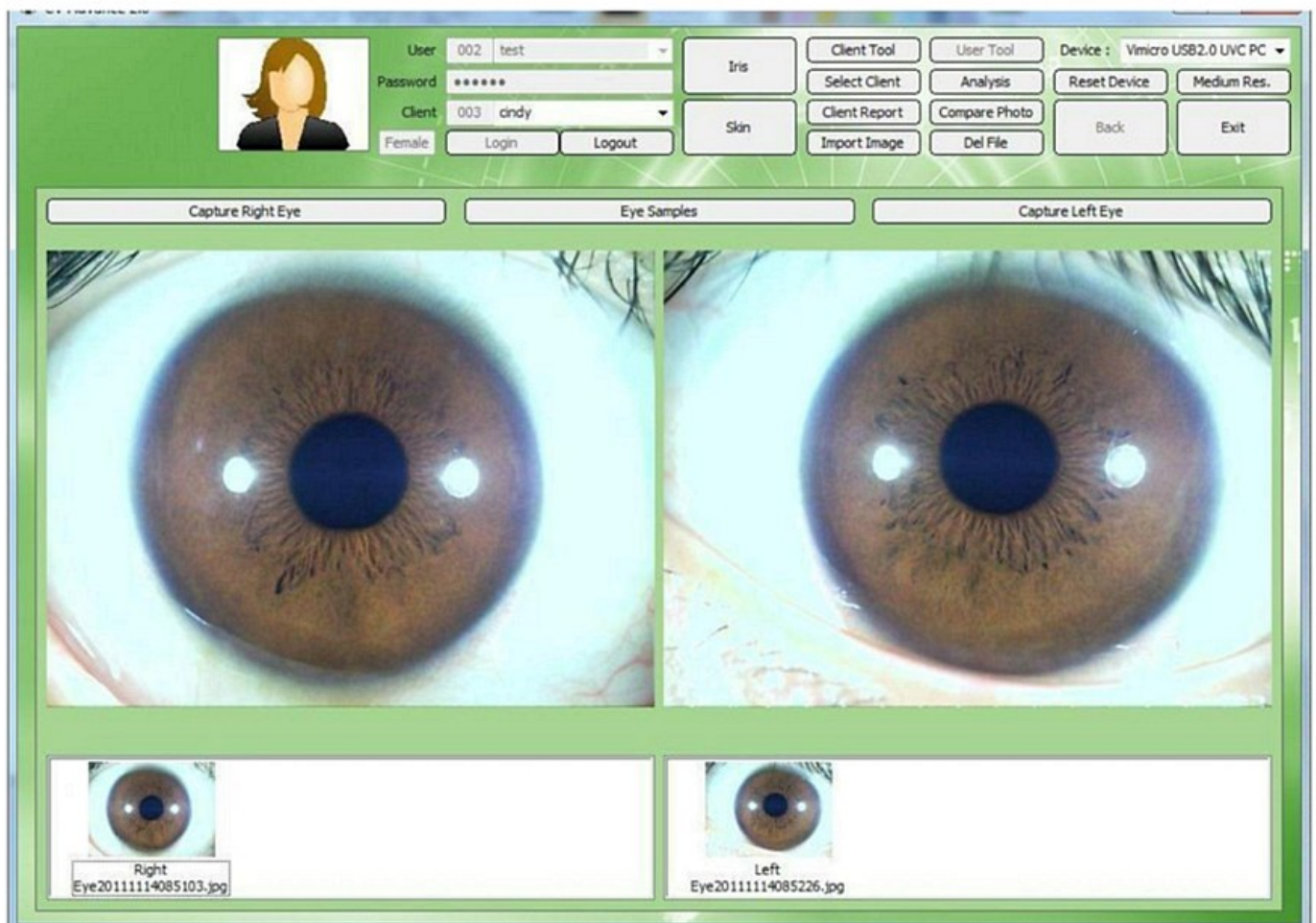


Right
Eye20111114085103.jpg

Left
Eye20111114085226.jpg


Mova o rato para o órgão da íris correspondente na análise de posição

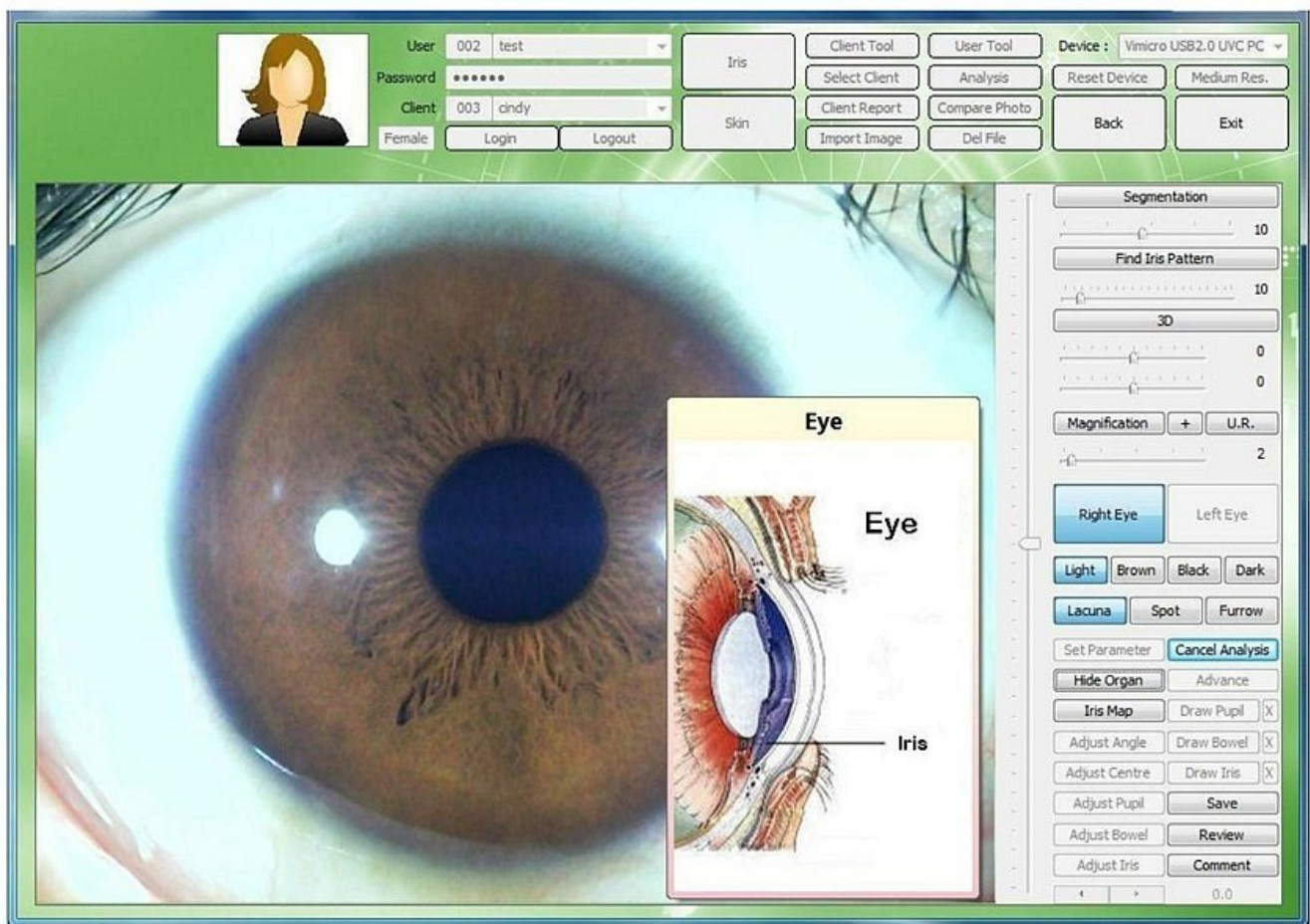

5-14, Clique [Relatório do cliente] ,Relatório de análise do cliente

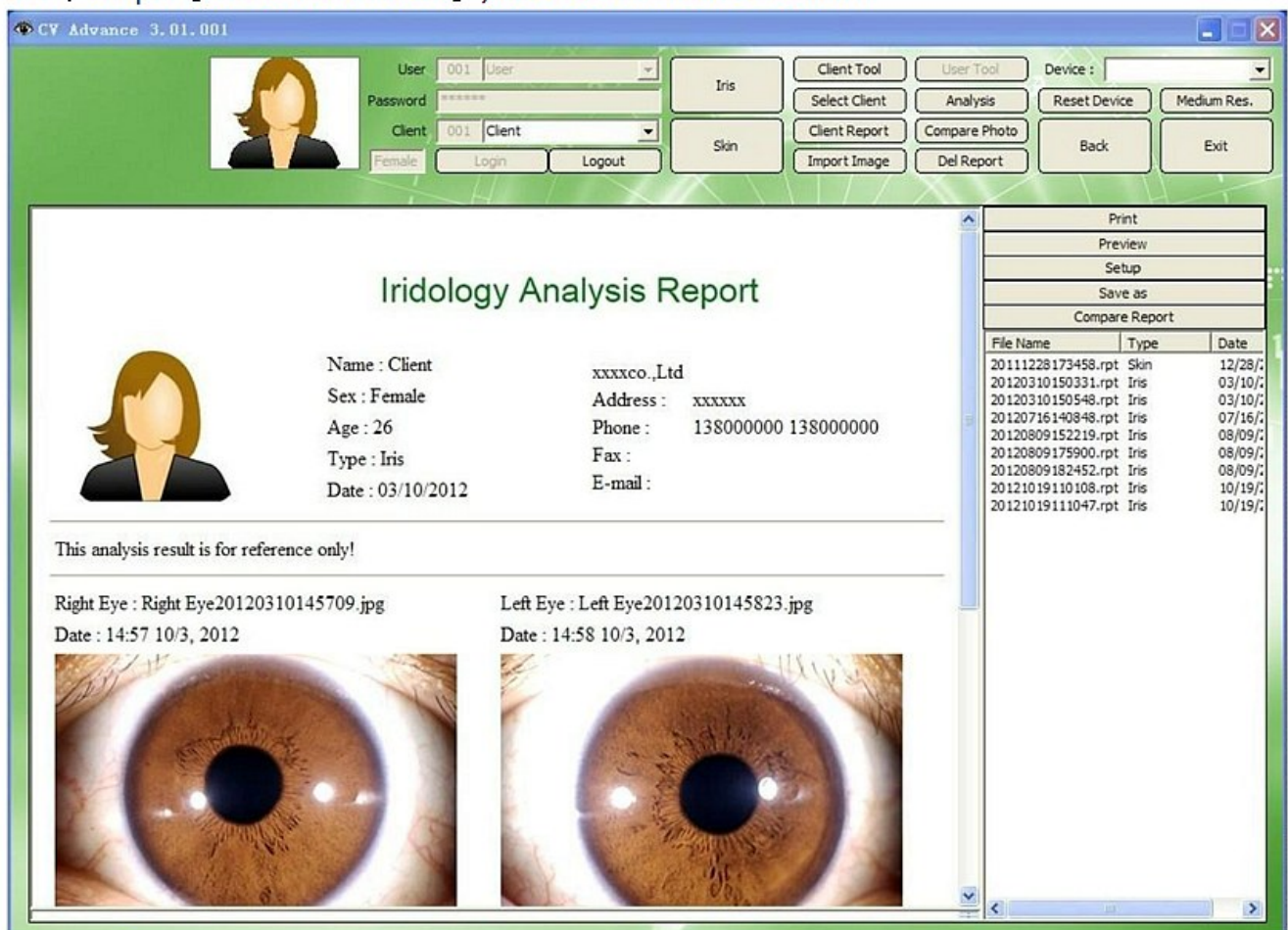


No modo de análise da íris, o primeiro ponto da íris, clique [Avanço] ,Então clique [Desenhar Aluno]
Conduzir desenhar aluno

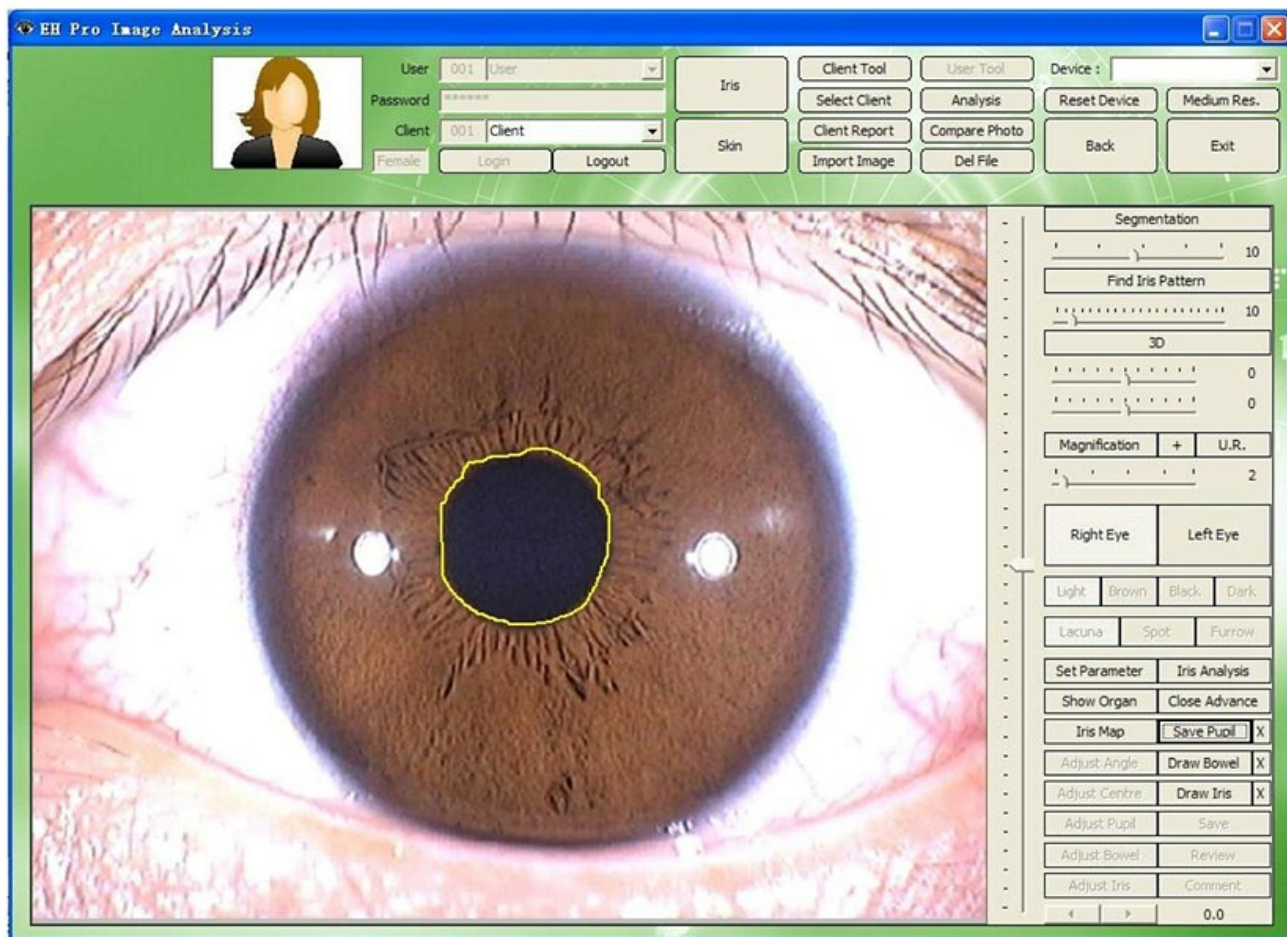

Conduzir desenhar íris



10. [3D] + [Ampliação] + [Mostrar órgão] modelo

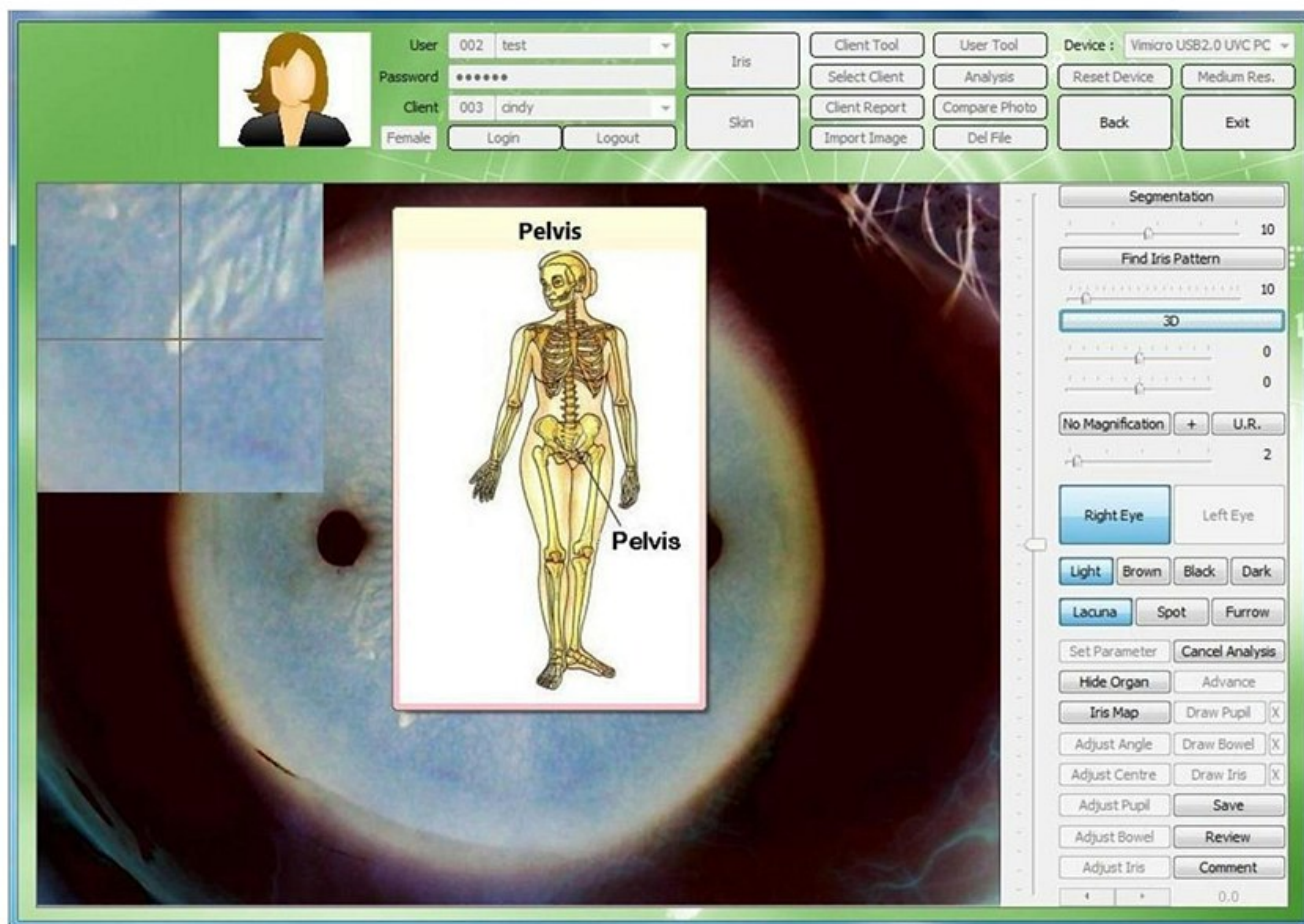

11. [Encontre o padrão da íris] + [Ampliação] + [Mostrar órgão] modelo

