



JAPA
tecnologia



EXERTO DO

Manual do JAPAtecnologia Bioplasm NLS

Catálogo

1.Introdução.....	3
2.Personalizar.....	10
3.Diagnóstico e terapia NLS.....	20
5.Cópia de segurança.....	129
6.Perceber.....	135
7.Fim.....	136

Introdução

O ****BIOPLASM-NLS**** representa uma nova geração de dispositivos de diagnóstico, conhecidos como ***“máquinas cerebrais”***. O seu objetivo é captar e interpretar informações do corpo humano através de vibrações eletromagnéticas de baixíssima frequência, capazes de ultrapassar os sentidos habituais e aceder a dados armazenados no subconsciente.

A ciência moderna demonstra que cada órgão e célula possui um padrão específico de ondas eletromagnéticas. O BIOPLASM capta estas frequências e, por meio de sensores especiais (*sensores de gatilho*), processa e apresenta as informações num computador, permitindo identificar alterações energéticas e funcionais com grande precisão.

Baseado em décadas de investigação no campo da bioeletricidade e da interação mente-máquina — desde Tesla, Lakhovsky e Rife até Voll e Kirlian — este sistema combina princípios de acupuntura, ressonância e análise bioenergética para criar imagens e gráficos detalhados do estado dos órgãos e tecidos..

Introdução

O método ****NLS**** (*Non Linear System*) distingue-se por ser ****não invasivo, rápido e versátil****, permitindo:

- * Avaliar a bioenergia de cada órgão individualmente;
- * Localizar áreas afetadas com representação visual e topográfica;
- * Diferenciar tipos de lesão (inflamatória ou degenerativa);
- * Apoiar exames profiláticos em larga escala.

Em modelos mais recentes, o BIOPLASM utiliza magneto-indutores ou condutores de ondas próximas aos ritmos cerebrais alfa ou teta, potenciando a resposta ressonante do organismo. Em alguns casos, emissores de laser são usados para intensificar a captação de sinais, embora nem todos os modelos incluam esta função.

O resultado é uma ****ferramenta avançada de diagnóstico energético****, que une tecnologia, neurociência e princípios da medicina integrativa, criando novas possibilidades para a prevenção e o acompanhamento da saúde

Diagnóstico e terapia NLS

Pesquisa: mostra o esquema de pesquisa (ou a anamnese interativa se você clicar neste botão pela primeira vez para um novo paciente).

Ver resultado (quando os fones de ouvido estão desligados) ou Análise atual (quando os fones de ouvido estão na cabeça do cliente) permite ver os resultados da pesquisa.

Análise comparativa: permite fazer a comparação de pesquisas realizadas em vários momentos ou em diferentes condições para o mesmo paciente para estudar a dinâmica de padrões de teste virtuais ou influência da Meta-terapia.

Gráfico: permite alternar entre a imagem do órgão ou sistema examinado e a curva dos processos etalônicos.

Diagnóstico e terapia de NLS

Tipo de pesquisa

Expresso: permite realizar a análise geral sem investigação detalhada.


Normal: permite realizar a análise geral sem investigação detalhada, mas com um exame mais detalhado das estruturas biológicas com as mudanças funcionais expressas.

Detalhado: permite estimar detalhadamente cada estrutura biológica da lista e a investigação leva bastante tempo.

Ciência: permite mostrar a lista de todos os órgãos.

Pesquisa: permite iniciar a investigação com os parâmetros de configuração em um esquema de configuração de investigação da lista de órgãos.

Análise atual: abre o menu da análise atual descrita mais adiante.

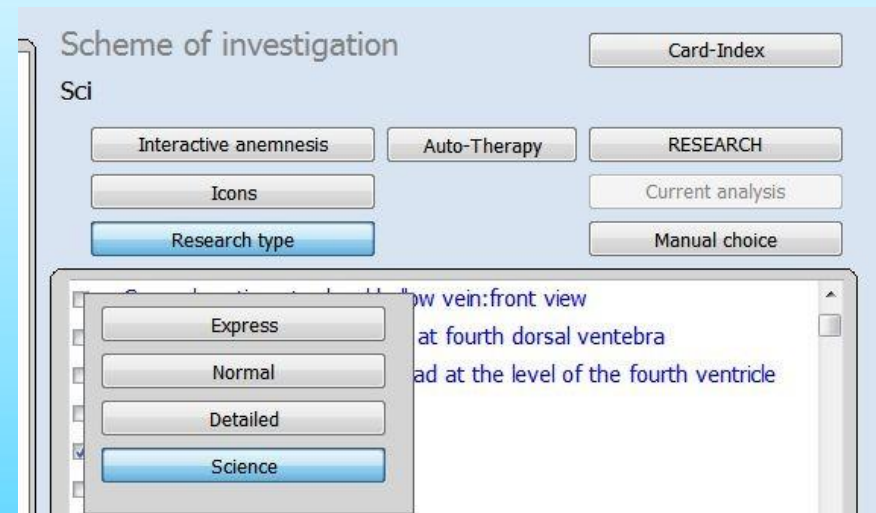

Diagnóstico e terapia de NLS

Clique em '**Escolha manual**' para mostrar algumas opções.(Fig.18.)

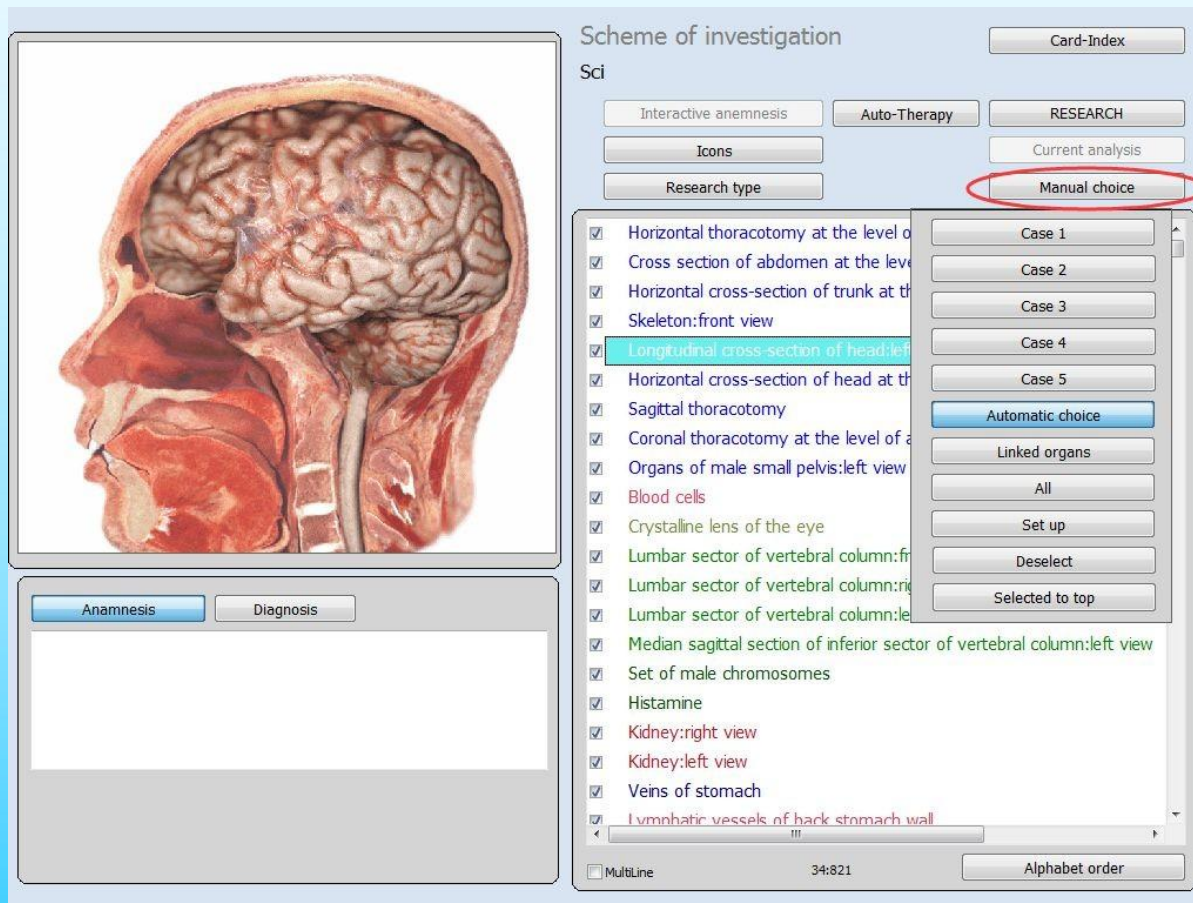


Fig.18.

Diagnóstico e terapia de NLS

Você pode clicar em um pequeno quadrado à esquerda do órgão na lista e ele será adicionado automaticamente ao esquema de investigação. Para retirar algum órgão da lista de investigação, clique nele novamente.

Escolha automática: o computador oferece vários sistemas básicos e órgãos de um corpo da lista de todas as investigações. Recomendamos usar este modo para o exame primário de cada novo paciente.

Caso 1, Caso 2, Caso 3, Caso 4 Caso 5: É o esquema de investigação personalizado.

Órgãos vinculados: escolha alguns órgãos vinculados para pesquisar automaticamente.

Todos: permite escolher todos os órgãos da lista de investigação.

Configurar: permite personalizar o caso 1, o caso 2, o caso 3, o caso 4 e o esquema de investigação do caso 5. Você pode escolher um conjunto de órgãos a serem examinados.

Cancelar seleção: exclui todos os órgãos escolhidos da lista de investigação.

Selecionado para o topo: move todos os órgãos selecionados para o topo.

Ordem do sistema: os órgãos podem ser classificados por sistema ou em ordem alfabética.

Multilina: mostra fotos dos órgãos. (Fig.19)

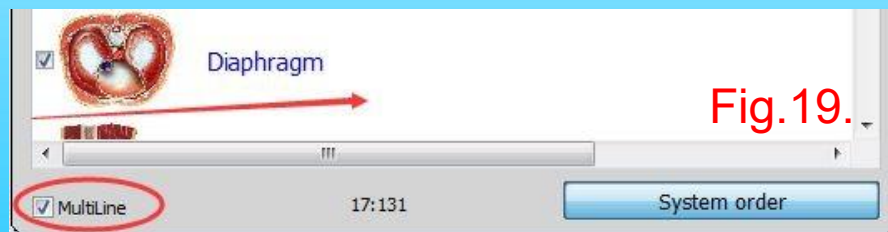


Fig.19.

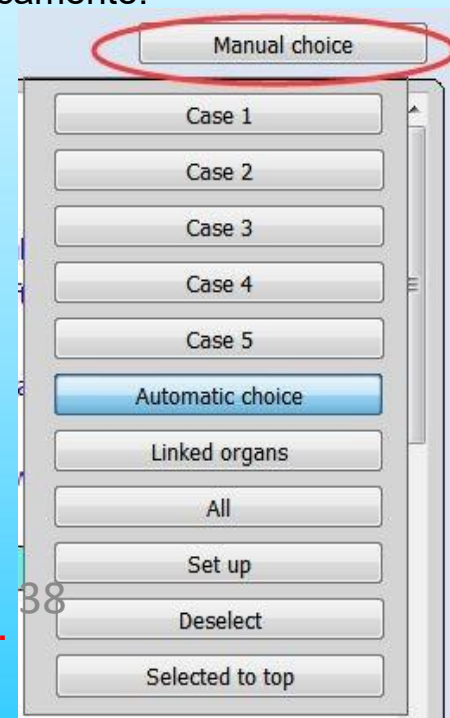


Fig.20.

Diagnóstico e terapia de NLS

- ☐ TRANSVERSAL SECTION OF RACHIS in cervical zone
- ☐ TRANSVERSAL SECTION OF RACHIS in thoracic zone
- ☐ TRANSVERSAL SECTION OF RACHIS in lumbar zone
- ☐ MIDSAGITTAL CROSS-SECTION OF BODIES OF VERT
- ☐ LONGITUDINAL SECTION OF RIGHT KIDNEY
- ☐ LONGITUDINAL SECTION OF LEFT KIDNEY
- ☐ KIDNEY; right V
- ☐ KIDNEY; left V
- ☐ NEPHRON #
- ☐ GLOMERULES AND INCOMING ARTERIES
- ☐ ARTERIES OF HEAD AND NECK; right side
- ☐ ARTERIES OF HEAD AND NECK; left side
- ☐ On the right of the heart
- ☐ On the left of the heart
- ☐ MUCOSA OF NASAL CAVITY # MK
- ☐ TRACHEA AND BRONCHI
- ☐ CORONAL CROSS-SECTION OF LARYNX AND TRACHEA
- ☐ TRANSVERSAL SECTION OF LARYNX # MK
- ☐ CROSS - SECTION OF NECK

No esquema de investigação, todos os órgãos, células e tecidos são classificados de acordo com os sistemas (Fig.21), por exemplo: a cor azul marca os sistemas de órgãos e seções do interior do corpo humano, o verde é para o sistema ósseo, etc. Na lista de órgãos classificados por sistemas, você pode ver os nomes das células marcadas com uma cor diferente, mas que pertencem aos sistemas fornecidos.

Fig.21.

Diagnóstico e terapia de NLS

Clique em '**Pesquisar**', ele funcionará automaticamente. (Fig. 22.)


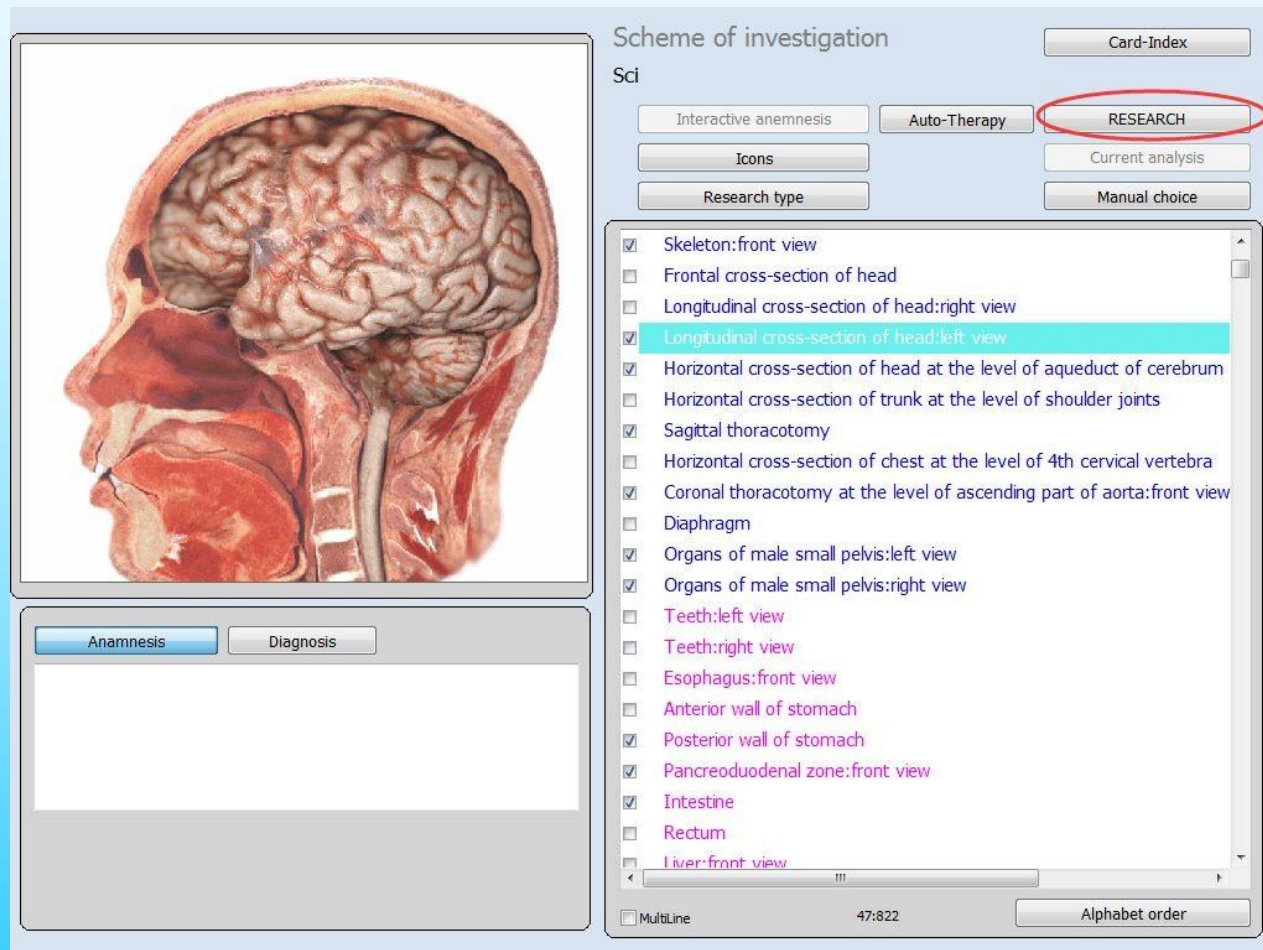


Fig.22.

Diagnóstico e terapia de NLS

Procedimento de pesquisa

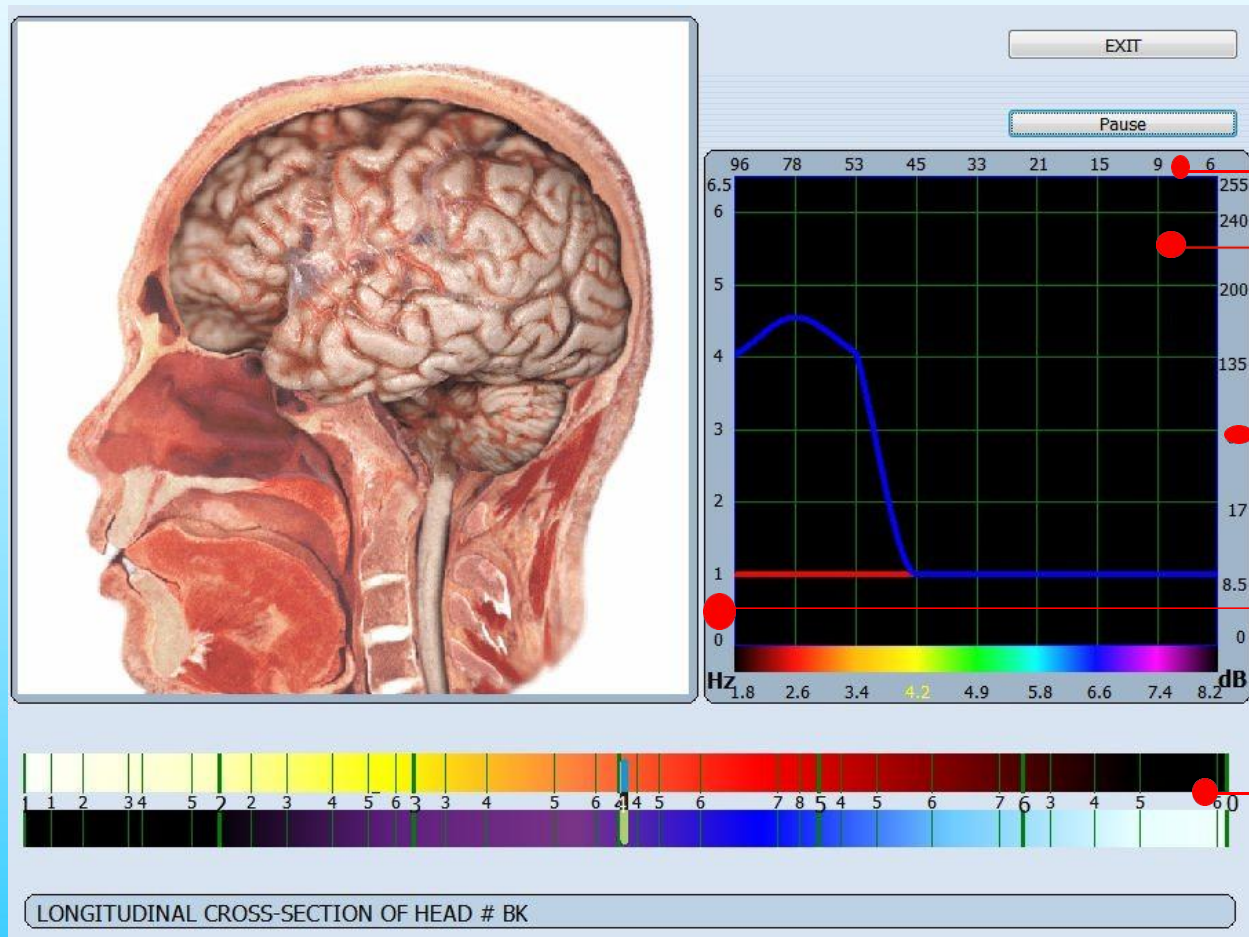

Esca da razão de pulso do sinal medido em porcentagem.

Gráfico de distribuição da amplitude do sinal medido nas frequências padrão 1,8-8,2Hz.

Esca relativa do nível de ruído no sistema em decibéis.

Esca representativa da relação sinal / ruído efetiva.

Há uma representação da esca policromática logarítmica de Fleindler na parte inferior da tela.

Fig.23.

Diagnóstico e terapia de NLS

Pausa / Retomar: permite fazer uma pausa na pesquisa se necessário. Você também pode remover os fones de ouvido durante a pesquisa e ele será interrompido automaticamente até que você os coloque novamente.

Sair: permite retornar a um arquivo de cartão.

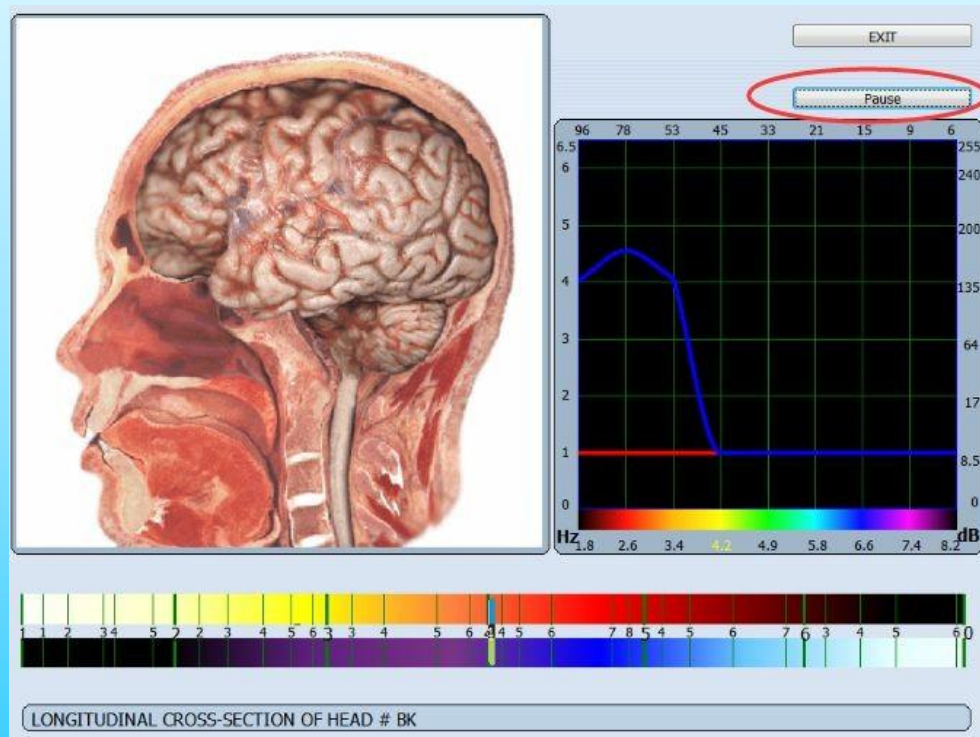


Fig.24.

Diagnóstico e terapia de NLS

O modo '**Pesquisa**' permite comparar os sinais recebidos dos fones de ouvido com os etalons. Os resultados são apresentados na escala de Fleindler (Fig.25).

Existem 6 ícones diferentes que designam os seguintes níveis:



limite inferior do normal



mudanças leves (estágio pré-clínico da doença)



padrão



mudança do grau médio (estágio clínico da doença)



limite superior do normal (estado de transição, as mudanças funcionais)




mudanças pronunciadas

Diagnóstico e terapia de NLS

Ícone de investigação

A lista de investigação mostra registros de órgãos digitalizados, o ícone de investigação representa o seguinte significado (Fig.27):

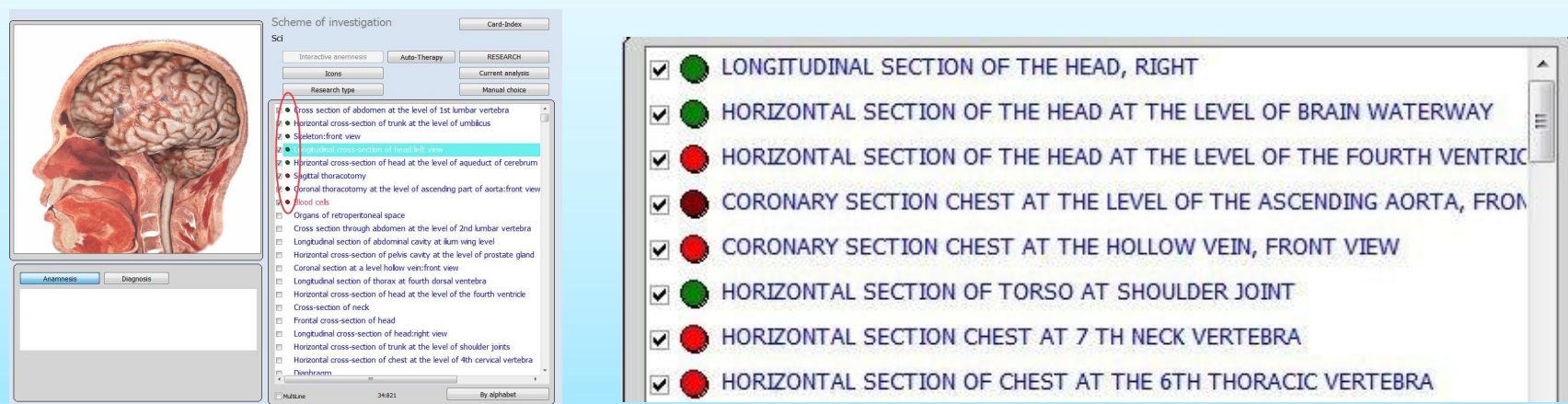

Mostra que não há nenhuma mudança funcional pronunciada nas evidências



mostra pequenas mudanças funcionais




Mostra mudanças funcionais e / ou orgânicas pronunciadas

Fig.27.

Esta é apenas uma análise preliminar da tendência de desenvolvimento da doença, que você precisa confirmar por **Análise de Entropia e NLS - Análise**.

Diagnóstico e terapia de NLS

Após a 'pesquisa feita', clique em 'Análise atual' (Fig. 28).

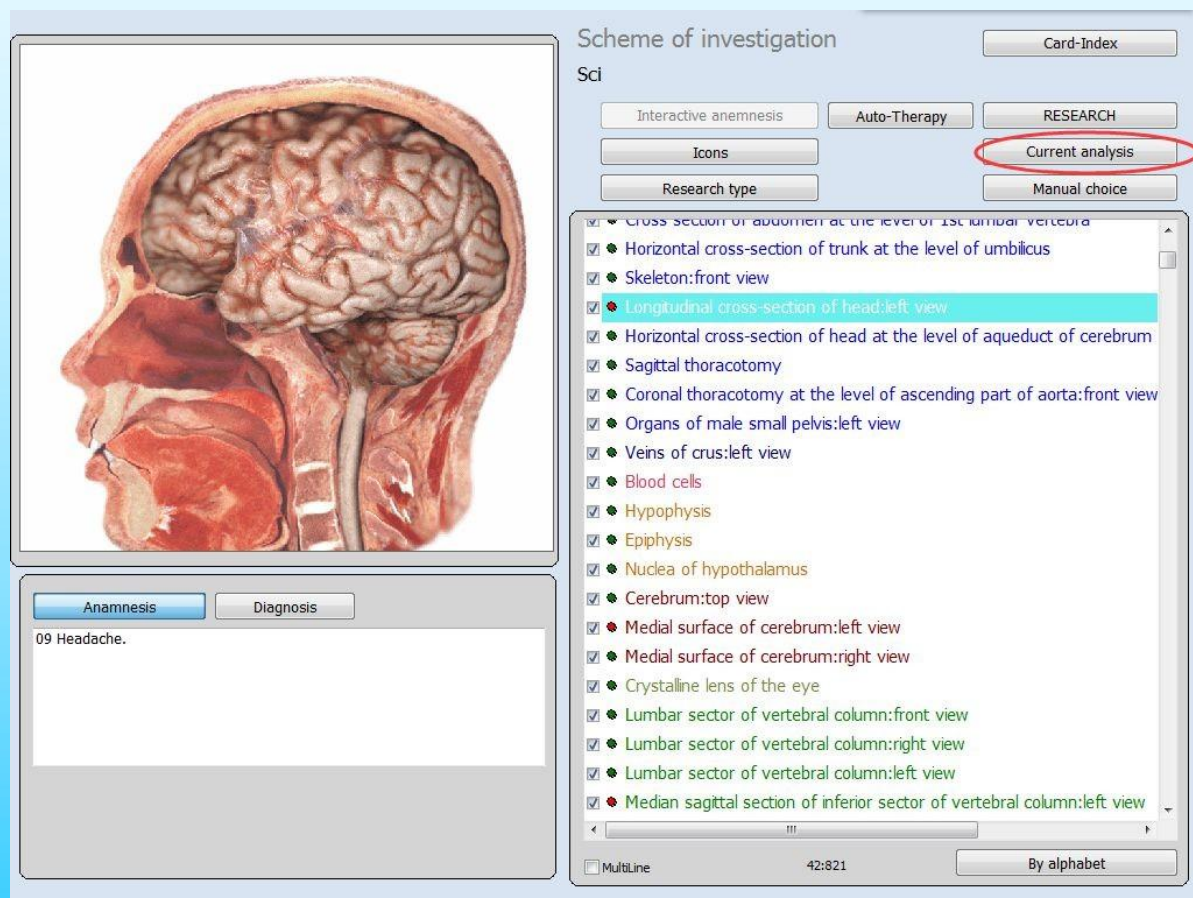

Escolha estes
dois pontos
coloridos para
análise

Fig. 28.

Diagnóstico e terapia de NLS

Localizar e avaliar: Permite alocar uma parte de um órgão e avaliá-la. É necessário notar que quanto menos área alocada, menos exatos os resultados da análise. Possibilita a delimitação de um nicho com as alterações mais drásticas da estrutura.

Clique no botão Localizar (Fig. 30). Clique na área onde deseja investigar com mais profundidade, arraste o cursor para fazer um círculo ao redor dessa área. Clique com o botão esquerdo do mouse quando terminar de desenhar o círculo. Clique em Avaliar (Fig. 31).

Fig.30.


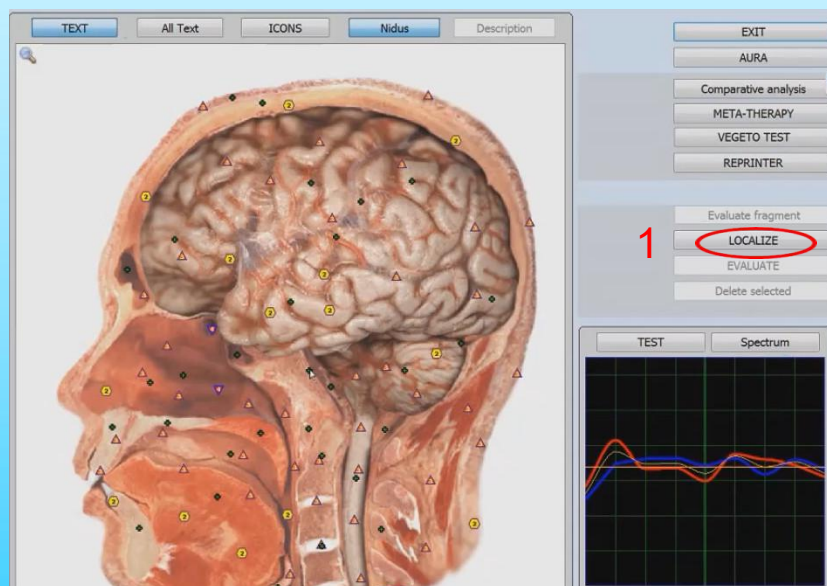


Fig.31.

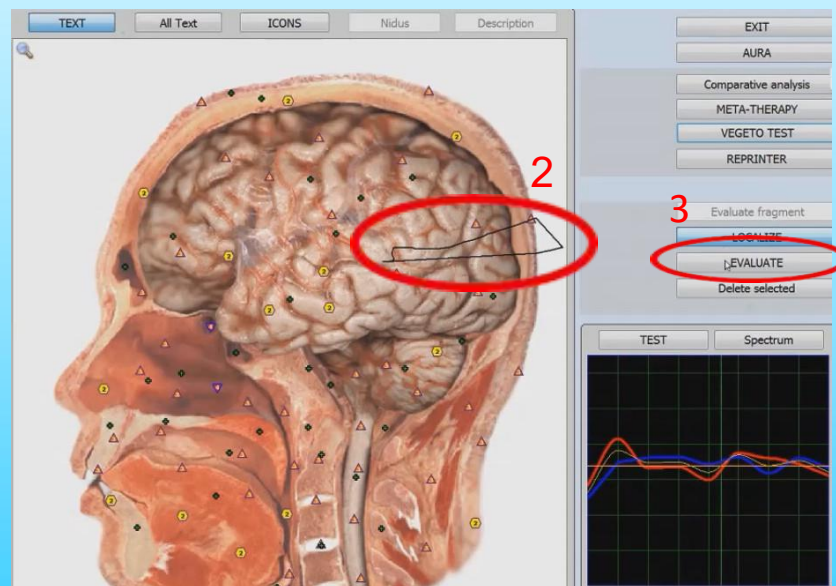

Diagnóstico e terapia de NLS

Avaliar fragmento: Ative para fazer uma avaliação mais detalhada da área marcada na imagem do órgão no modo ampliado. Clique no ícone  no canto superior esquerdo da tela. Clique na área onde deseja investigar com mais profundidade e arraste o cursor para fazer uma caixa (Fig. 32). Um clique esquerdo repetido do mouse aumenta a área. Pontos de nidus extras devem aparecer agora. Clique em Avaliar fragmento para avaliar esses pontos nidus extras.  Se você clicar, a imagem retorna ao seu tamanho inicial (Fig. 33). Este botão está disponível apenas em alguns órgãos.

Fig.32.


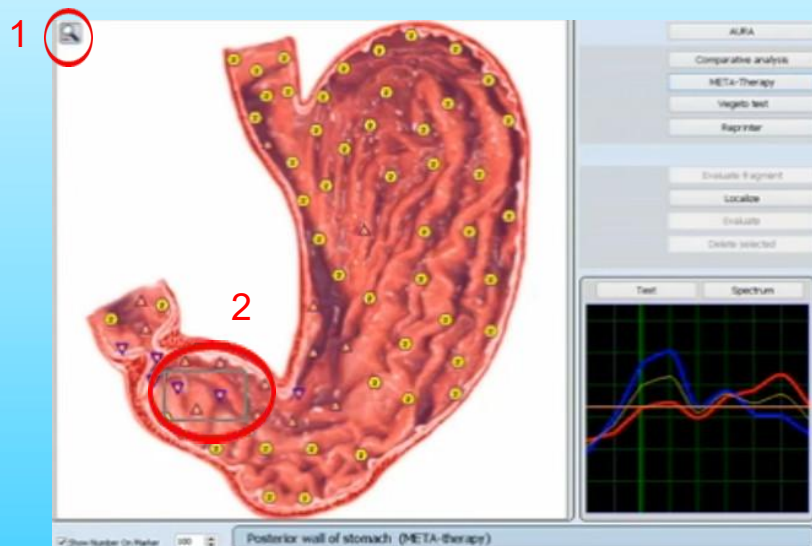


Fig.33.

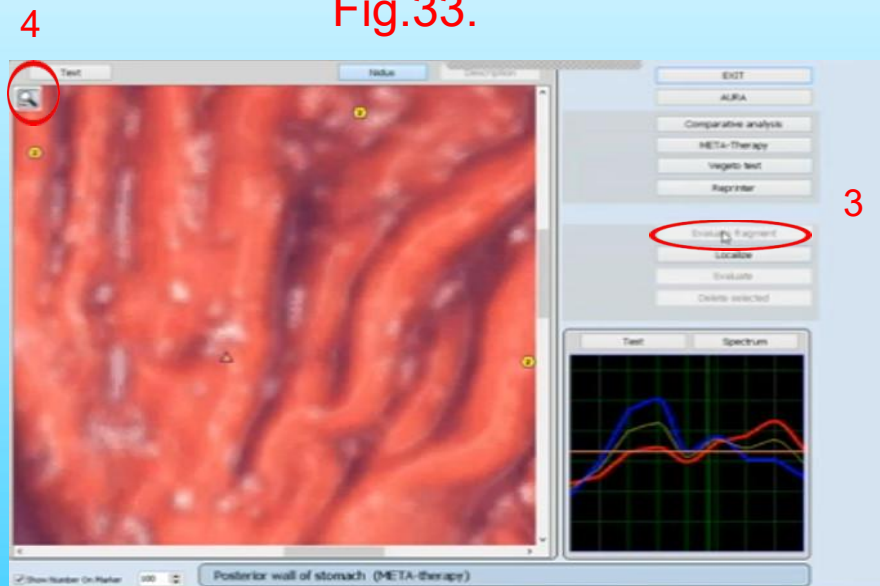

Diagnóstico e terapia de NLS

Texto: mostra cruces verdes na imagem de um órgão (Fig. 34). Se você selecionar qualquer uma das cruces com o cursor, verá em um menu pop-up as informações de ajuda na forma do nome de um órgão que especifica a cruz verde dada.

Todo o texto: mostra todas as informações de ajuda (Fig. 35).

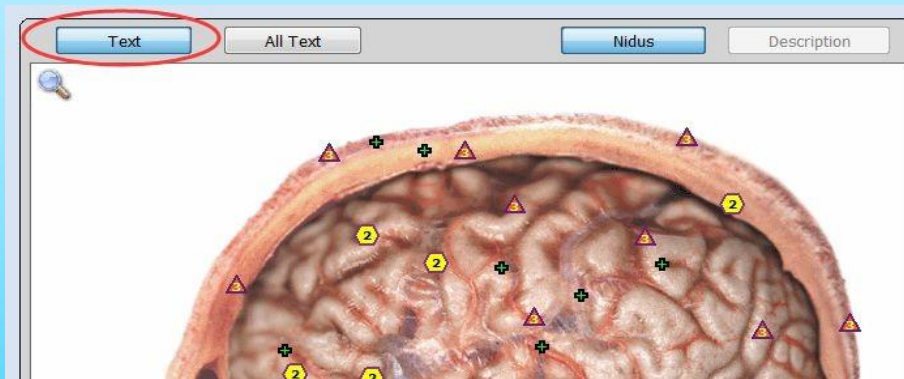


Fig. 34

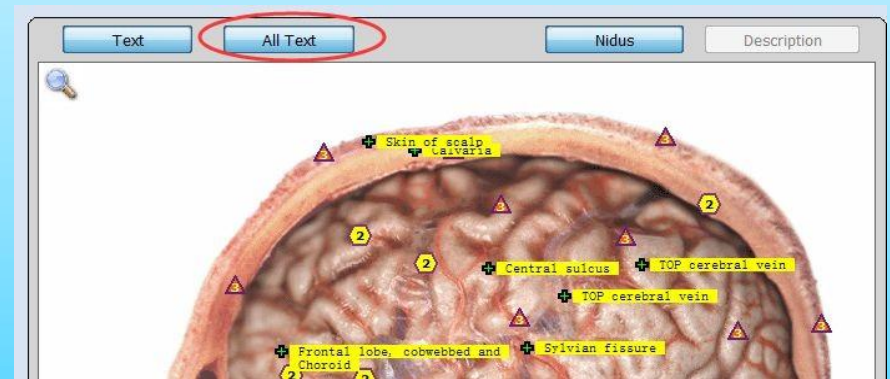


Fig. 35.

Diagnóstico e terapia de NLS

O Tratamento com **META-Terapia** (Fig. 36)

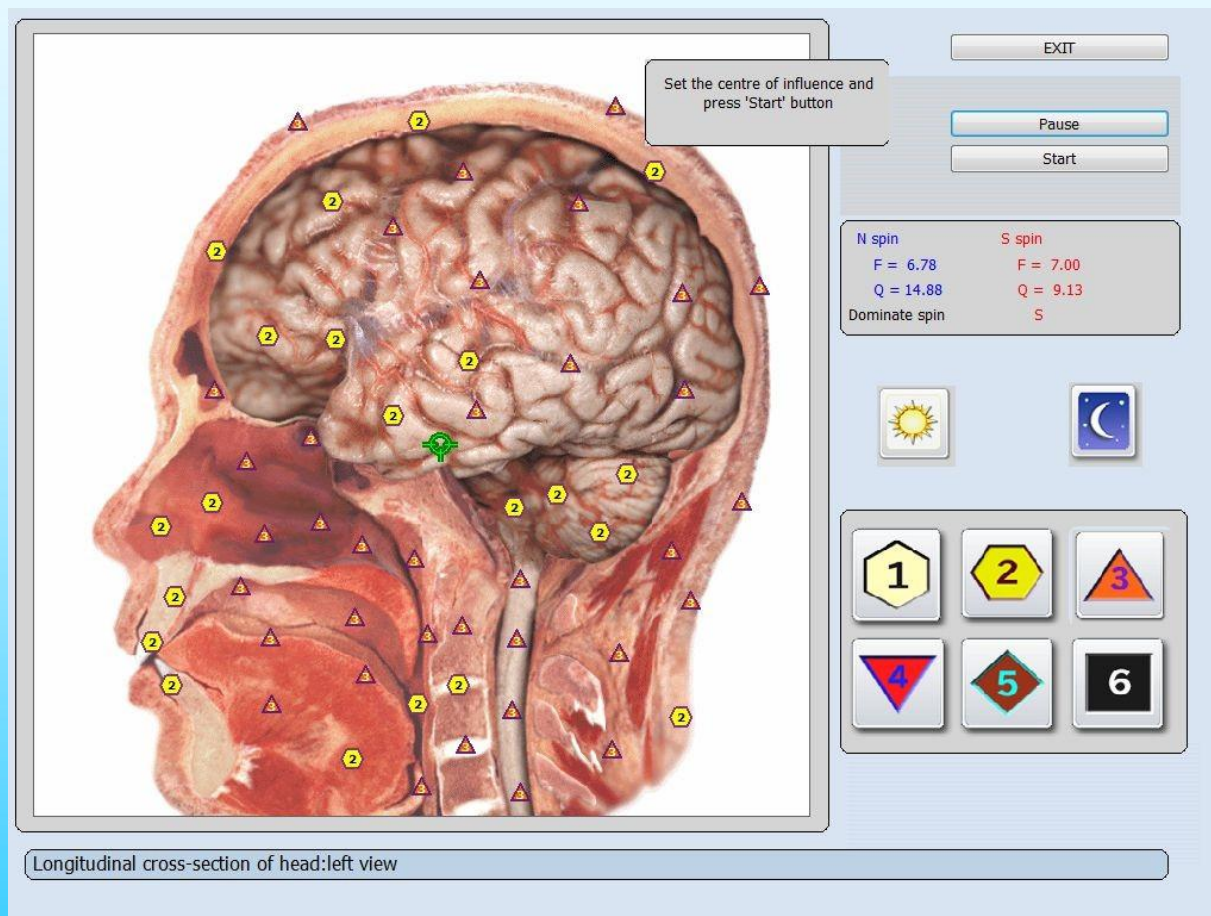


Fig.36.

Diagnóstico e terapia de NLS


Einstein disse: "Tudo na vida é vibração."

Existem muitas coisas entre o céu e a terra que não podem ser explicadas pela universidade ou pela ciência física, embora existam, sem dúvida!

A **terapia de feedback de bio-ressonância (META-Therapy)** é uma tecnologia de ponta baseada na física quântica. Bio-ressonância vem da palavra ressonar ou estar em sintonia, em sincronização, em equilíbrio. O estresse causa um bloqueio no fluxo de energia, que por sua vez causa doenças e enfermidades.

A **META-terapia** ajuda a remover esses bloqueios, permitindo que o corpo se cure.

META-Therapy é não invasivo, indolor e fortalece o sistema imunológico. É até seguro para mulheres grávidas e crianças.

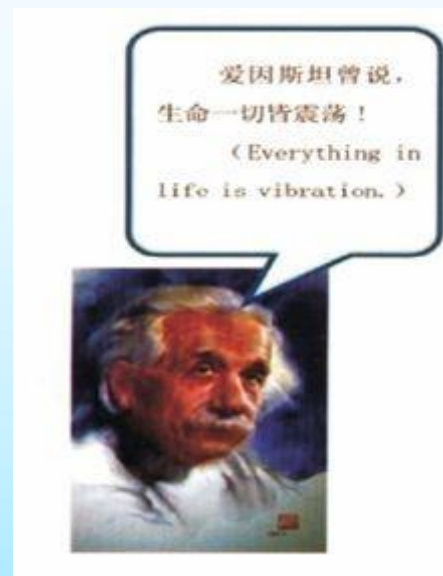

Diagnóstico e terapia de NLS

Como funciona a terapia de bioressonância

A terapia de biorressonância do BIOPLASM-NLS usa a colocação estratégica de indutores magnéticos na superfície da cabeça. Os sinais eletromagnéticos são transmitidos através dos fones de ouvido para eliminar bloqueios no fluxo natural de energia do corpo. Várias sessões são necessárias. Várias sessões são usadas como as primeiras duas sessões são usadas para criar um diagnóstico do grau de bloqueio associado à doença do paciente. Conexões de computador registram dados enquanto os eletrodos administram os tratamentos.

Por muitos séculos, métodos de cura naturais comprovados, como acupuntura, homeopatia e cura com plantas, têm usado esse princípio com grande sucesso. A META-terapia baseia-se nesta fundação, mas em uma síntese totalmente nova, utilizando a moderna tecnologia de computador e eletrônica. Isso torna possível encontrar sempre as frequências corretas, especificamente adaptadas ao paciente e mais eficazes para o tratamento. O sistema de terapia transmite essas informações do computador para o corpo em quantidades exatamente determinadas e ativa a autocura e a eliminação de toxinas.

Diagnóstico e terapia de NLS

A principal característica da **META-terapia** no BIOPLASM é que essa atividade se ajusta automaticamente, não sendo necessário fortalecer as flutuações fisiológicas separadamente e inverter as patológicas porque o aparelho pode fazer tudo automaticamente; você só precisa selecionar a seção necessária, selecionar 'Iniciar' e as execuções de terapia.

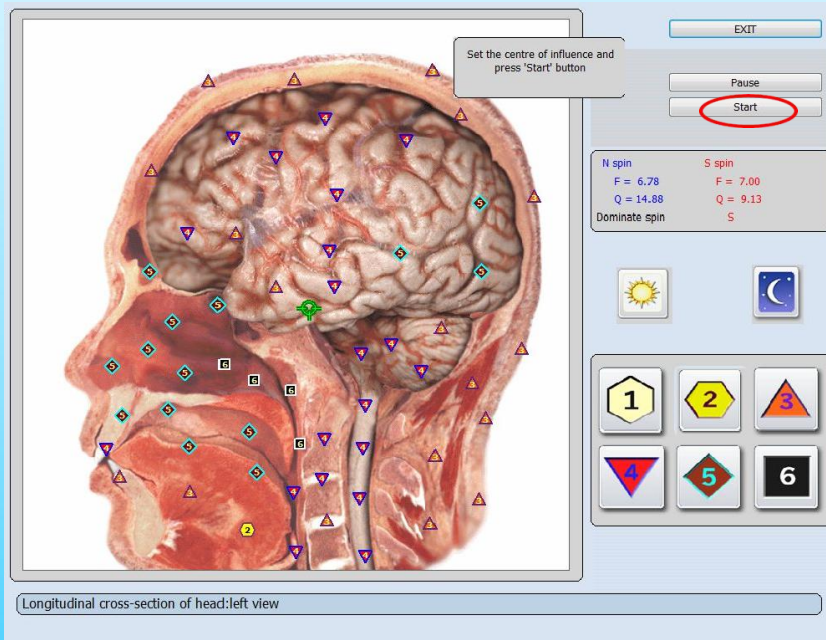


Fig. 37.

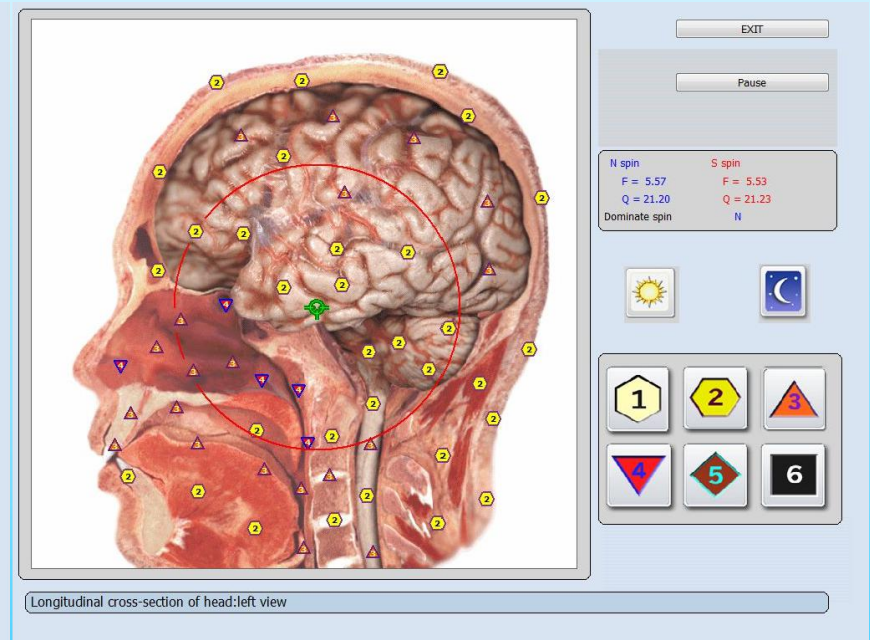


Fig. 38.

Diagnóstico e terapia de NLS

A sessão de terapia consiste em duas etapas:

R: Para o diagnóstico, o terapeuta utilizando o sistema de computador BIOPLASM-NLS determina os problemas do seu corpo, causas de tensões e bloqueios do seu sistema energético.

B: Para terapia, você recebe a quantidade exata de informações de frequência para a sua cura.

Todos os processos biológicos dentro de um corpo são governados pela energia superior dos meridianos e do sistema nervoso central. Devido ao nosso modo de vida moderno, esses processos podem ser severamente perturbados por causa do estresse interno e externo, demandas excessivas, produtos alimentares não naturais, poluição elétrica, toxinas ambientais e estresse geopático. O corpo reage ao estresse crônico permanente. Esse estresse pode resultar em um mau funcionamento do sistema imunológico. Os resultados: um espectro completo de diferentes sintomas, cansaço, alergias, doenças crônicas.

Em tal situação, é inútil tratar sintomas individuais. A cura permanente só é possível com uma desintoxicação completa do corpo, com redução do estresse e uma reativação dos sistemas reguladores, ou seja, os meridianos e o sistema nervoso central. Neste ponto, a terapia META é muito eficaz.

Diagnóstico e terapia de NLS

A **META-terapia** ajuda o corpo a lidar melhor com os problemas, toxinas e alérgenos descobertos e a eliminá-los. Além disso, os fatores causais mais elevados de distúrbios orgânicos - estresse crônico e reações perturbadas do sistema nervoso central - serão neutralizados devido à terapia. Ambos são fatores importantes para a ativação do sistema imunológico e a autocura, possibilitando a cura até de doenças de órgãos muito antigos.

O curso do tratamento precisa de 1 sessão em dias alternados. Precisa totalmente de 10 sessões. É aconselhável não fazer mais do que 5-6 órgãos meta-terapia por 1 sessão.

Uma sessão de terapia dura cerca de 5 a 20 minutos. Por quanto tempo o tratamento deve ser repetido depende da natureza da doença. Normalmente, 3 a 10 sessões são necessárias.

Nos cuidados preventivos, recomenda-se realizar 1 sessão a cada dois dias, no total são necessárias 10 sessões.

Se quiser fazer a Meta-terapia novamente, sugira que relaxe por um mês. Quando tratar doenças, 1 sessão por dia, trate 5 a 6 órgãos por 1 sessão, sugira que relaxe por 2 a 3 semanas, então você pode tratar novamente.

Diagnóstico e terapia de NLS

Além da terapia, o médico muitas vezes prescreve oligoelementos, remédios homeopáticos, chás de ervas ou outros suplementos. Estes serão testados individualmente quanto à eficácia e formarão uma extensão ideal da terapia.

A terapia entre as duas cabeças magnéticas dos fones de ouvido BIOPLASM é agradável e relaxante. Otimiza o sistema de energia do corpo e estimula o sistema imunológico e a capacidade de autocura. Os pacientes se sentem mais vitais, mais ativos e têm mais energia - muitas vezes, mesmo após a primeira sessão de terapia. A capacidade de tolerar o estresse ou as demandas externas da vida diária melhora. A dor e os sintomas costumam diminuir mesmo após a primeira sessão.

Apesar de sua eficácia, a **META-terapia** é um tratamento muito suave. Os campos eletromagnéticos aplicados são relativamente fracos em comparação com nossa exposição usual de campos eletromagnéticos artificiais. Efeitos colaterais e riscos não são conhecidos. Portanto, a terapia META também é ideal para crianças.

Diagnóstico e terapia de NLS

As causas do estresse


As seguintes causas de problemas e tensões no corpo podem ser determinadas com BIOPLASM e podem ser tratadas:

Órgãos: Existem infecções crônicas, degeneração ou distúrbios metabólicos? Deficiências autoimunes? Riscos de tumores?

Tecidos, esqueleto, músculos, sangue: as toxinas ambientais ou metabólicas são armazenadas? Qual é a reação individual a eles? Existem infecções agudas ou crônicas? Estresse?

Sistema nervoso central: Quais reações de estresse estão presentes devido a problemas emocionais ou demandas excessivas externas? Quais reações de desintoxicação são bloqueadas como resultado disso? Que efeito isso tem no corpo?

Toxinas + alérgenos: existem tensões devido a metais pesados (ou seja, chumbo, cádmio)? Estresse devido a toxinas ou poluentes ambientais (formaldeído, solventes, pesticidas, etc.)? Existem alergias alimentares (leite, porco, trigo, fermento, aditivos)? Outras alergias: pólen, animais de estimação, poeira, fungos, etc.? Estresse eletrosmog ou geopático?

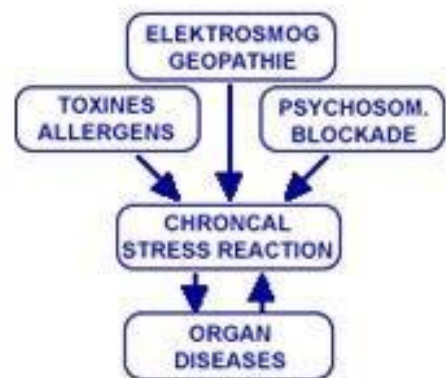

Diagnóstico e terapia de NLS

Cura através da informação

Os meridianos de acupuntura e todos os sistemas do corpo que recebem informações e energia desses meridianos, os nervos, os órgãos e os tecidos do corpo, podem ser influenciados positivamente com o sinal de informação adequado. Esses sinais, por exemplo, são sinais de frequência de substâncias, minerais, ervas ou remédios homeopáticos.

A terapia de biorressonância é uma terapia indolor que lida com as causas ocultas de doenças e problemas de saúde, avaliando e depois normalizando os desequilíbrios energéticos. Toda matéria, viva ou inerte, ressoa em uma determinada frequência eletromagnética, incluindo o corpo humano. Substâncias tóxicas no corpo, como infecções, produtos químicos e metais pesados, alteram o padrão normal do corpo e o corpo começa a se adaptar à nova frequência, causando doenças ou outros distúrbios. Usar a bioressonância para modificar e corrigir os padrões de energia permite que o corpo retorne ao seu estado natural e saudável, permitindo que as pessoas se tornem livres de vícios, alergias e dor.

Isso ocorre porque a bioressonância melhora a própria regulação e desintoxicação do corpo. O corpo precisa se desintoxicar dos resíduos acumulados para permitir que os nutrientes sejam entregues em nível celular. Uma dieta saudável é necessária junto com a bioressonância e seu terapeuta recomendará a melhor dieta para você junto com quaisquer suplementos que possam ser necessários.

Diagnóstico e terapia de NLS

A terapia com BIOPLASM-NLS visa corrigir o desequilíbrio corporal e a radiação eletromagnética correspondente por meio de preparações de informações (metazodos).

Os metazodos BIOPLASM são combinações específicas de frequências encontradas para ressoar com o estado atual de doença (as formas de onda patológicas são invertidas em 180 °). Eles podem ser recebidos pelo cliente através do próprio BIOPLASM ou transferidos para uma matriz (Água, Álcool, Açúcar, Parafina) para administração oral ao longo do tratamento. Este método de tratamento é semelhante ao utilizado no protocolo de tratamento NES-Pro e é responsável por uma ampla esfera de influência deste tipo de preparação e pela ausência de efeitos colaterais prejudiciais e contra-indicações nos casos em que os remédios convencionais são prescritos simultaneamente.

A análise NLS e a terapia META, que foram desenvolvidas na Rússia, são os métodos modernos para a análise holística eficaz e terapia de doenças crônicas, dores e problemas de saúde em geral.

Pela primeira vez na medicina energética, a META-terapia não apenas trata os órgãos, mas também trata os bloqueios de energia no sistema nervoso autônomo e no sistema nervoso central - de forma sistemática e rotineira.

A autorregulação do corpo é ativada de forma decisiva, aumentando a capacidade do corpo de se curar. As causas de qualquer doença são tratadas, e não os sintomas ou os órgãos individuais.

A palavra “META-terapia” foi usada pela primeira vez por seu inventor, o médico russo Dr. Grig Butov. Representa o objetivo da terapia de tratar a pessoa como um todo.

A META-terapia funciona com o dispositivo “BIOPLASM”, uma nova máquina de diagnóstico e terapia da medicina energética, que une o sistema médico complementar tradicional e modernos resultados de investigação numa só síntese. Usando a terapia META, a estimulação biológica pode ser mantida sem medicação.

A META-terapia é um aparelho médico, mas por si só não consegue curar doenças graves. A redução ou interrupção da medicação depende dos resultados da terapia, que devem ser discutidos com seu médico assistente.

Diagnóstico e terapia de NLS

Se clicar no botão **Meta-terapia**, entrará em um modo que permite realizar a terapia bioressonante de um órgão. Escolha o centro de influência na imagem de determinado órgão tendo posicionado o cursor do mouse em um círculo verde em sua parte necessária.



é "Protetor". (Sistema padrão)



é "Destruidor". (para usuários avançados)

Os botões **"Protetor"** e **"Destruidor"** são usados para alterar o caráter do efeito.

A função de onda do modo "protetor" do tecido saudável é aumentada, resultando na ativação da reação compensatória do tecido.

A função de onda do modo "destruidor" do agente patológico é suprimida, resultando na diminuição do nível de reações adaptativas.

Diagnóstico e terapia de NLS

Clique no botão "Meta-terapia".

Clique no botão "Destruidor" (lua). (observação: uma vez que o botão Destructor foi ativado, nenhum outro teste ou terapia pode ser feito por 24 horas). Clique em "iniciar"  . (fig. 40)

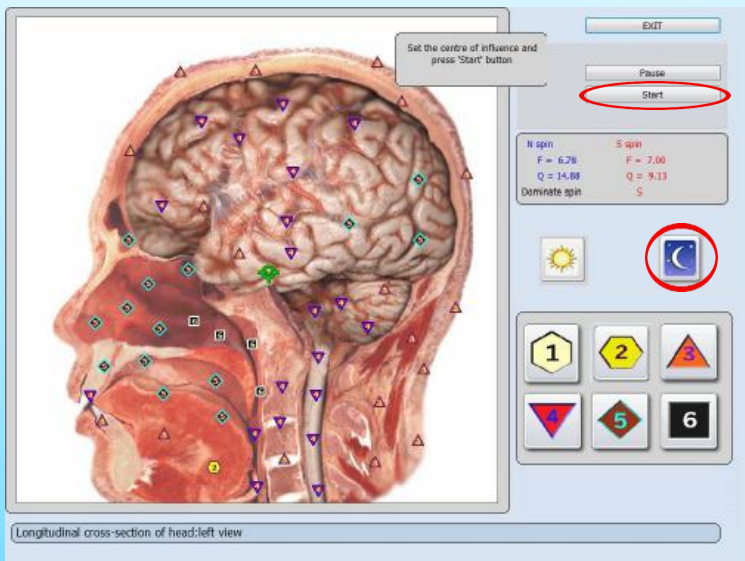


Fig. 40.

Pode ter que repetir várias vezes. Os números vão aumentar, o que indica que o tratamento está agravando o etalon e enfraquecendo o microrganismo.

Diagnóstico e terapia de NLS

Você pode observar a influência em detalhes pressionando o botão **Melhoria** ou **Piora** (Fig. 45).

Ao clicar em **Melhoria** os pontos com parâmetros muito próximos do padrão começarão a piscar nas imagens de um órgão.

Após pressionar **Piora**, os pontos que apresentam desvio significativo do padrão piscarão.

Também é possível comparar os resultados de influência com o auxílio de curvas dos processos.

Text: mostra cruzeiros verdes em imagens de órgãos com a descrição correspondente de partes de órgãos. Se você selecionar qualquer uma das cruzeiros com o cursor, verá em um menu pop-up as informações de ajuda na forma do nome de um órgão que especifica as cruzeiros verdes fornecidas.

Sair: Para finalizar seu trabalho com o menu de análise comparativa.

Teste de vegeto

Um dos usos mais populares do BIOPLASM-NLS é o “teste Vegeto”. O controle da ressonância vegetativa traz ideias e notícias compreensíveis sobre a maneira como os diversos medicamentos podem afetar o corpo humano. Sabemos que o mundo material possui frequências assim como o corpo humano. Estas frequências contêm uma informação e esta informação pode ser lida pelo BIOPLASM.

As frequências de um medicamento podem entrar em harmonia com uma pessoa ou não. Essa ideia se transforma no princípio da ressonância. Quanto mais próxima a frequência da medicação estiver da nossa frequência, mais eficiente ela será. Por isso é importante escolher aditivos alimentares, fórmulas homeopáticas, remédios alopáticos, vitaminas e plantas (fito-aroma) de acordo com o princípio da ressonância.

O controle Vegeto do BIOPLASM pode ser usado para verificar o ajuste de um medicamento ao órgão problemático de uma pessoa. Existem duas maneiras de proceder. Seja pela verificação da relevância de um medicamento que o paciente já usa ou pela comparação de um medicamento pré-existente encontrado no banco de dados fornecido.

Diagnóstico e terapia de NLS

Teste de vegeto (externo)

Clique em " **Teste Vegeto** ". Você precisa inserir o nome do padrão testado (Fig. 46). Por exemplo, " **Vitamina C 3g** ". Em seguida, clique em " **OK** ". Clique em Pausar e em Sair se desejar sair do menu.

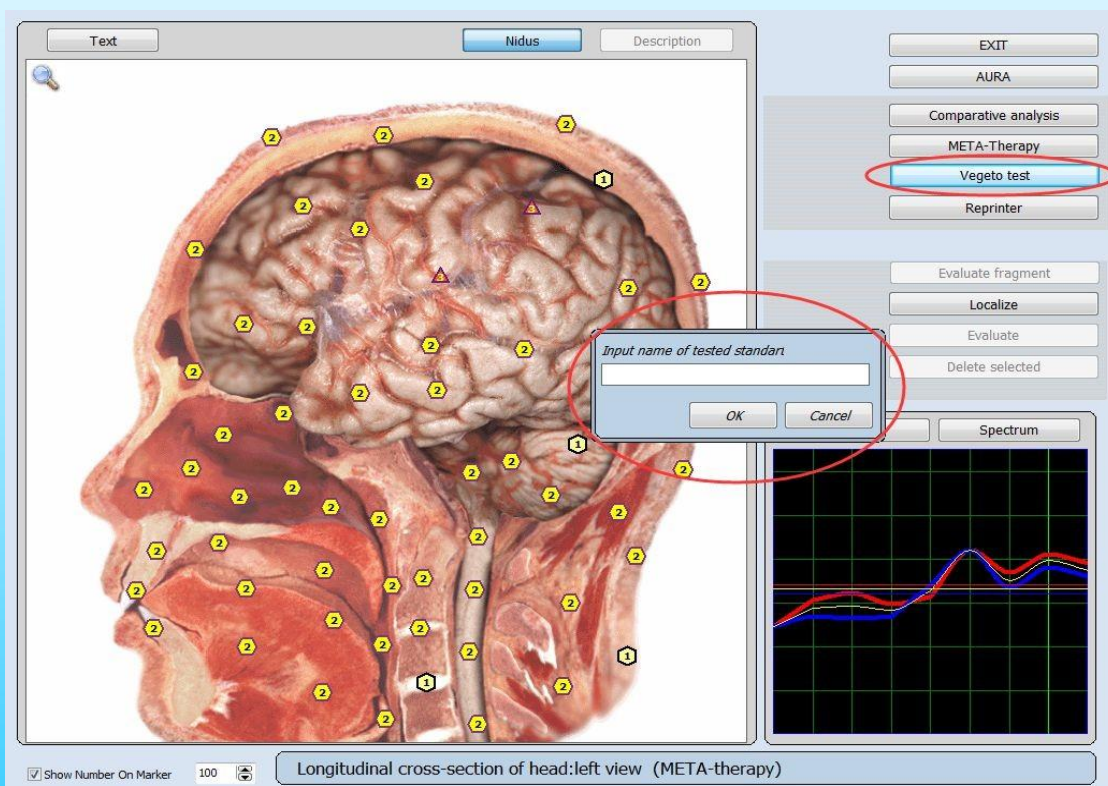


Fig.46.

Diagnóstico e terapia de NLS

O botão fornecido permite realizar o teste Vegeto externo com o uso da câmara ressonante para verificar a eficiência dos padrões que não foram incluídos na matriz, embora o banco de dados do dispositivo contenha uma quantidade considerável de etalons e o dispositivo possa simular os resultados de sua aplicação e possíveis consequências negativas.

Além disso, use a análise comparativa para avaliar a eficiência do medicamento administrado para este órgão. Compare o modelo virtual do órgão durante a pesquisa com o modelo virtual do órgão após o uso do etalon, e avalie o fortalecimento / enfraquecimento das reações compensatórias do organismo clicando no botão análise comparativa.

Além disso, é importante olhar para a alteração do valor do índice D de uma determinada doença, após fazer um teste vegeto, porque se quer saber se aquela pílula específica é certa ou não para aquela doença específica.

Diagnóstico e terapia de NLS

Clique em 'Testar' (Fig. 47)

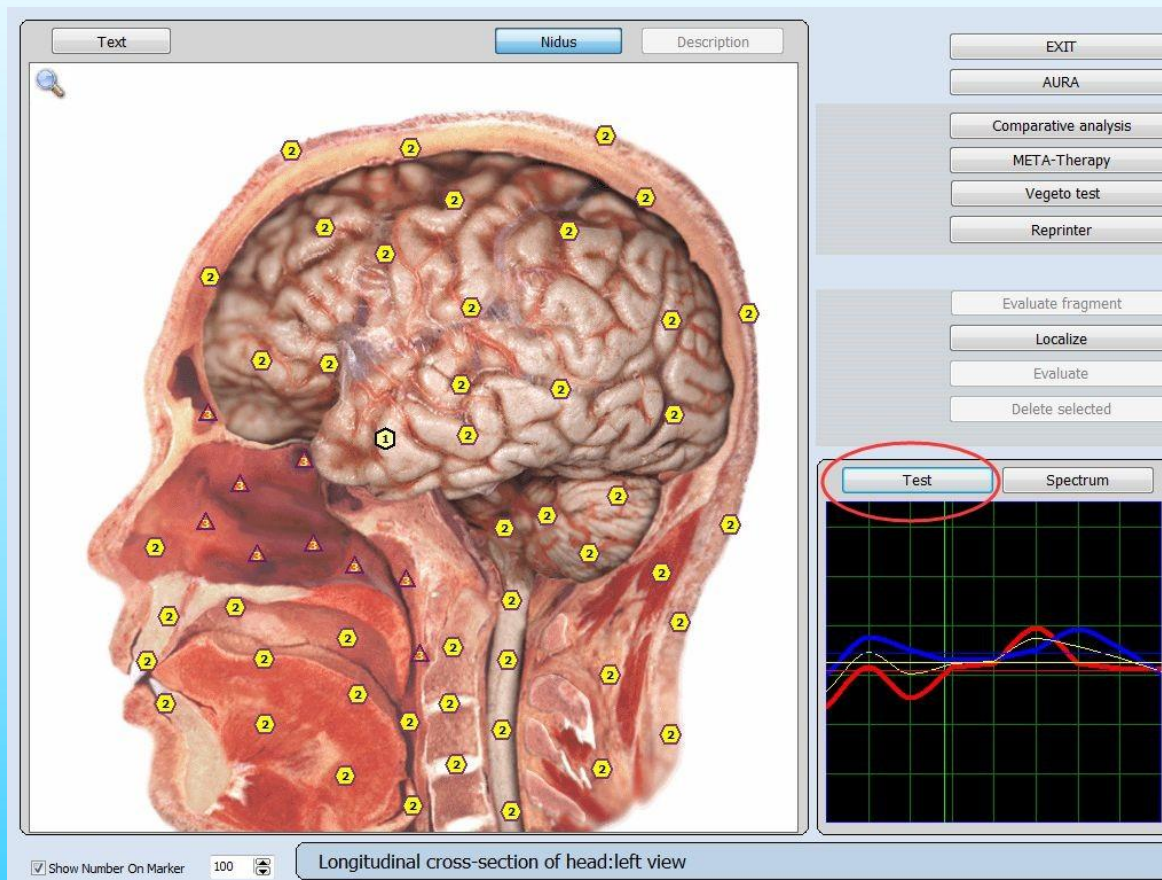


Fig.47.

Diagnóstico e terapia de NLS

Irá aparecer esta página (lista Etalon)(Fig. 48)

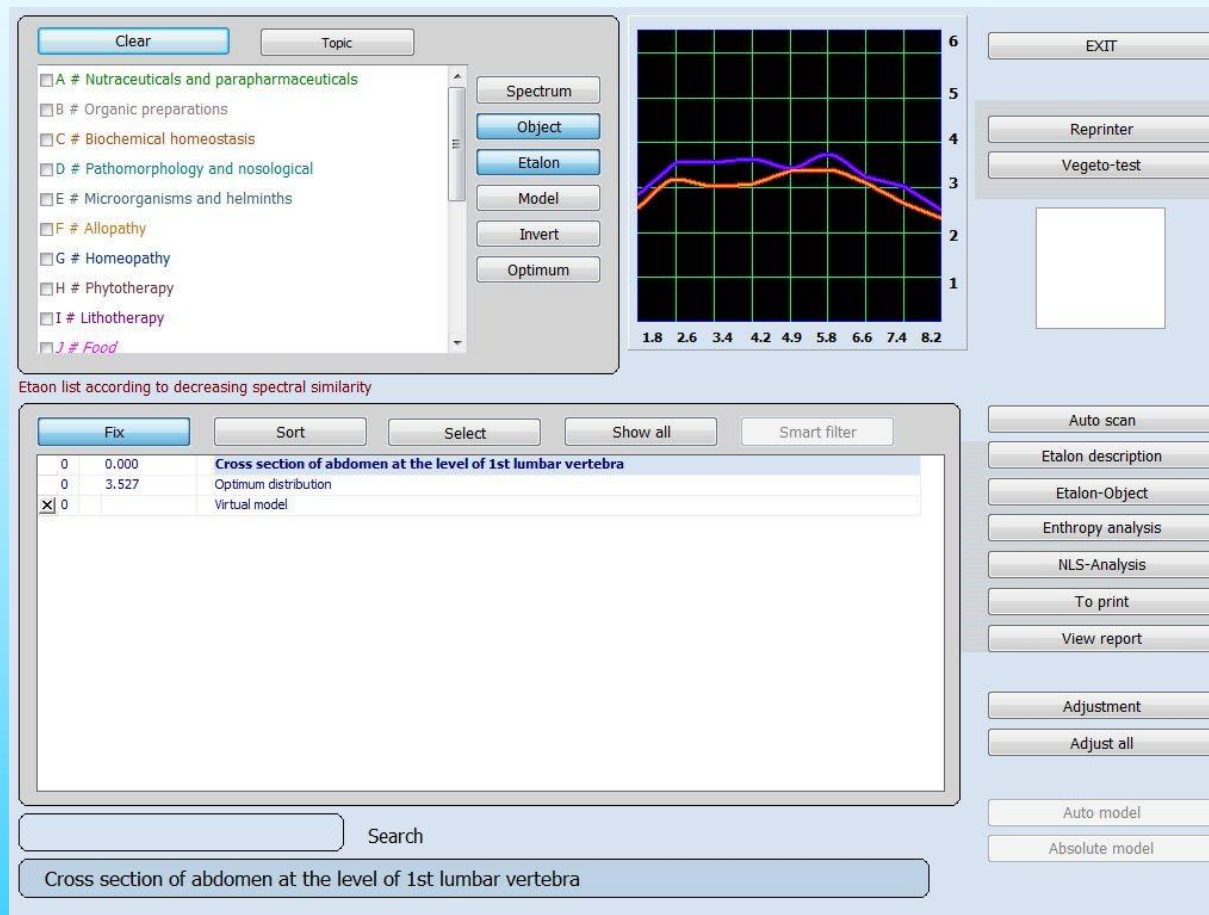


Fig.48.

Diagnóstico e terapia de NLS

Teste Vegeto (interno)

Se você deseja testar etalons do catálogo do programa, escolha o teste Vegeto (Fig. 53).

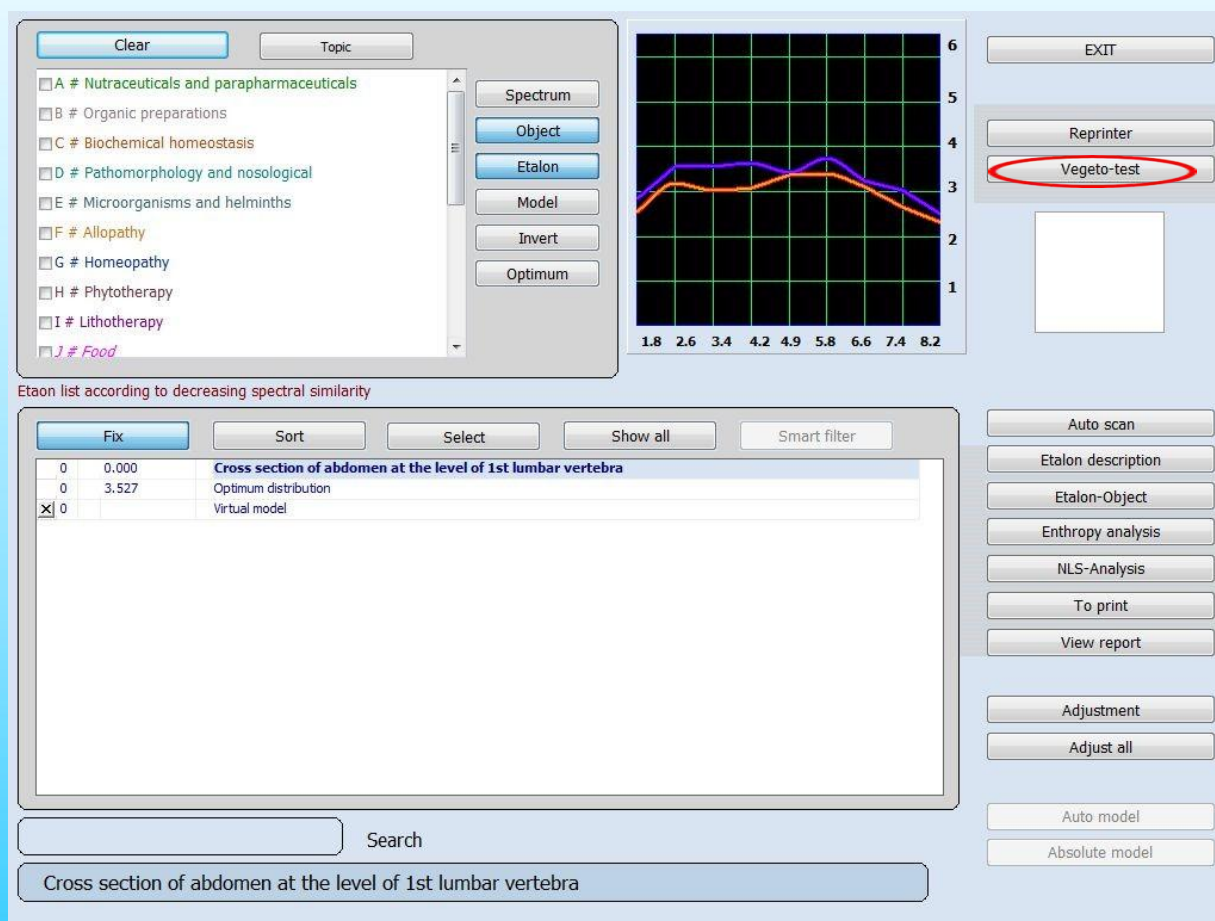


Fig. 53.

Diagnóstico e terapia de NLS

Marque um etalon à esquerda, digamos **Fitoterapia**. Na janela central, você verá Etalons for Phytotherapy. Três etalons apareceram na zona vermelha (seu número de índice é inferior a 0,425). Isso significa que as funções de onda desses étalons combinadas com a função de onda do órgão se aproximam deste étalon o máximo possível e isso é saudável (Fig. 54).

Vegeto-test (interno)

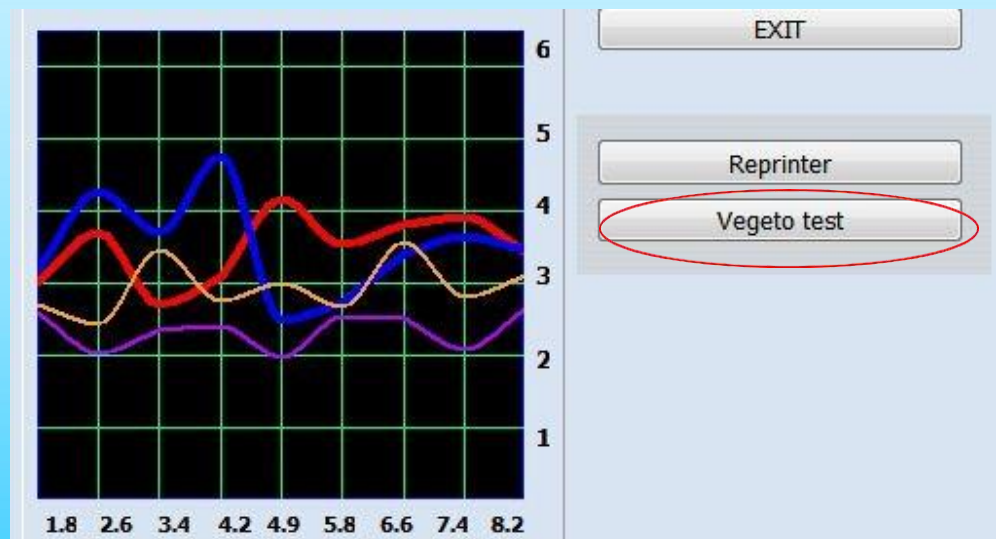


Fig. 55.

0.349	PETROSELINUM SATIVUM HOFFM*
0.410	CALTHA PALUSTRIS*
0.411	ADONIS VERNALIS*

Fig. 54.

O programa permite simular o processo de influência de um etalon escolhido em um órgão. Para tal escolhemos um etalon e realizamos o **teste Vegeto** (os auscultadores devem estar na cabeça do cliente). Escolha o etalon e clique no botão Vegeto test situado à direita (Fig. 55), o Vegeto-test começará automaticamente. Além disso, use a análise comparativa para avaliar a eficiência de um determinado medicamento para aquele órgão ou doença específica, conforme visto anteriormente no teste de vegeto externo.

Diagnóstico e terapia de NLS

"Lista de grupos" contém uma lista de grupos etalon comuns:

NUTRACÊUTICOS E PARAFARMACÊUTICOS

Nesse grupo, são registradas as características de onda dos suplementos biologicamente ativos (BAS) produzidos pelas principais empresas russas e estrangeiras que produzem e fornecem suplementos nutricionais.

PREPARAÇÕES ORGÂNICAS

Contém os etalons (padrões) das características espectrais dos tecidos saudáveis do corpo.

A lista de etalons é organizada em ordem decrescente de semelhança espectral com o objeto sob investigação. O tecido saudável tem sinais de entrada e saída semelhantes (os gráficos vermelho e azul, respectivamente).

Quanto maior a semelhança entre a preparação do órgão e o objeto sob investigação, mais intacto ficará o tecido. Por outro lado, quanto maior a diferença, maior será o dano ao tecido sob investigação.

Diagnóstico e terapia de NLS

HOMEOSTASE BIOQUÍMICA

Este programa realiza uma avaliação qualitativa dos principais fatores bioquímicos, avaliando as funções de onda dos tecidos corporais. Esta avaliação é realizada usando o modo de análise NLS.

Observe que os valores mais baixos de concentração de enzima (hormônio) dentro dos limites normais correspondem a 2 no gráfico.

Considerando que, os maiores valores dentro dos limites normais correspondem a 6. Os valores dos fatores iguais a 3, 4 ou 5 correspondem ao 'modo' do fator, e os valores extremos 1 e 7 caracterizam fatores bioquímicos além das normas fisiológicas, inferior e superior, respectivamente.

As regras padrão para fazer análises bioquímicas usando métodos clínicos convencionais devem ser usadas ao analisar os resultados do computador.

PATOMORFOLOGIA E NOSOLÓGICA

Isso mostra uma lista dos etalons de processos destrutivos.

Esta seção contém as condições patomorfológicas básicas peculiares a tecidos isolados de um organismo. Cada processo destrutivo tem um gráfico distinto.


Diagnóstico e terapia de NLS

MICROORGANISMOS E HELMINTOS

Nesta seção são registradas as principais características dos agentes de infecção: bactérias, vírus, micoplasmas, riquetsias, fungos e helmintos. Isso apresenta mudanças na forma de altos picos de dissociação dentro da faixa de frequência que representa as frequências naturais do tecido.

Por exemplo, *Opisthorchis felineus* tem uma alta dissociação em frequência - 4,9 Hz - tecido parenquimatoso do fígado e tecido excretor de bile. Sabe-se que esses tecidos são amplamente afetados pelos trematódeos *Opisthorchis felineus* opisthorchiasis (Fig.56)

Fig. 56.

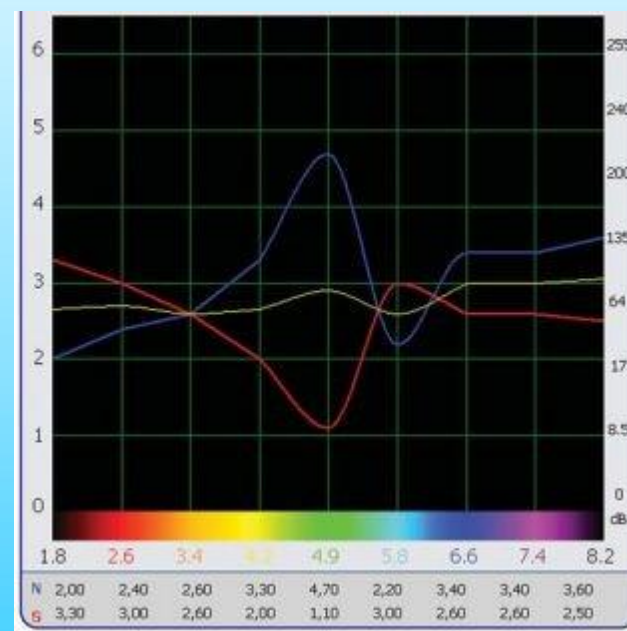

Diagnóstico e terapia de NLS

ALOPATIA

Nesse grupo, são registradas as características de onda das principais preparações medicamentosas químicas (sintéticas) utilizadas na medicina convencional.

HOMEOPATIA

Neste grupo, as características de onda das preparações homeopáticas são registradas.

FITOTERAPIA

Nesse grupo, são registradas as características das ondas de plantas medicinais que crescem no meio-oeste da Rússia.

Diagnóstico e terapia de NLS

COMIDA

Nesse grupo, são registradas as características de onda dos alimentos separados em grupos (carne, peixe, laticínios, vegetais, frutas, óleo, bebidas, temperos, etc.). Alimento dietético, devido à sua ação terapêutica recomendado para uso, destacado na cor vermelha. Alimentos não recomendados destacados em preto, neutro - em rosa.

ALERGENS

Nesse grupo, são registradas as características de onda de alérgenos alimentares, domésticos, animais, vegetais e industriais de todos os tipos.

LITOTERAPIA

No programa, as características espectrais de gemas e minerais são representado juntamente com a descrição da ação terapêutica. Ao pressionar o botão "Imagem" você pode ver fotos de minerais. O programa pode escolher um mineral para um paciente, adequado de acordo com as características espectrais para posse permanente ou para tratamento de doenças específicas. Usando características espectrais específicas dos minerais, moduladas e irradiadas pelo aparelho, é possível tratar doenças agudas e crônicas.

Diagnóstico e terapia de NLS

FLORES DE BACH

S7 SAHASRARA meridianos correspondentes: VC + VG correspondentes meridianos correspondentes: VC + VG: V

S6 AJNA meridianos correspondentes: MC + TR correspondentes meridianos correspondentes: MC + TR: MC +

S5 VISUDDHA meridianos correspondentes: P + GI + Sk + Sd correspondentes meridianos correspondentes: P

S4 ANAHATA meridianos correspondentes: C + IG correspondentes meridianos correspondentes: C + IG: C +

S3 MANIPURA meridianos correspondentes: F + VB + Fd + Adcorrespondentecorrespondentemeridianosmeridianos: F

S2 SVADHISTHANA meridianos correspondentes: R + V + ALL + Lycorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians

S1 Meridianos correspondentes MULADHARA: RP + Meridianos correspondentes correspondentes a ecorrespondentes: Meridianos correspondentes a RP + E: RP

Diagnóstico e terapia de NLS

Frequências naturais dos tecidos dentro da seguinte banda de frequência padrão:

- 1.8 sistema esquelético;
- 2.6 tecido conjuntivo grosso, articulações e válvulas cardíacas;
- 2,6 - 3,4 tecido conjuntivo frouxo, músculo estriado e músculo cardíaco;
- 3.4 tecido muscular não estriado.
- 4.2 epitélio tesselado do trato digestivo;
- 4.9 estratifica epitélios escamosos e colunares. Tecido parenquimatosos do fígado e tecido do trato biliar;
- 4,9 - 5,8 epitélio do tecido renal e órgãos reprodutivos;
- 5,8 anel linfático da faringe, seção superior do trato respiratório, sistema linfático, baço, ovários e próstata;
- 6,6 sistema nervoso periférico, epitélio brônquico, supra-renais e tireoide;
- 7.4 seções centrais dos analisadores sensoriais, exceto os ópticos e estruturas subcorticais do cérebro, ponte do cerebelo; cerebelo, sistema límbico e parênquima pulmonar;
- 8.2 retina, nervo óptico, córtex cerebral.

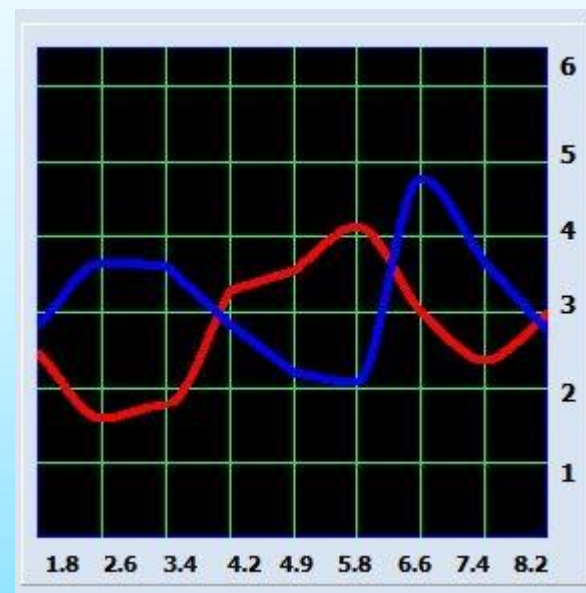


Fig. 57.


Diagnóstico e terapia de NLS

Valor D (Na quarta coluna) (Fig. 66)

Se > 2.0 , significa falta de quaisquer amostras correspondentes, a morbidade é muito pequena.

Se $2.0 \sim 0.425$, pode não ter sintomas agora, mas ainda precisa de atenção. Se você não fizer nenhuma mudança, talvez esse problema aconteça em breve (crônico).

Se < 0.425 , índice de vermelho, a morbidade é maior (cerca de 85% ~ 95%).

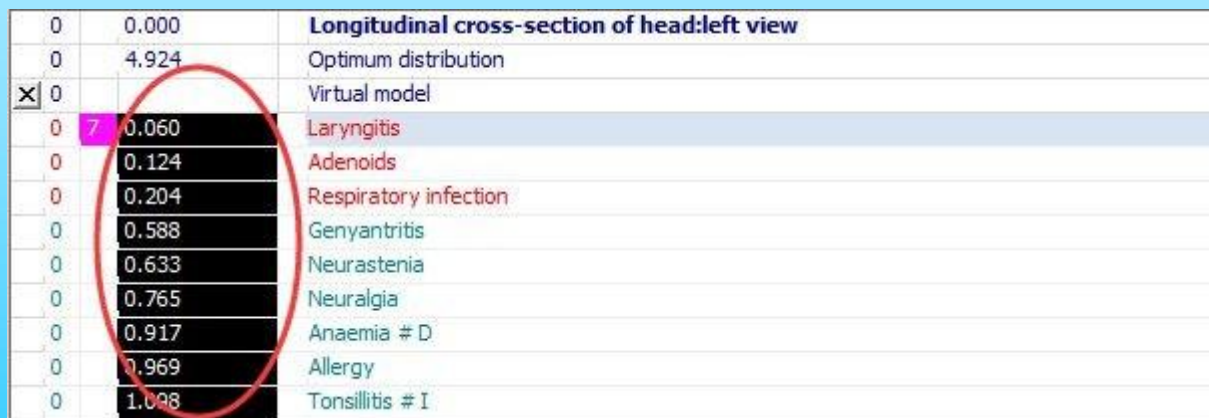

0	0.000	Longitudinal cross-section of head:left view
0	4.924	Optimum distribution
0		Virtual model
0	0.060	Laryngitis
0	0.124	Adenoids
0	0.204	Respiratory infection
0	0.588	Genyantritis
0	0.633	Neurastenia
0	0.765	Neuralgia
0	0.917	Anaemia # D
0	0.969	Allergy
0	1.098	Tonsillitis # I

Fig.66.

Diagnóstico e terapia de NLS

Reimpressora

Reprinter permite registrar as informações sobre um órgão ou área com vários pontos de nidus ruins e todos os etalons do catálogo (medicamentos, microrganismos e patologias etc.) em vários portadores (Água, Álcool, Açúcar, Parafina) (Fig.76).

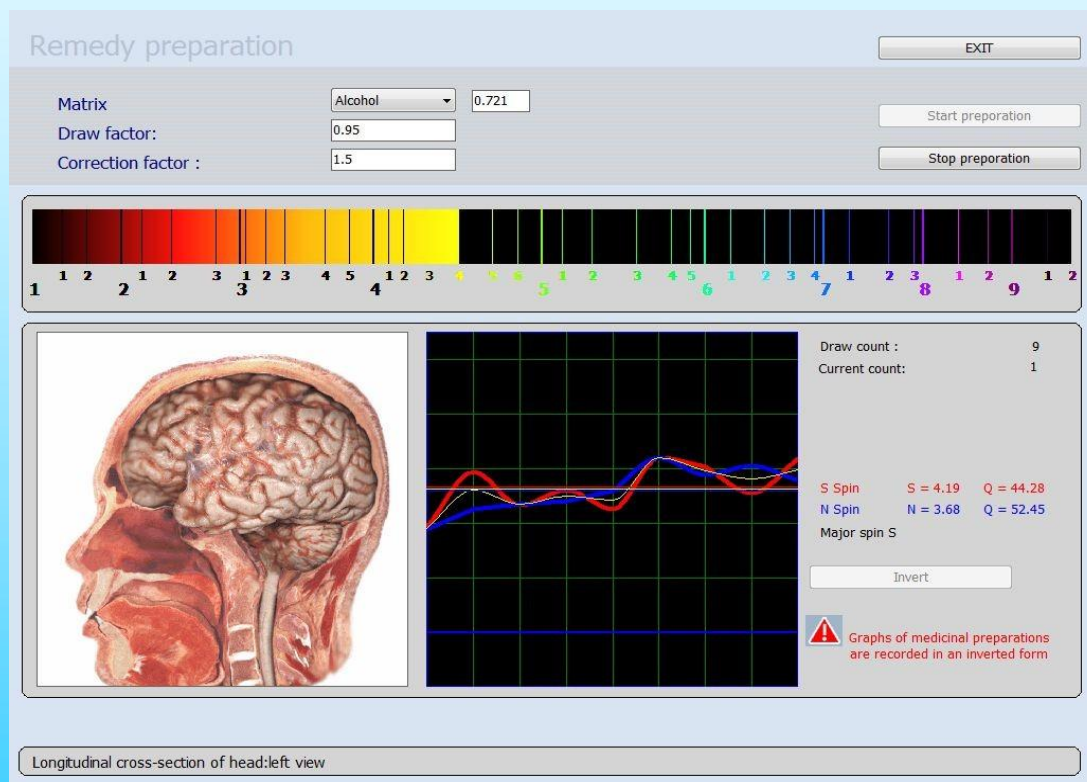


Fig.76.

Diagnóstico e terapia de NLS

A função 'Reimprimir' também funciona de acordo com os princípios da biorressonância. Uma 'Reimpressão' é uma 'cópia' composta por frequências à disposição na base de dados, frequências específicas do órgão tratado. É possível carregar um líquido com esta reimpressão de frequência. O cliente deve absorver essas frequências durante várias semanas. Quando o líquido é carregado, as frequências são invertidas (não inverta as frequências da medicação e, em geral, todas as coisas positivas), portanto, o oposto das medições "incorretas". Assim, é possível aproximar as funções dos órgãos em frequências próximas das frequências estruturais (aproximando as curvas). Microorganismos, doenças, patologias e em geral todas as coisas negativas podem ser colocados invertidos em um meio.

Para fazer isso, um copo deve ser colocado na câmara de ressonância. Em seguida, selecione o tipo de meio de transporte (água, álcool, açúcar, parafina) e clique em Iniciar preparação. Os líquidos adequados para conter informações são água, álcool e parafina, pois podem reter e manter as frequências por um longo período.

Diagnóstico e terapia de NLS

Assim, é possível chegar a uma 'solução líquida' individual exclusiva para essa pessoa. É possível carregar até cinco frequências diferentes na mesma garrafa. O medicamento encontrará o órgão apropriado para sua ressonância, que pode ser perturbado se houver mais de cinco medicamentos em uso. O ideal seria usar um recipiente para cada órgão, carregado com apenas uma frequência. Assim, se quisermos tratar o coração, o fígado e os rins, o paciente pode ter três recipientes diferentes para serem usados individualmente no momento em que o órgão estiver mais ativo de acordo com o relógio energético chinês. Porém, essa forma de tomar os medicamentos nem sempre é prática no momento certo, sendo mais simples e polivalente carregar todas as frequências em um único frasco.

Diagnóstico e terapia de NLS

Escolha um medicamento necessário e eficaz para o paciente em questão (índice $D < 0,425$ = um medicamento na zona vermelha) e clique no botão Reimprimir (É importante lembrar que todos os medicamentos são anotados em um banco de dados de forma invertida, portanto não pressione botão "inverter"). Em seguida, clique em Iniciar preparação (Fig .77). Para a interrupção urgente do processo de fabricação clique no botão Parar preparação. Quando a gravação de dados na transportadora for concluída, o programa irá parar automaticamente. Para finalizar o trabalho com o Reprinter clique no botão Sair.

Fig. 77.



Não pressione inverter ao usar medicamentos ou coisas positivas