

JAPA tecno



START

CUSTOMIZE

EXIT

MANUAL DE UTILIZAÇÃO JAPA techno VET NLS

NLS diagnostic and therapy

Clique '**INICIAR**', mostrará ao utilizador o índice do cartão (Fig. 5)

DOG NAME

QQ

OWNER'S NAME

Uly

AGE

4

GENDER

MALE

ADDRESS

PHONE

EMAIL

CAMERA

NEW CARD

SELECT CARD

DELETE CARD

PRESENT ANALYSIS

EXIT

RESEARCH

VIEW RESULTS

COMPARATIVE ANALYSIS

Enter text to search...

Find

Clear

#	DATE TIME	PICTURES	NAME	ACTIVE	ENERGY	OPTIMUM DISPERSION
#	2022/6/18 13:38:00		BODY			1.38
	2022/6/18 13:38:07		INTESTINE			2.205
	2022/6/18 13:38:14		LIVER; back view			2.037
	2022/6/18 13:38:22		BLOOD CELLS			1.43
	2022/6/18 13:38:29		CRYSTALLINE LENS OF THE EYE			428
	2022/6/18 13:38:34		TRACHEA AND BRONCHIE			3
	2022/6/18 13:38:40		LONGITUDINAL SECTION OF RIGHT KIDNEY			1.82
						

1 of 11



Figura 5.

NLS diagnostic and therapy

Clique em '**NOVO CARTÃO**', preenchendo os espaços em branco e clique '**OK**', passará para a página seguinte (Fig. 8).

The interface displays a main form for patient data, a search table, a 'New Patient' dialog box, and a dog diagram with measurement points.

Main Form Fields:

- DOG NAME: pp
- OWNER'S NAME: Bob
- AGE: 3 GENDER: FEMALE
- ADDRESS:
- PHONE:
- EMAIL:

Buttons:

- NEW CARD (highlighted with a red box)
- SELECT CARD
- DELETE CARD
- PRESENT ANALYSIS
- EXIT
- RESEARCH
- VIEW RESULTS
- COMPARATIVE ANALYSIS

Search Table:

DATE TIME	PICTURES	NAME
2022/6/18 13:38:00		BODY
2022/6/18 13:38:07		INTESTINE
2022/6/18 13:38:14		LIVER; back view
2022/6/18 13:38:22		BLOOD CELLS
2022/6/18 13:38:29		CRYSTALLINE LENS OF THE EYE
2022/6/18 13:38:34		TRACHEA AND BRONCHI
2022/6/18 13:38:40		LONGITUDINAL SECTION OF RIGHT KIDNEY

New Patient Dialog Box:


DOG NAME: pp
OWNER'S NAME: Bob
GENDER: ☐ MALE ☒ FEMALE
AGE: 3
ADDRESS:
PHONE:
E-MAIL:
OK CANCEL

Dog Diagram:

NLS diagnostic and therapy

Este é um local para apontar o historial de saúde aos médicos, e um local que permite ao dono do animal proporcionar uma maior interação ao terapeuta, permitindo-lhe expressar áreas de preocupação que pretendem que o técnico conheça.

Para aceder à lista de reclamações, é necessário levar o cursor até ao ponto seleccionado do corpo e clicar com o botão esquerdo do rato. O ponto colorido muda para verde e no painel direito aparece uma lista de queixas (se desejar anotar o diagnóstico ou ressecção deve clicar no botão Diagnóstico no painel direito). Selecione as reclamações necessárias, assinalando a pequena caixa ao lado da reclamação.

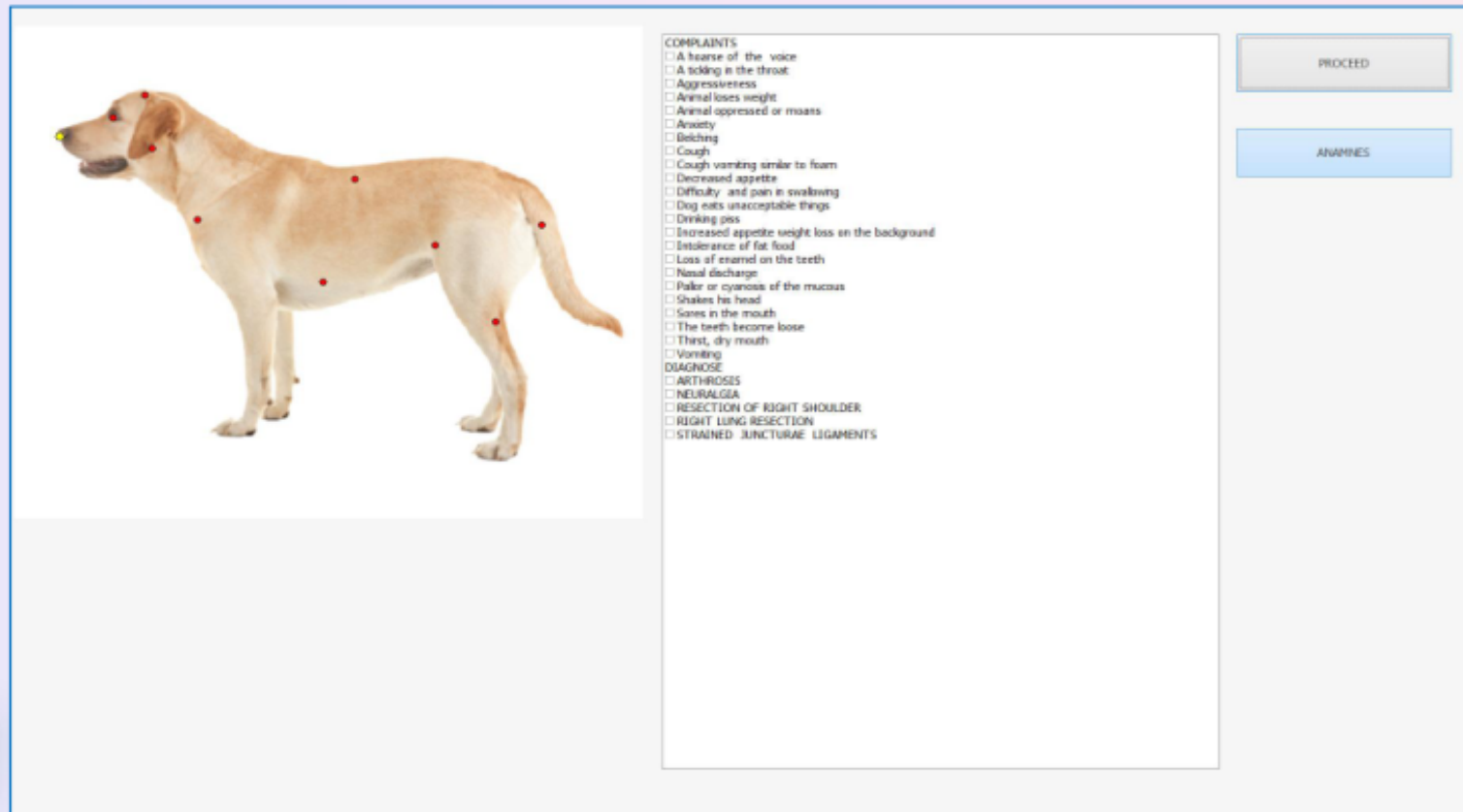

COMPLAINTS

- ☐ A hoarse of the voice
- ☐ A tickling in the throat
- ☐ Aggressiveness
- ☐ Animal loses weight
- ☐ Animal oppressed or moans
- ☐ Anxiety
- ☐ Belching
- ☐ Cough
- ☐ Cough vomiting similar to foam
- ☐ Decreased appetite
- ☐ Difficulty and pain in swallowing
- ☐ Dog eats unacceptable things
- ☐ Drinking piss
- ☐ Increased appetite weight loss on the background
- ☐ Intolerance of fat food
- ☐ Loss of enamel on the teeth
- ☐ Nasal discharge
- ☐ Paler or cyanosis of the mucous
- ☐ Shakes his head
- ☐ Sores in the mouth
- ☐ The teeth become loose
- ☐ Thirst, dry mouth
- ☐ Vomiting

DIAGNOSIS

- ☐ ARTHROSES
- ☐ NEURALGIA
- ☐ RESECTION OF RIGHT SHOULDER
- ☐ RIGHT LUNG RESECTION
- ☐ STRAINED JUNCTURAE LIGAMENTS


PROCEED

ANAMNESIS

Figura 9

NLS diagnostic and therapy

Clique '**Continuar**', irá mostrar esta página (Fig. 14). Este menu permite ao médico preparar o aparelho para a realização da investigação (pesquisa), escolhendo o tipo, a velocidade, os órgãos necessários e outros parâmetros importantes.

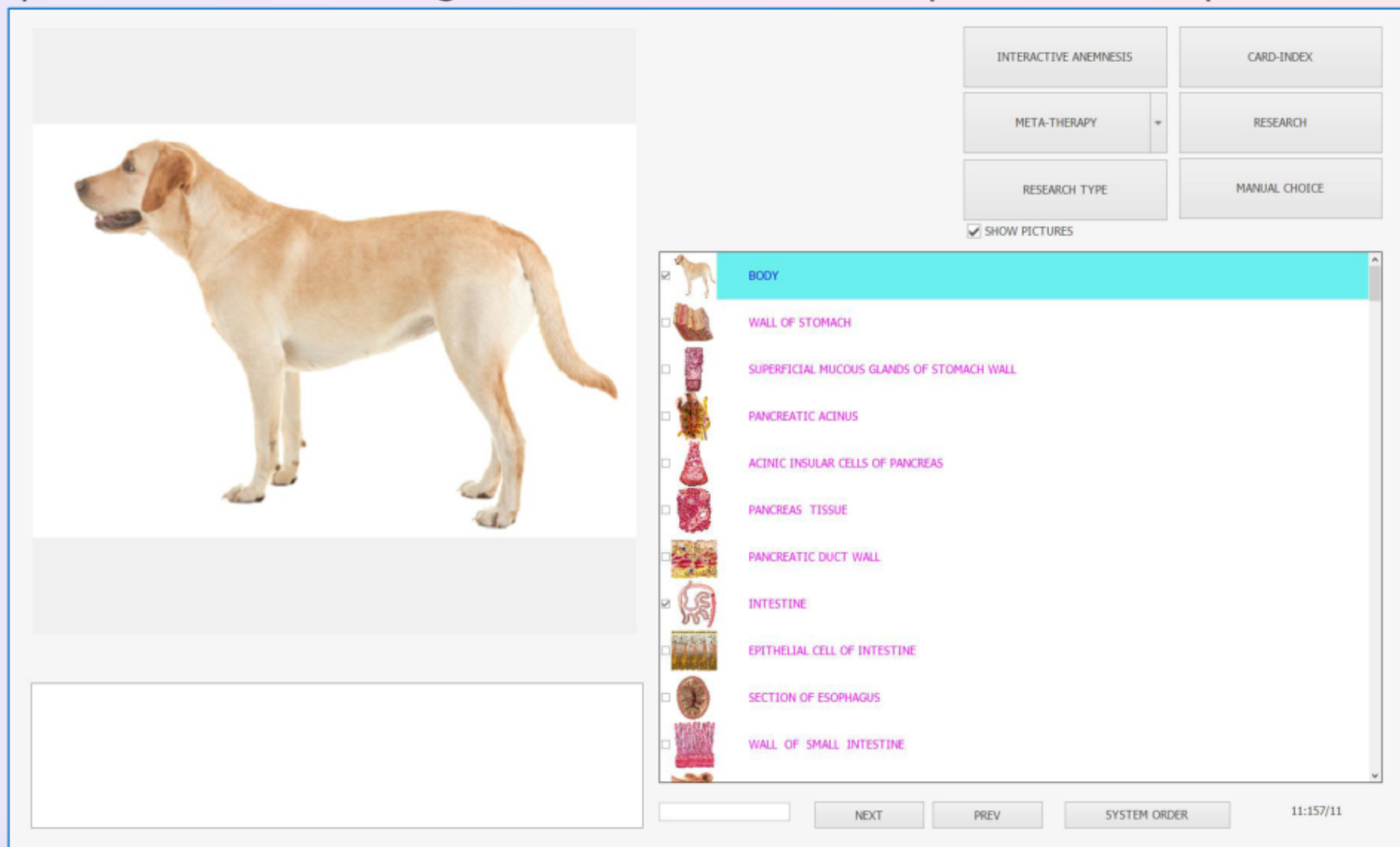

The screenshot displays the NLS diagnostic and therapy software interface. On the left, there is a large image of a dog. Below the image is a text input field. On the right, there is a list of organs and tissues, each with a checkbox and a small icon. The list includes:

- ☒ BODY
- ☐ WALL OF STOMACH
- ☐ SUPERFICIAL MUCOUS GLANDS OF STOMACH WALL
- ☐ PANCREATIC ACINUS
- ☐ ACINIC INSULAR CELLS OF PANCREAS
- ☐ PANCREAS TISSUE
- ☐ PANCREATIC DUCT WALL
- ☒ INTESTINE
- ☐ EPITHELIAL CELL OF INTESTINE
- ☐ SECTION OF ESOPHAGUS
- ☐ WALL OF SMALL INTESTINE

At the top right, there are several buttons: INTERACTIVE ANEMNESIS, CARD-INDEX, META-THERAPY, RESEARCH, RESEARCH TYPE, and MANUAL CHOICE. Below these buttons is a checkbox labeled 'SHOW PICTURES' which is checked. At the bottom, there are buttons for NEXT, PREV, and SYSTEM ORDER, along with a timestamp 11:157/11.

Figura 14

NLS diagnostic and therapy

Clique '**Investigação**', funcionará automaticamente. (Fig. 20)

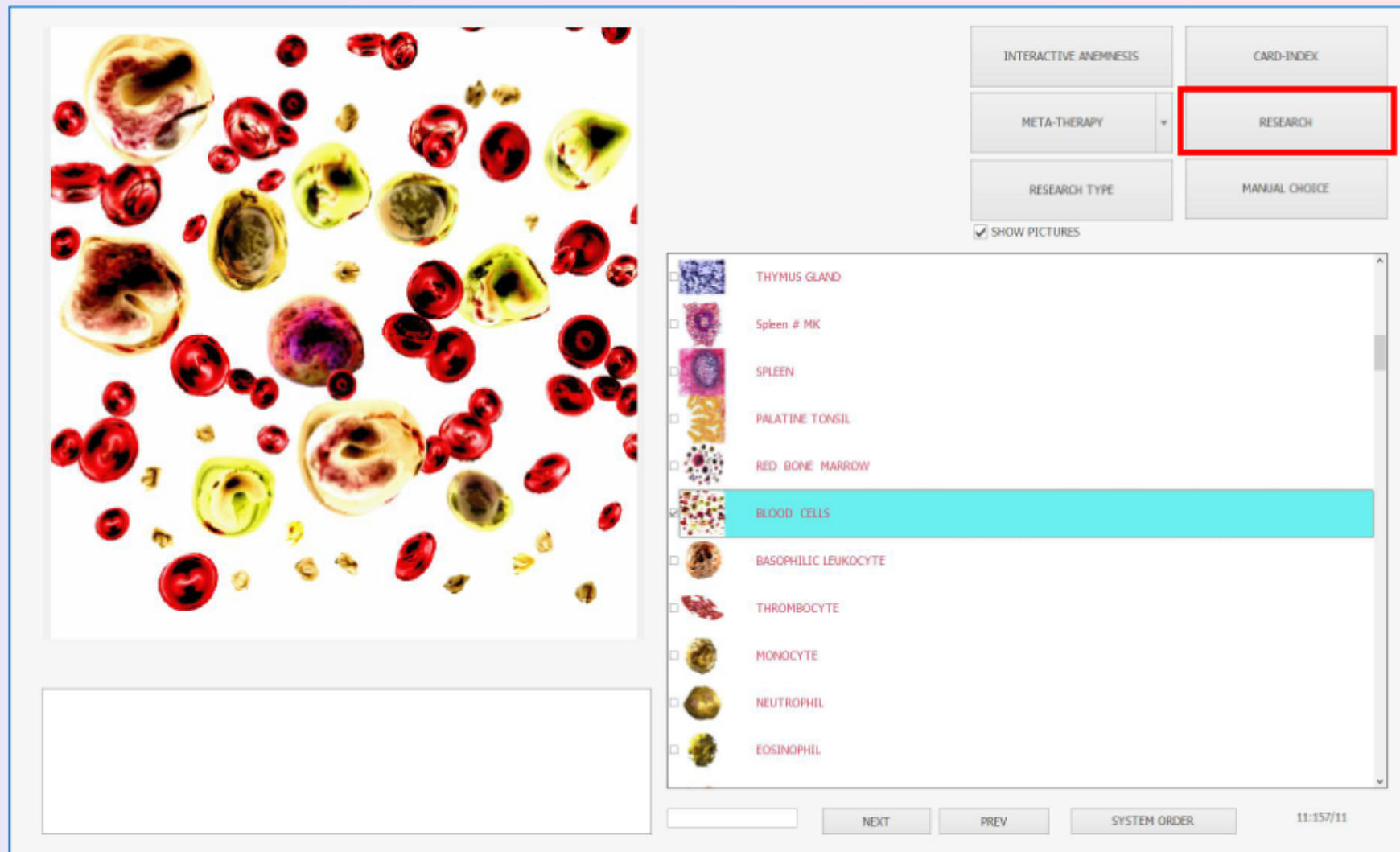


Figura 20

NLS diagnostic and therapy

Procedimento de pesquisa

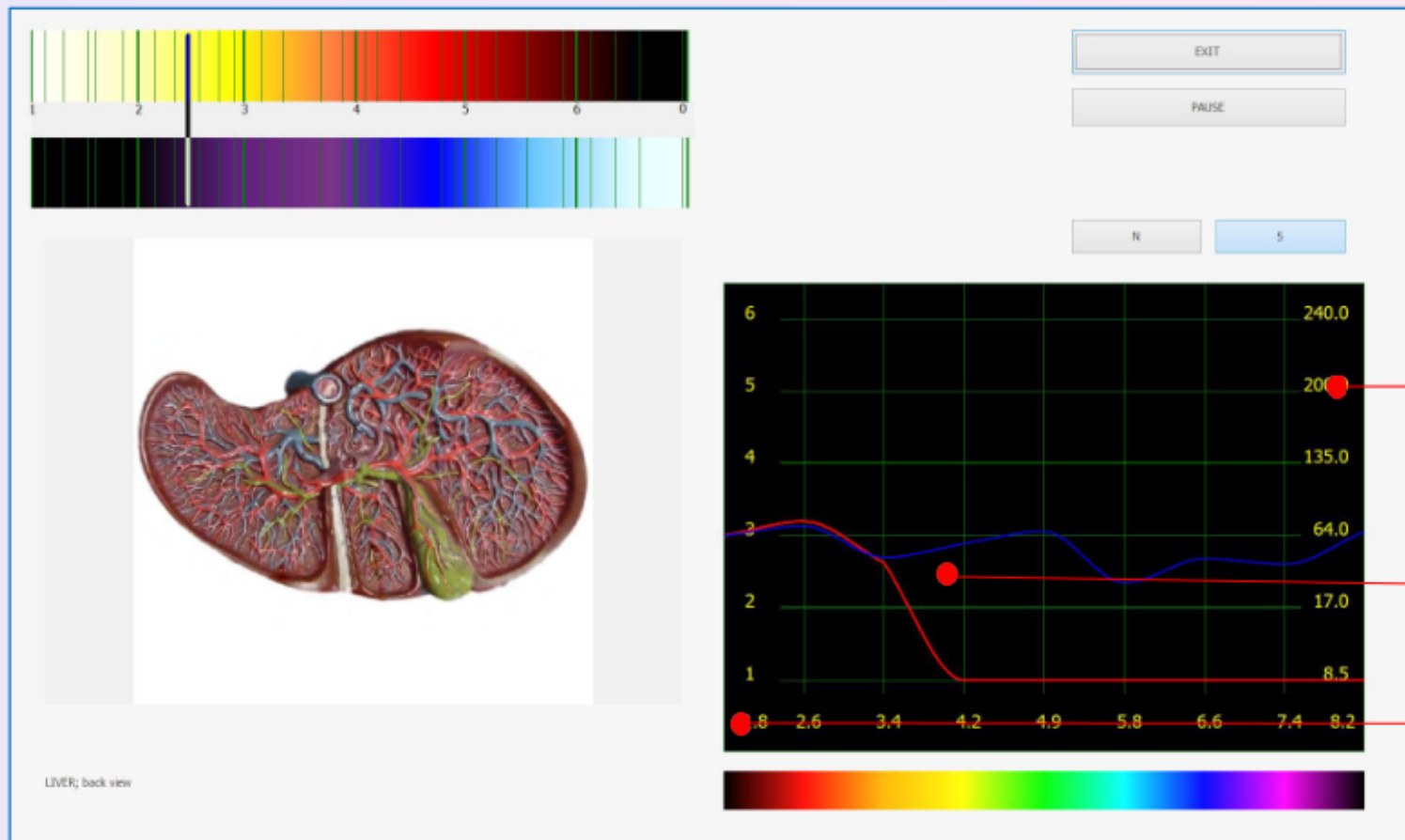



Gráfico de distribuição da amplitude do sinal medido nas frequências padrão 1,8-8,2Hz.

Escala relativa do nível de ruído no sistema em decibéis.

Escala representativa da relação sinal/ruído efetiva.


NLS diagnostic and therapy

TRACHEA AND BRONCHI

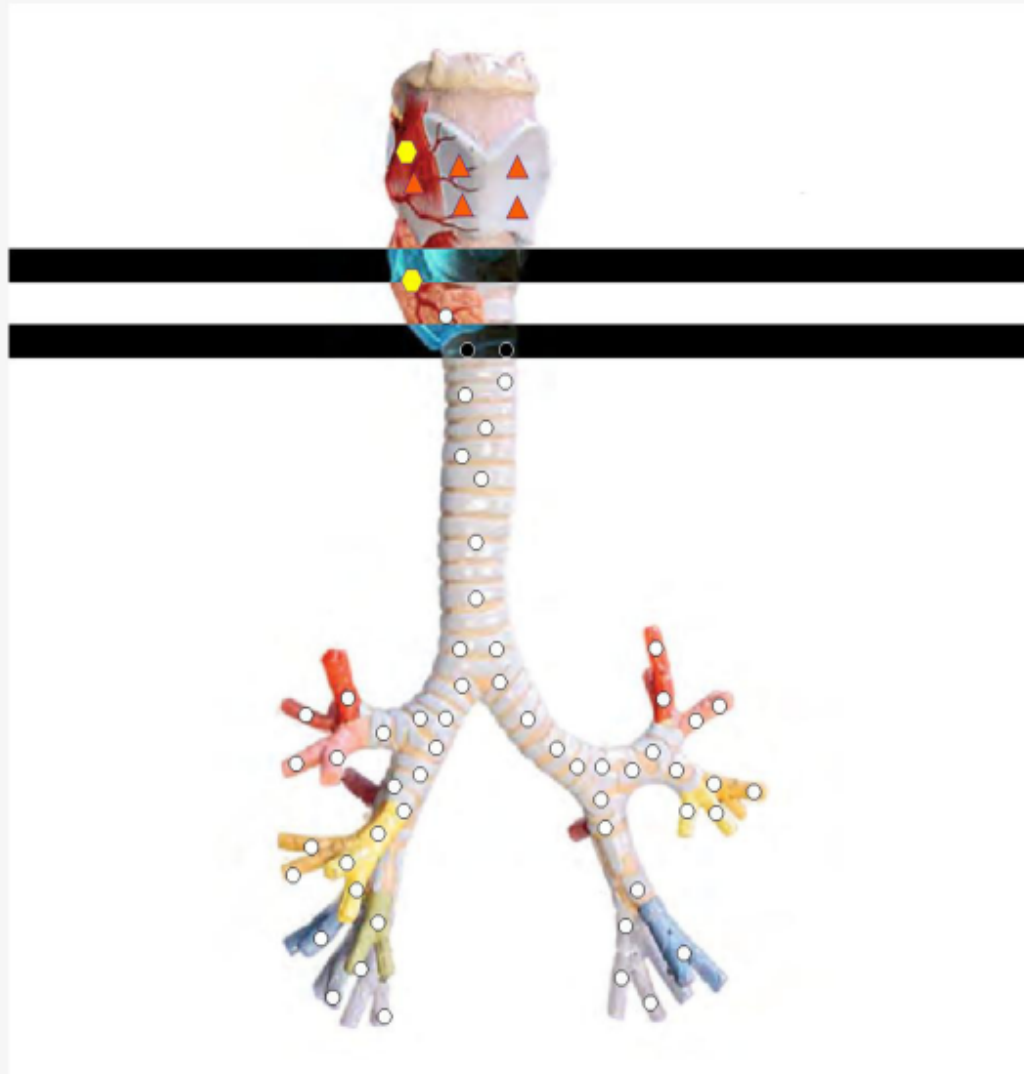

PAUSE

EXIT

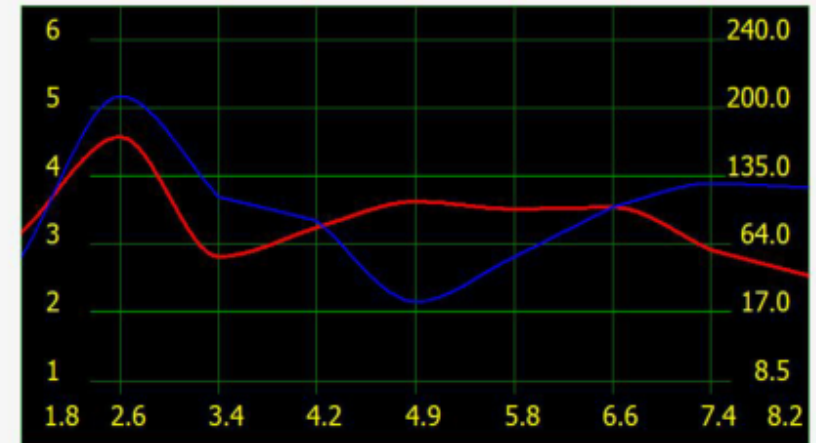

DOMINATED SPIN

N

F = 4.53

N spin

Q = 44.29

S spin

F = 4.19

Q = 87.20

1

2

3


4

5

6

NLS diagnostic and therapy

Escolha um medicamento necessário e eficaz para o animal em questão (índice D <0,425 = medicamento na zona vermelha) e clique no botão **Reimpressora** (É importante lembrar que todos os medicamentos são anotados numa base de dados de forma invertida, por isso não pressione o botão "invertido" botão). Então clique **Comece a preparação** (Fig. 64). Quando a gravação dos dados no suporte terminar, o programa irá parar automaticamente. Para finalizar o trabalho com o Reprinter clique no botão **Saída**.

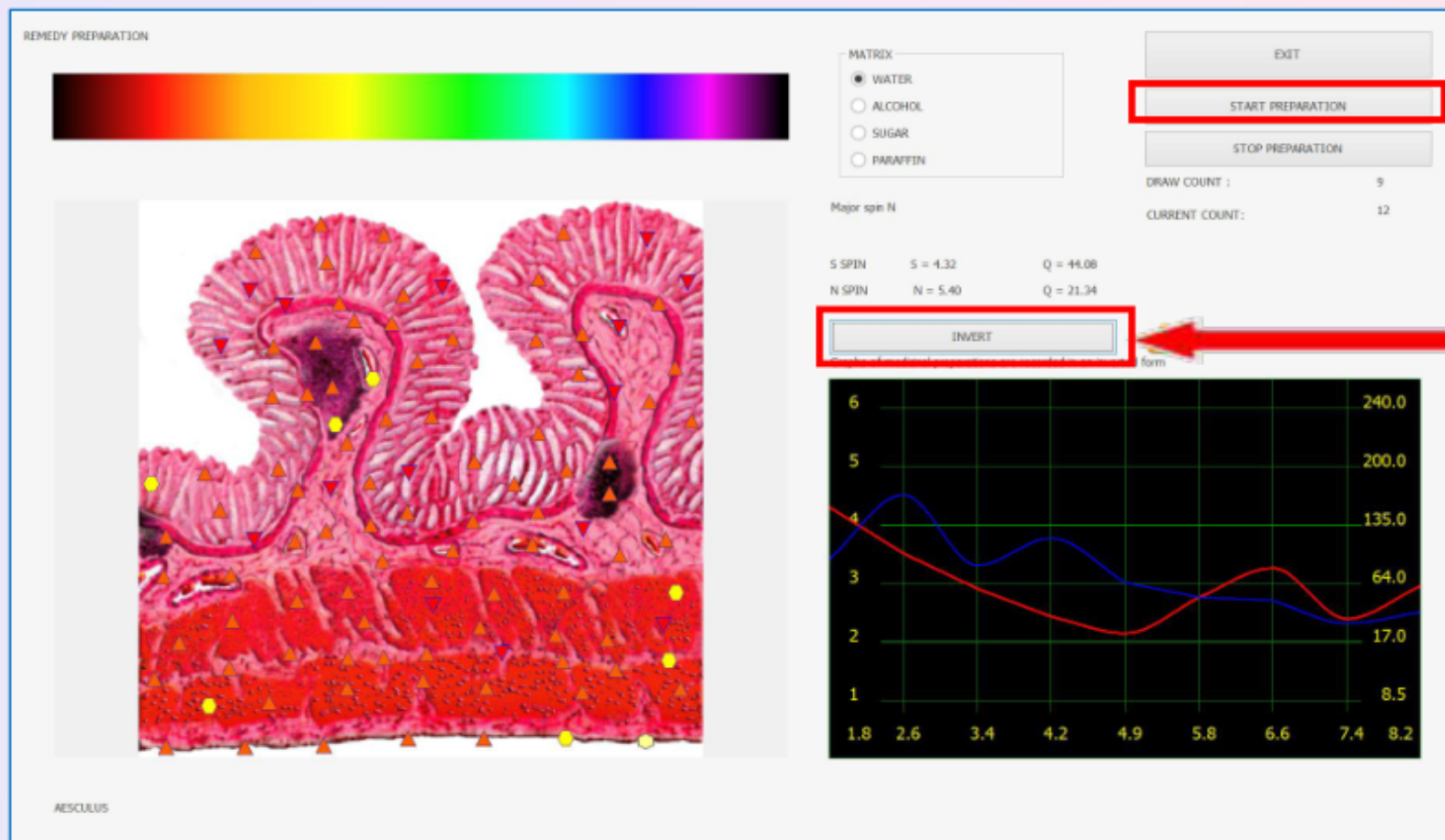

Não pressione
inverter ao usar
medicamentos ou
coisas positivas

Figura 64

NLS diagnostic and therapy

V-TESTE EXTERIOR

Clique '**V-TESTE EXTERIOR**', Necessita de introduzir o nome do padrão testado (Fig. 41). Por exemplo 'Vitamina C 3g'. Então clique '**OK**'.

Por favor clique **Pausa**, depois **Saída** se desejar sair do menu.

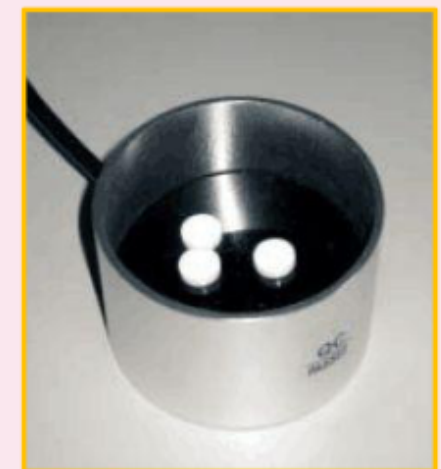
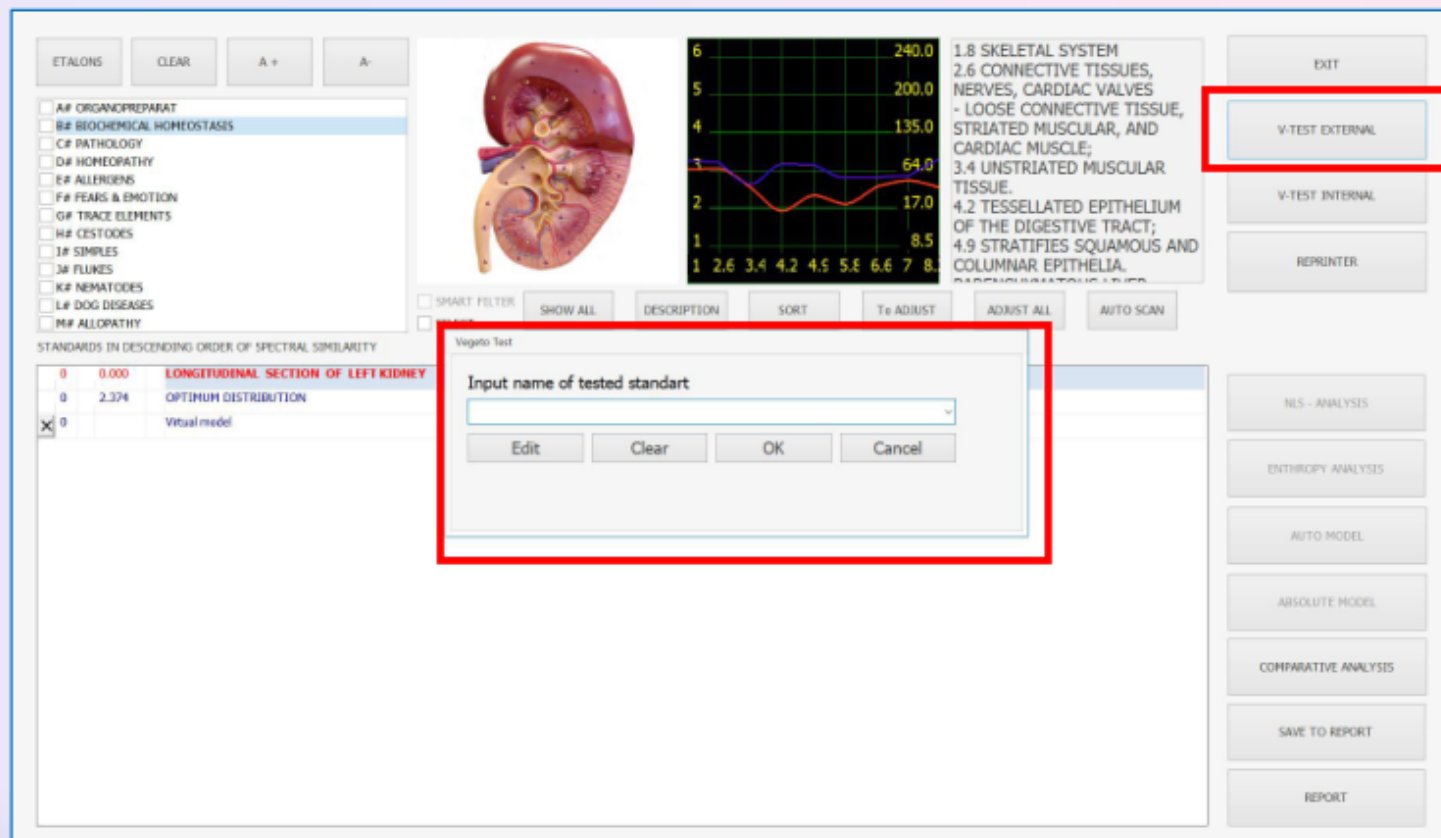


Figura 41