

JAPA tecno



JAPA tecno

MANUAL DE TREINAMENTO

O JAPA tecno não é um dispositivo médico. O sistema não substitui nenhum exame médico.
O sistema não se destina a uso em diagnóstico.

ANTES QUE VOCÊ COMECE

JAPA tecno O biofeedback é uma modalidade de pesquisa que requer treinamento para obter análises precisas, terapia eficaz e uso geral eficiente.

GUIA DE NAVEGAÇÃO MANUAL DE JAPA

A melhor maneira de começar é seguir as instruções do manual na respectiva ordem.

O início do manual o guiará pela instalação do software, personalização da primeira página.

Iniciantes devem seguir as instruções do manual para começar com ESCANEAMENTO, CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS E ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIAS. Depois que essas funções forem praticadas e implementadas, passe para outros recursos do software.

A última parte deste manual o guiará por TODOS os recursos do software e por etapas técnicas úteis.

NÍVEIS DE ENERGIA E VALOR OD



Os níveis de energia 1-3 são indicadores NORMAIS DE SAÚDE/ENERGIA

O nível de energia 4 indica o ESTÁGIO INICIAL de potencial doença/desequilíbrio

O nível de energia 5 indica um possível problema AGUDO/baixa energia

O nível de energia 6 indica um desequilíbrio CRÔNICO/baixa energia

Os níveis de energia são frequentemente mal compreendidos, por isso é importante que você entenda como os níveis de energia podem ser afetados e o que procurar mais de perto.

* DATE TIME	PICTURES	NAME	ACTIVE	ENERGY	OPTIMUM DISPERSION
2022/10/20 16:56:36		CEREBRUM, top view			1.481
2022/10/20 16:54:20		CHAKRAS			1.988
2022/10/20 16:58:21		CHROMOSOMES (FEMALE)			0.538
2022/10/20 16:54:56		CORONAL CROSS-SECTION OF LARYNX AND TRACHEA			1.605
2022/10/20 16:53:42		CORONAL THORACOTOMY AT THE LEVEL OF ASCENDING PART OF AORTA, FRONT VIEW			2.506
2022/10/21 12:10:28		CORONAL THORACOTOMY AT THE LEVEL OF ASCENDING PART OF AORTA, FRONT VIEW			2.519
2022/10/20 16:53:58		CROSS SECTION OF ABDOMEN AT THE LEVEL OF 1ST LUMBAR VERTEBRA			2.773
2022/10/20 16:58:09		EYE, CRYSTALLINE LENSE			0.791
2022/10/20 16:53:18		HEAD LONGITUDINAL CROSS-SECTION, LEFT			2.431
2022/10/20 16:58:16		HISTAMINE			0.34

7 of 48

Os níveis de energia podem ser afetados por muitas coisas: comida, estresse, cafeína, falta de nutrientes, ar fresco, etc. OD representa o estado dos órgãos no nível celular que é mais estável, consistente e fala sobre a saúde interna do órgão, em vez de apenas o estado externo ou níveis de energia altamente flutuantes.

JAPA tecno tem três opções de varredura, cada uma com diferentes quantidades de órgãos/tecidos disponíveis para varreduras

EXPRESS: 103 itens disponíveis para digitalizar

NORMAL: 197 itens disponíveis para escanear

DETALHADO: 230 itens disponíveis para digitalizar

SCI: 960 + itens disponíveis para digitalizar

O número que reflete cada opção de **TIPO DE PESQUISA** selecionada será refletido aqui:

INTERACTIVE ANEMNESIS

CARD-INDEX

AUTO META-THERAPY

RESEARCH

RESEARCH TYPE

MANUAL CHOICE

☒ PICTURES ☐ ICONS ☒ 4D-TORSION SCAN

EXPRESS

NORMAL

DETAILED

SCIENTIFIC

CROSS-SECTION, RIGHT

CROSS-SECTION, LEFT

SECTION OF HEAD AT THE LEVEL OF AQUEDUCT OF CEREBRUM

☐ HORIZONTAL CROSS-SECTION OF HEAD AT THE LEVEL OF THE FOURTH VENTRICLE

☐ HEAD FRONTAL CROSS-SECTION

☐ CROSS - SECTION OF NECK

☒ CORONAL THORACOTOMY AT THE LEVEL OF ASCENDING PART OF AORTA, FRONT VIEW

☐ CORONAL SECTION AT A LEVEL HOLLOW VEIN, FRONT VIEW

☐ HORIZONTAL CROSS-SECTION OF TRUNK AT THE LEVEL OF SHOULDER JOINTS

☐ HORIZONTAL CROSS-SECTION OF CHEST AT THE LEVEL OF 4TH CERVICAL VERTEBRA

☐ LONGITUDINAL SECTION OF THORAX AT FOURTH DORSAL VERTEBRA

NEXT

PREVIOUS

SYSTEM ORDER

46:965/46

METATERAPIA DE PROTEÇÃO

As terapias sempre devem ser administradas após a conclusão do exame. Se você deseja tratar o sistema DIGESTIVO, por exemplo, deve primeiro realizar uma VARREDURA DO SISTEMA DIGESTIVO.


As terapias são melhor fornecidas na página **PESQUISA** após uma varredura.

TERAPIAS DE SISTEMA

As terapias sistêmicas são as mais eficazes para reverter os desafios/desequilíbrios da saúde. Estes podem ser feitos diariamente e para melhores resultados, não menos que 3 vezes por semana.

Para fazer uma varredura do sistema, primeiro escaneie o sistema e, em seguida, administre a cada órgão do sistema 5 terapias.

A quantidade de terapias oferecidas por órgão é 1 ou 5. A seta  ao lado da palavra META-CORREÇÃO é onde você escolhe dar 1 terapia ou 5 para cada item selecionado.

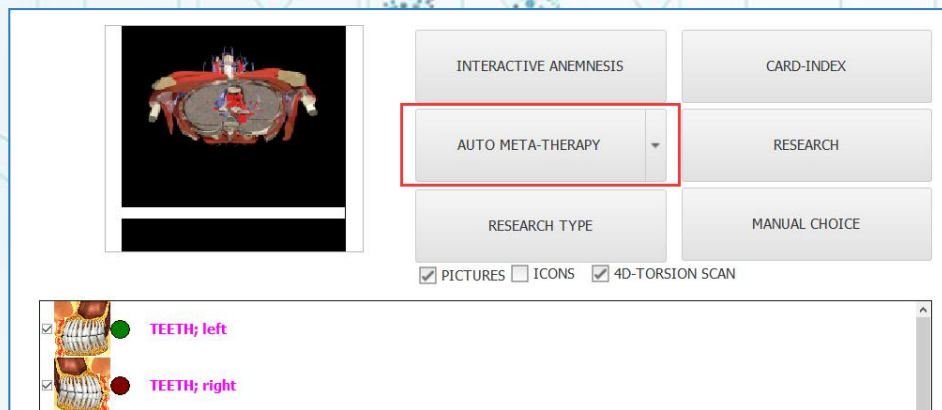

Para adultos, administre 5 terapias para cada item/órgão selecionado escaneado.


Para bebês, 1 terapia para cada item selecionado é um bom ponto de partida.

TERAPIAS PARA DOR/DESCONFORTO/SINTOMAS

A JAPA tecno é ótima para lidar com a dor e outros sintomas. Os sintomas são todas as coisas que não incluem uma causa raiz. Depressão, dor nas costas, dor nas articulações, problemas de pele, dores de cabeça, incapacidade de dormir, necessidade constante de urinar, etc.

Para depressão, os itens apropriados para escanear são itens cerebrais.

Na página de pesquisa, na caixa de pesquisa na parte inferior, digite “BRAIN” e você verá os itens cerebrais disponíveis. Clique em PRÓXIMO para ver todos os disponíveis. Marque-os para uma verificação.

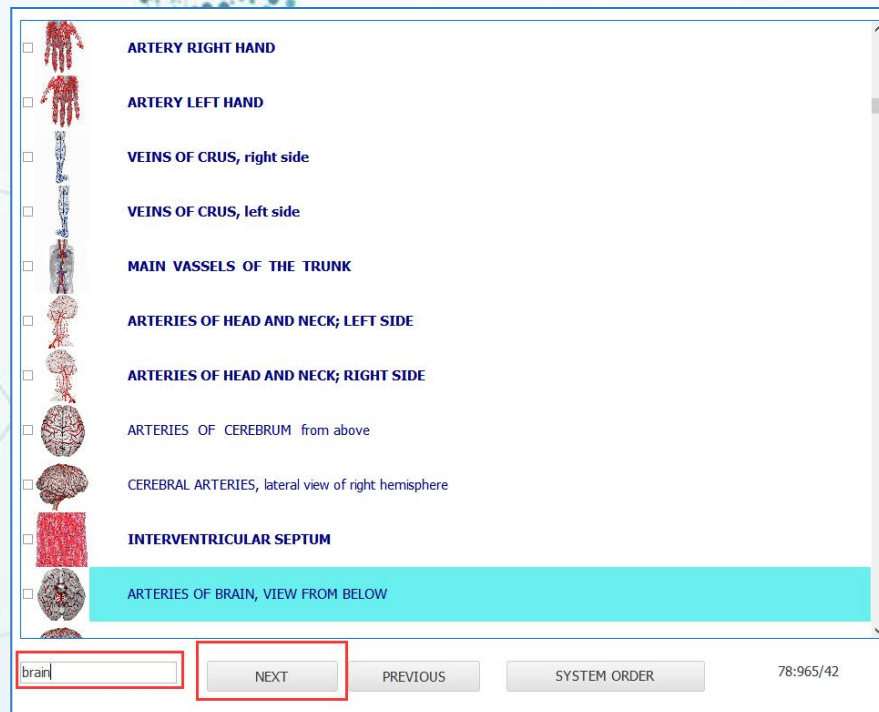

RELATÓRIO DE PÁGINA AVANÇADA



PREPARAT GROUP NAME : E # MICROORGANISMS AND HELMINTHS					
☒			HELICOBACTER PYLORI	STOMACH BACK	0.1279
☒			LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	PANCREODUODENAL ZONE	0.2234

O relatório informará em qual órgão o microrganismo foi encontrado para você ir até esse órgão e escanear os micróbios para terapia.

RELATÓRIO 2

O Relatório 2 tem as mesmas informações, mas em muitas páginas, portanto, talvez não seja tão fácil de encontrar.

HELICOBACTER PYLORI	STOMACH BACK
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	PANCREODUODENAL ZONE

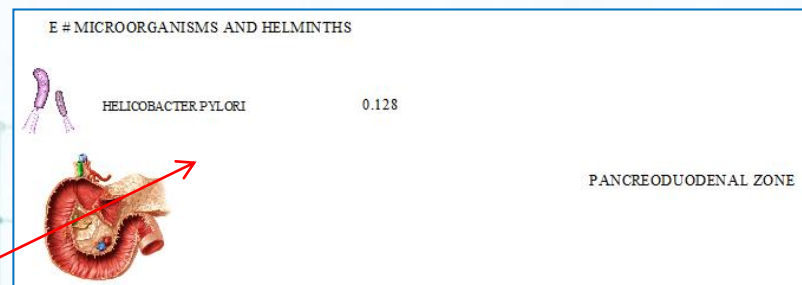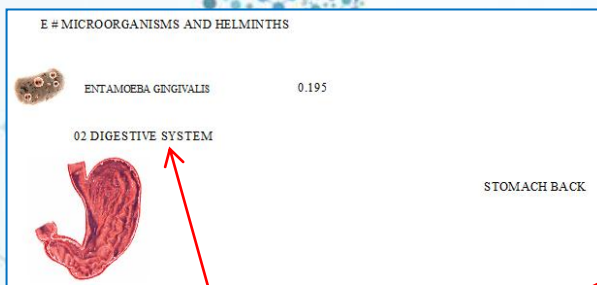

Algumas coisas a saber sobre a TERAPIA DESTRUTIVA:

É importante observar o coeficiente do microrganismo porque com o tempo, à medida que a terapia é administrada e o microrganismo é destruído, os coeficientes aumentam ou desaparecem completamente da lista. Isso indica melhora.

NÃO destrua demais. Terapias 1x5 para microorganismos 3 vezes por semana é suficiente. As pessoas que destroem demais os microorganismos experimentam reações de desintoxicação, como infecção do trato urinário e dores de cabeça.

Lembre-se de que o órgão deve ser escaneado neste dia para ser utilizado.

3. Escaneie o microorganismo no órgão

Na **PÁGINA DE ÍNDICE DO CARD**, quando o órgão correto for encontrado (neste caso, **STOMACH BACK**), clique no órgão para realçá-lo e, em seguida, clique na foto do órgão. Clicar em qualquer lugar na imagem do órgão o moverá para frente.

LAST NAME: Training

FIRST NAME: Manual

BLOOD TYPE: -?-

AGE: 46

E-MAIL:

SEX: MALE

PHONE:

ADDRESS:

WEBCAM

Enter text to search... Find Clear

#	DATE TIME	PICTURES	NAME	ACTIVE	ENERGY	OPTIMUM DISPERSION
	2022/10/24 16:04:28		STOMACH BACK	S		1.44
	2022/10/25 10:10:24		STOMACH BACK	S		1.431
▶	2022/10/27 14:27:08		STOMACH BACK	S		1.431
	2022/10/24 16:05:17		STOMACH VEINS	S		1.361
	2022/10/24 16:07:32		SYNAPSE	S		0.739
	2022/10/24 16:04:11		TEETH; left	S		1.024
	2022/10/25 14:52:05		TEETH; left	S		0.995
	2022/10/27 14:26:47		TEETH; left	S		0.982
	2022/10/25 14:54:10		TEETH; left (META-THERAPY)	M		0.995
	2022/10/25 14:53:02		TEETH; left META-THERAPY1	M		0.995

81 of 115

EXIT

RESEARCH

NEW CARD


SELECT CARD

REMOVE CARD


PRESENT ANALYSIS

VIEW RESULTS

COMPARATIVE ANALYSIS

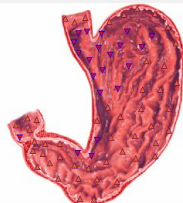


Na próxima página, clique na imagem do gráfico para avançar

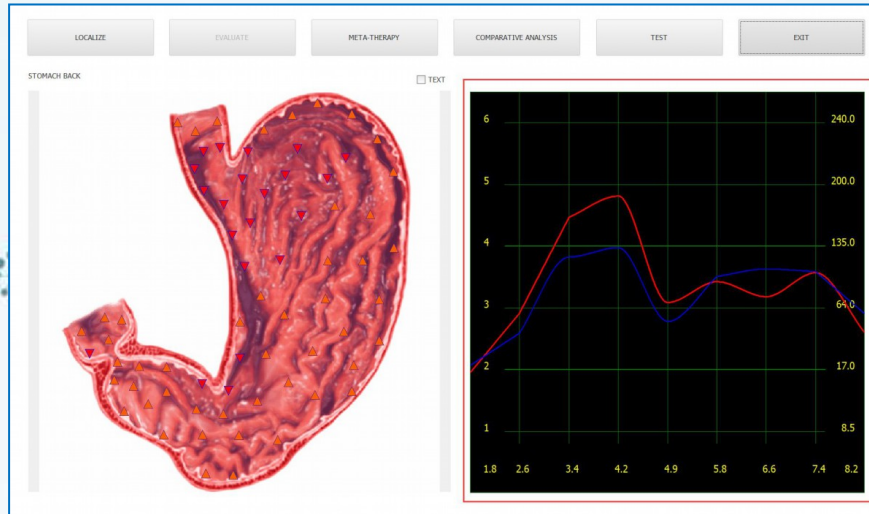

Na próxima página, a **PÁGINA DE ANÁLISE**, marque a opção **MICROORGANISMOS ETALON**

Você verá H. Pylori lá **ASSIM COMO LACTOBACILLUS**, que também está em nossas notas, mas em outro órgão. Isso é ótimo porque podemos digitalizar ambos de uma página e não precisamos voltar ao outro órgão para encontrar o **LACTOBACCILUS**

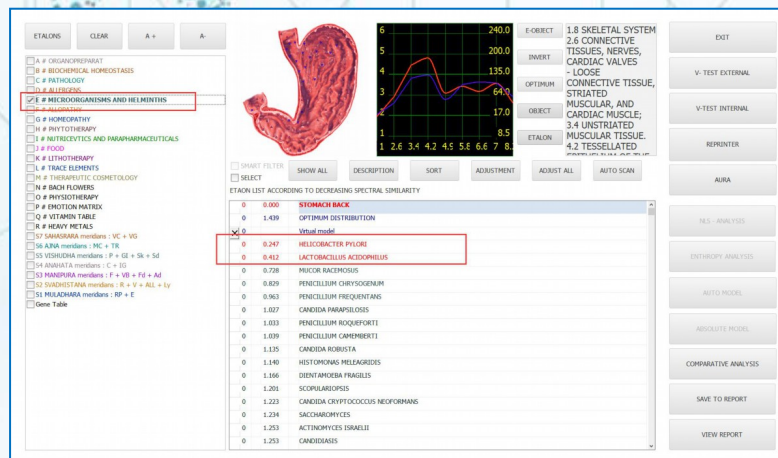

Antes que a terapia possa ser administrada, os microorganismos devem ser escaneados.

Para digitalizar ambos, clique e arraste o mouse do computador para realçar os dois micróbios. Se você tiver problemas para realçar os dois, siga as etapas para um de cada vez.

The screenshot shows a software interface with the following components:


- Buttons:** ETALONS, CLEAR, A +, A -
- Category List (Left):**
 - ☐ A # ORGANOPREPARAT
 - ☐ B # BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS
 - ☐ C # PATHOLOGY
 - ☐ D # ALLERGENS
 - ☒ E # MICROORGANISMS AND HELMINTHS
 - ☐ F # ALLOPATHY
 - ☐ G # HOMEOPATHY
 - ☐ H # PHYTOTHERAPY
 - ☐ I # NUTRICEVITICS AND PARAPHARMACEUTICALS
 - ☐ J # FOOD
 - ☐ K # LITHOTHERAPY
 - ☐ L # TRACE ELEMENTS
 - ☐ M # THERAPEUTIC COSMETOLOGY
 - ☐ N # BACH FLOWERS
 - ☐ O # PHYSIOTHERAPY
 - ☐ P # EMOTION MATRIX
 - ☐ Q # VITAMIN TABLE
 - ☐ R # HEAVY METALS
 - ☐ S7 SAHASRARA meridians : VC + VG
 - ☐ S6 AJNA meridians : MC + TR
 - ☐ S5 VISHUDHA meridians : P + GI + Sk + Sd
 - ☐ S4 ANAHATA meridians : C + IG
 - ☐ S3 MANIPURA meridians : E + VR + Ed + Ad
- Central Image:** Two purple, rod-shaped bacteria with flagella. A red box highlights this image, and a red arrow points from it to the 'HELICOBACTER PYLORI' entry in the table below.
- Line Graph (Right):** A graph with a black background and green grid lines. The x-axis is labeled with values 1, 2.6, 3.4, 4.2, 4.9, 5.8, 6.6, 7, 8.5. The y-axis has two scales: the left scale ranges from 1 to 6, and the right scale ranges from 8.5 to 240.0. Three lines (red, blue, and yellow) are plotted on the graph.
- Table (Bottom):** A table titled 'ETAON LIST ACCORDING TO DECREASING SPECTRAL SIMILARITY'. It has three columns: a checkbox, a numerical value, and a text description. The entries are:

☐	0 0.000	STOMACH BACK
☐	0 1.439	OPTIMUM DISTRIBUTION
☒	0	Virtual model
☐	0 0.247	HELICOBACTER PYLORI
☐	0 0.412	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
☐	0 0.728	MUCOR RACEMOSUS


Depois de destacar os micróbios, clique na foto do micróbio.

Isso levará os micróbios para a **PÁGINA DE PESQUISA**, onde poderão ser escaneados e tratados.

Aqui você pode ver os micróbios adicionados à sua lista para verificação

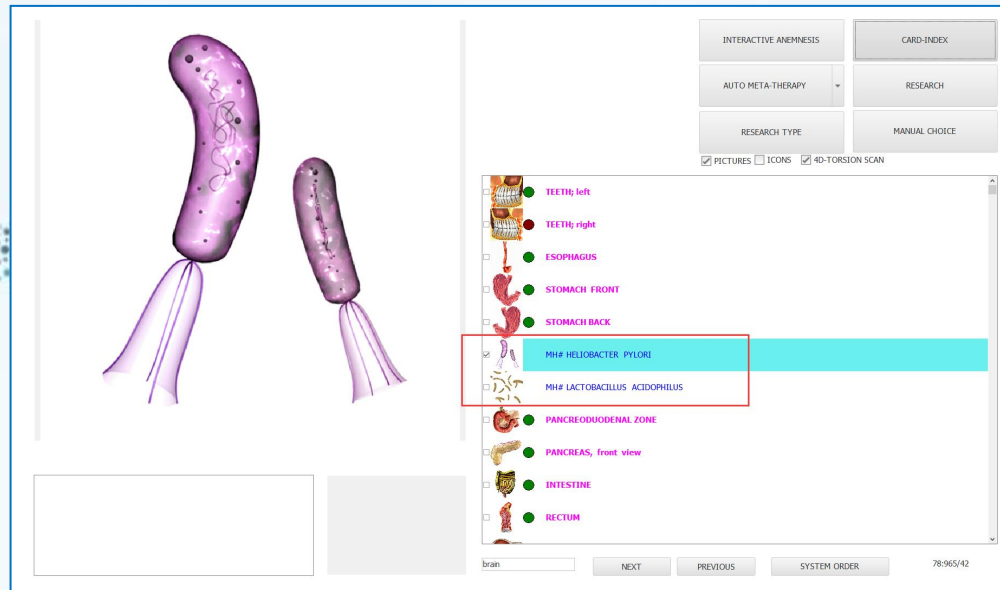

Clique em **PESQUISAR**

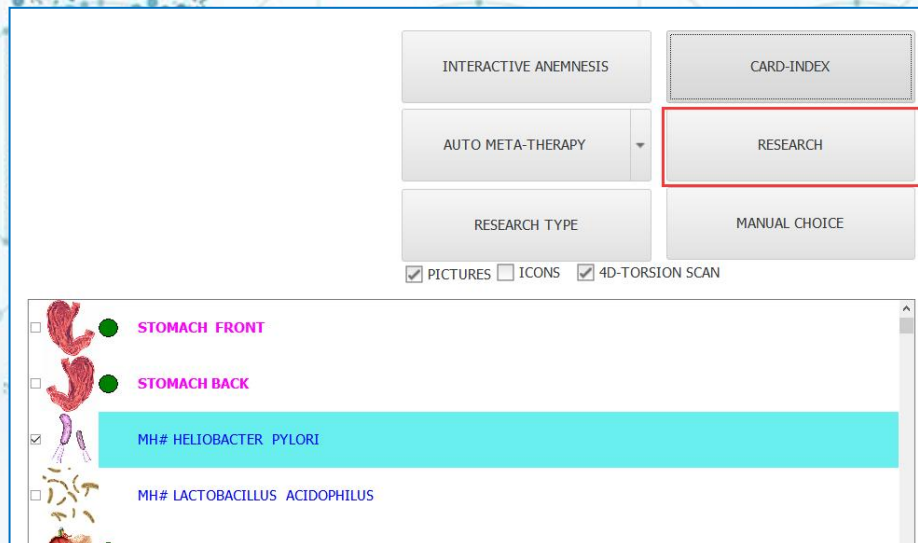


Quando a varredura estiver concluída, você verá os dois micróbios marcados com um ponto colorido



Agora que você escaneou os micróbios, pode administrá-los terapia.


O software JAPA tecno saberá administrar terapia **DESTRUTIVA** de microorganismos e terapia **PROTETORA** de órgãos. Isso significa que você pode executar uma **PESQUISA DE SISTEMA**, escanear os micróbios necessários e administrar terapia a órgãos e microorganismos ao mesmo tempo.

Se você esquecer de digitalizar e clicar em Meta-Correção, o software PESQUISArá primeiro e administrará a terapia logo em seguida.

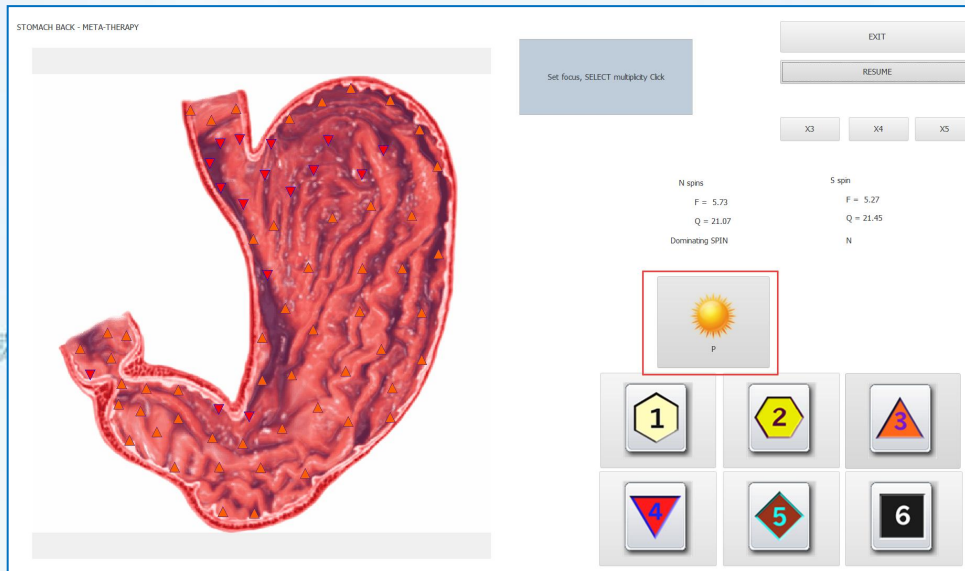

P – Protetor

Você pode ver que durante a terapia **DESTRUTIVA** há um “D” e na terapia **PROTETORA** há um “P”

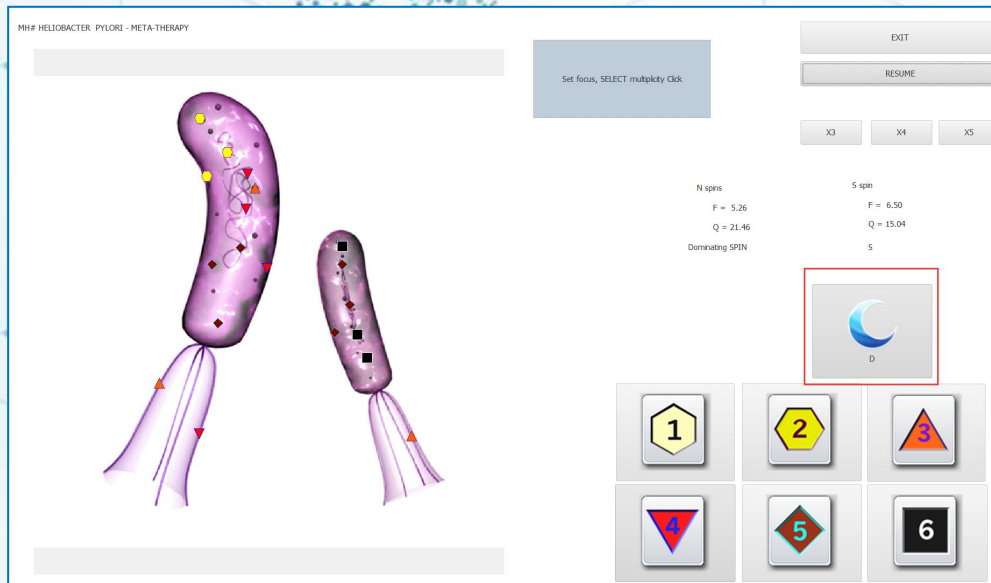

D – Destrutivo

TERAPIA DESTRUTIVA

A exclusão de dias individuais é útil quando você está executando terapias diariamente. Ao escanear e administrar a terapia, você verá a lista crescer rapidamente e isso tornará mais difícil comparar os resultados e encontrar os escaneamentos de que você precisa. Se você executar verificações diárias, recomendamos que mantenha as verificações de um ou dois dias por semana, em vez de todos os dias. Isso fornecerá dados suficientes para acompanhar o progresso e manter a lista limpa e organizada.

Para excluir verificações por data, primeiro isole a data que deseja excluir:

LAST NAMETrainingFIRST NAMEManualBLOOD TYPE-?-AGE46E-MAILSEXMALEPHONEADDRESS

WEBCAM

EXIT

RESEARCH

NEW CARD

SELECT CARD

REMOVE CARD

PRESENT ANALYSIS


VIEW RESULTS

COMPARATIVE ANALYSIS


Enter text to search...FindClear

DATE TIME	PICTURES	NAME	ACTIVE	ENERGY	OPTIMUM DISPERSION
2022/10/24 16:03:02		HEAD LONGITUDINAL CROSS-SECTION, LEFT	S		2,645
2022/10/24 16:03:13		HORIZONTAL CROSS-SECTION OF HEAD AT THE LEVEL OF AQUEDUCT OF CEREBRUM	S		2,097
2022/10/24 16:03:22		CORONAL THORACOTOMY AT THE LEVEL OF ASCENDING PART OF AORTA, FRONT VIEW	S		2,443
2022/10/24 16:03:29		HORIZONTAL THORACOTOMY AT THE LEVEL OF THE 6TH THORACAL VERTEBRA	S		2,175
2022/10/24 16:03:35		CROSS SECTION OF ABDOMEN AT THE LEVEL OF 1ST LUMBAR VERTEBRA	S		2,309
2022/10/24 16:03:40		HORIZONTAL CROSS-SECTION OF TRUNK AT THE LEVEL OF UMBILICUS	S		2,113
2022/10/24 16:03:45		SAGITTAL THORACOTOMY	S		3
2022/10/24 16:03:51		ORGANS OF MALE SMALL PELVIS, right side	S		1,686
2022/10/24 16:03:56		ORGANS OF MALE SMALL PELVIS, left side	S		1,842
2022/10/24 16:04:01		CHAKRAS	S		1,905


1 of 196

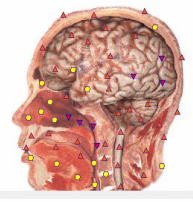


PÁGINA DE ANÁLISE COMPARATIVA

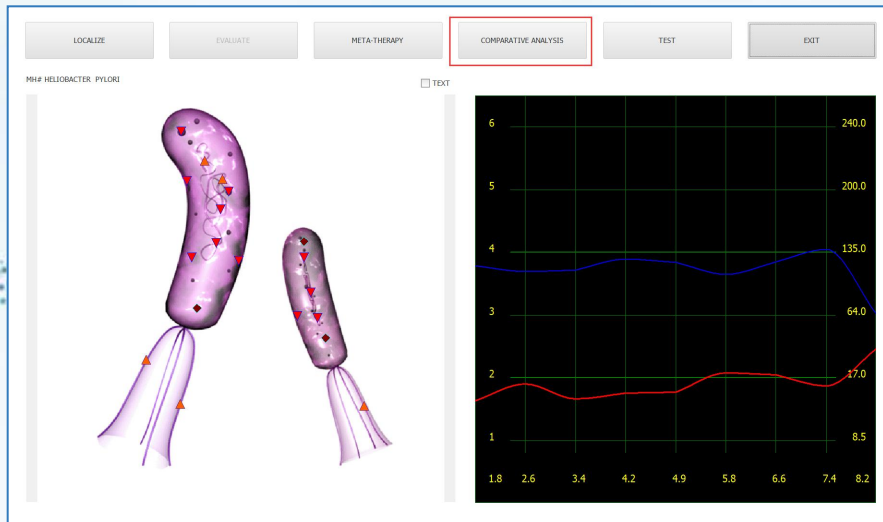


Análise Comparativa é a página onde podem ser comparados scans, resultados de comparações e outros tipos de scans. **Página de Análise Comparativa.**

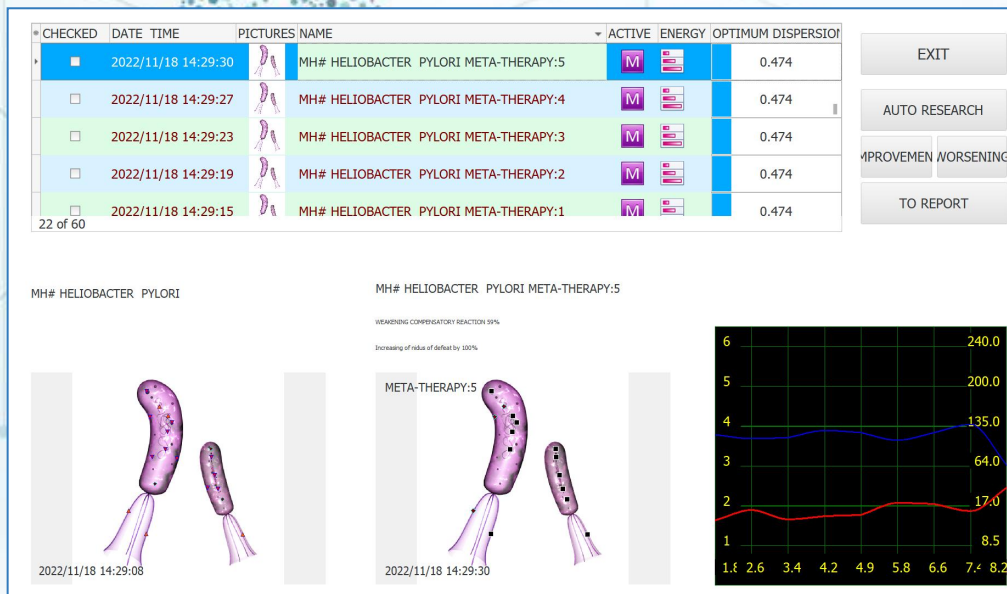

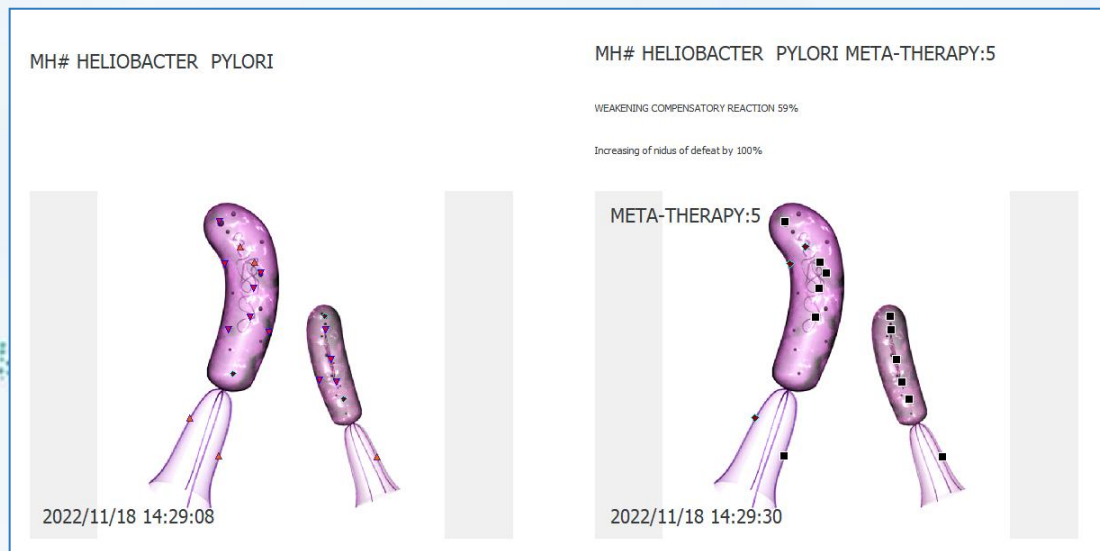

O que é ótimo na página de Análise Comparativa é que você pode comparar os resultados de todos os tipos de testes.

Por exemplo, acima você pode ver a reação de uma terapia única em H. Pylori.

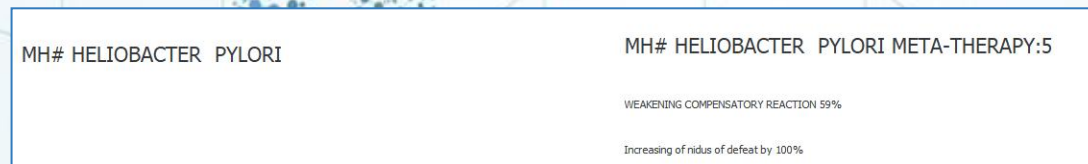

Ao comparar as varreduras para ver os resultados das terapias **DESTRUTIVOS** (que são terapias feitas nos microorganismos), você deve sempre ver uma reação de enfraquecimento. **REAÇÃO DE ENFRAQUECIMENTO** significa que o microorganismo está sendo destruído com sucesso.

Para obter o resultado correto, você deve certificar-se de que está comparando as informações corretas

Você deve sempre marcar o ORIGINAL SCAN marcado com um



E DESTAQUE



(clicando em) a última terapia (ou a que você gostaria de

comparar)

■

2022/11/18 14:29:30


MH# HELIOBACTER PYLORI META-THERAPY:5


M

0.474

Você pode ver isso feito corretamente aqui: “S” tem uma marca de seleção e “M” sem marca de seleção

Você pode comparar exames diários, resultados de terapias e resultados de outros testes realizados.

Você deve sempre marcar a varredura ORIGINAL (a varredura mais antiga disponível) e destacar a varredura mais recente disponível para ver como um órgão melhorou ao longo do tempo. No exemplo abaixo, o ANEXO de 19/11 está marcado, e o ANEXO de 22/11 está destacado (SEM VERIFICAÇÃO)

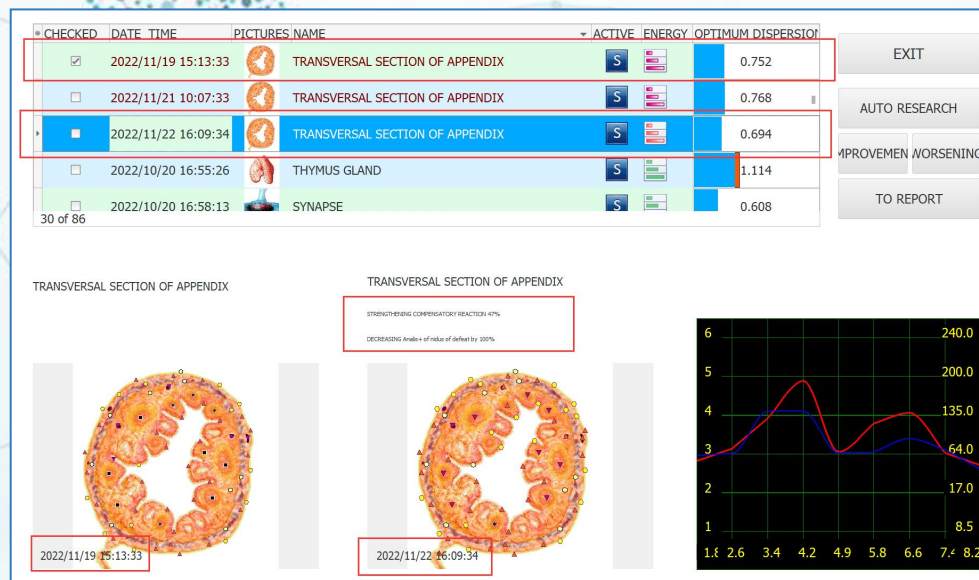


O item marcado está à esquerda (APÊNDICE 19/11) e o item comparado que está destacado está à direita (APÊNDICE 22/11)

Quando você comparar corretamente, verá os resultados corretos.

É importante que, ao comparar por causa dos resultados, você se dê de 4 a 6 semanas de terapia para VER os resultados. NÃO é prático ver uma grande mudança em poucos dias (como usado no exemplo). Os resultados podem acontecer rapidamente, mas siga a sugestão de 4 a 6 semanas antes de comparar e esperar ver mudanças.

Outros recursos na página de análise comparativa

MENU SECRETO: Se você segurar a tecla “ctrl” (control) em seu teclado e clicar em “F”, você verá uma caixa de pesquisa aparecer.

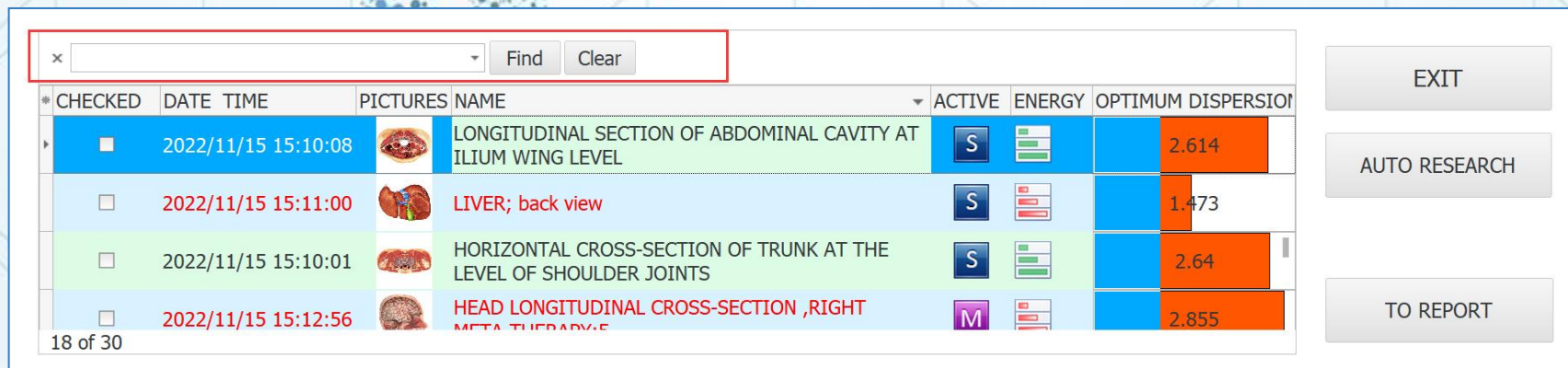


The screenshot displays a medical analysis software interface. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon, a dropdown arrow, and buttons for 'Find' and 'Clear'. Below this is a table with the following columns: *CHECKED, DATE TIME, PICTURES, NAME, ACTIVE, ENERGY, and OPTIMUM DISPERSION. The table contains four rows of data, each with a corresponding medical image in the 'PICTURES' column. The first row is highlighted in blue and has a checked checkbox. The second row is highlighted in light blue and has an unchecked checkbox. The third row is highlighted in light green and has an unchecked checkbox. The fourth row is highlighted in light blue and has an unchecked checkbox. To the right of the table, there are three buttons: 'EXIT', 'AUTO RESEARCH', and 'TO REPORT'. The bottom left corner of the table shows '18 of 30'.

*CHECKED	DATE TIME	PICTURES	NAME	ACTIVE	ENERGY	OPTIMUM DISPERSION
☒	2022/11/15 15:10:08		LONGITUDINAL SECTION OF ABDOMINAL CAVITY AT ILIUM WING LEVEL	S		2.614
☐	2022/11/15 15:11:00		LIVER; back view	S		1.473
☐	2022/11/15 15:10:01		HORIZONTAL CROSS-SECTION OF TRUNK AT THE LEVEL OF SHOULDER JOINTS	S		2.64
☐	2022/11/15 15:12:56		HEAD LONGITUDINAL CROSS-SECTION ,RIGHT	M		2.855

O menu secreto de personalização também está aqui (como o da página de índice do cartão).

Ao comparar órgãos ou outros testes, você verá uma opção de **MELHORIA** e **PIORA** à direita. Ao clicar em um desses botões, você verá formas piscando nas fotos para mostrar exatamente onde foi a melhora de energia e onde a energia não foi melhorada.

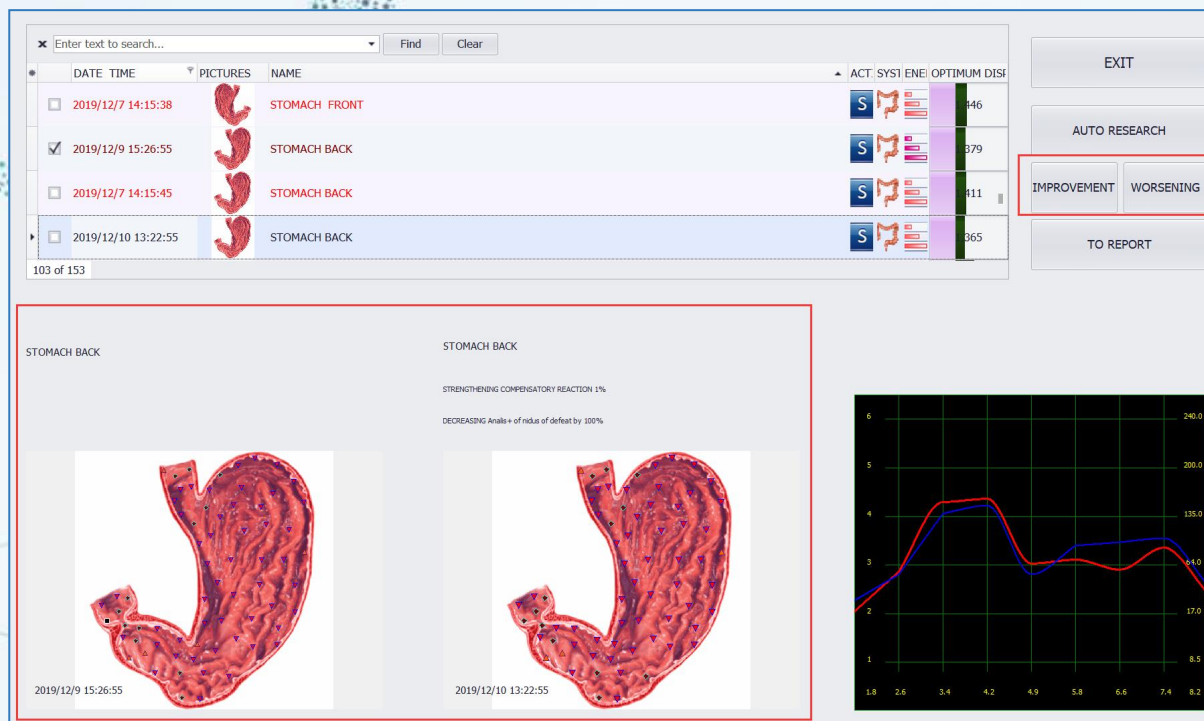


EXIT – Para voltar à página CARD INDEX

PARA RELATAR – Para adicionar a reação de fortalecimento ou enfraquecimento às notas

PESQUISA AUTOMÁTICA – Escolherá automaticamente duas coisas para comparar (isso nem sempre é recomendado porque cabe ao usuário comparar as informações corretas).

PÁGINA DE PESQUISA

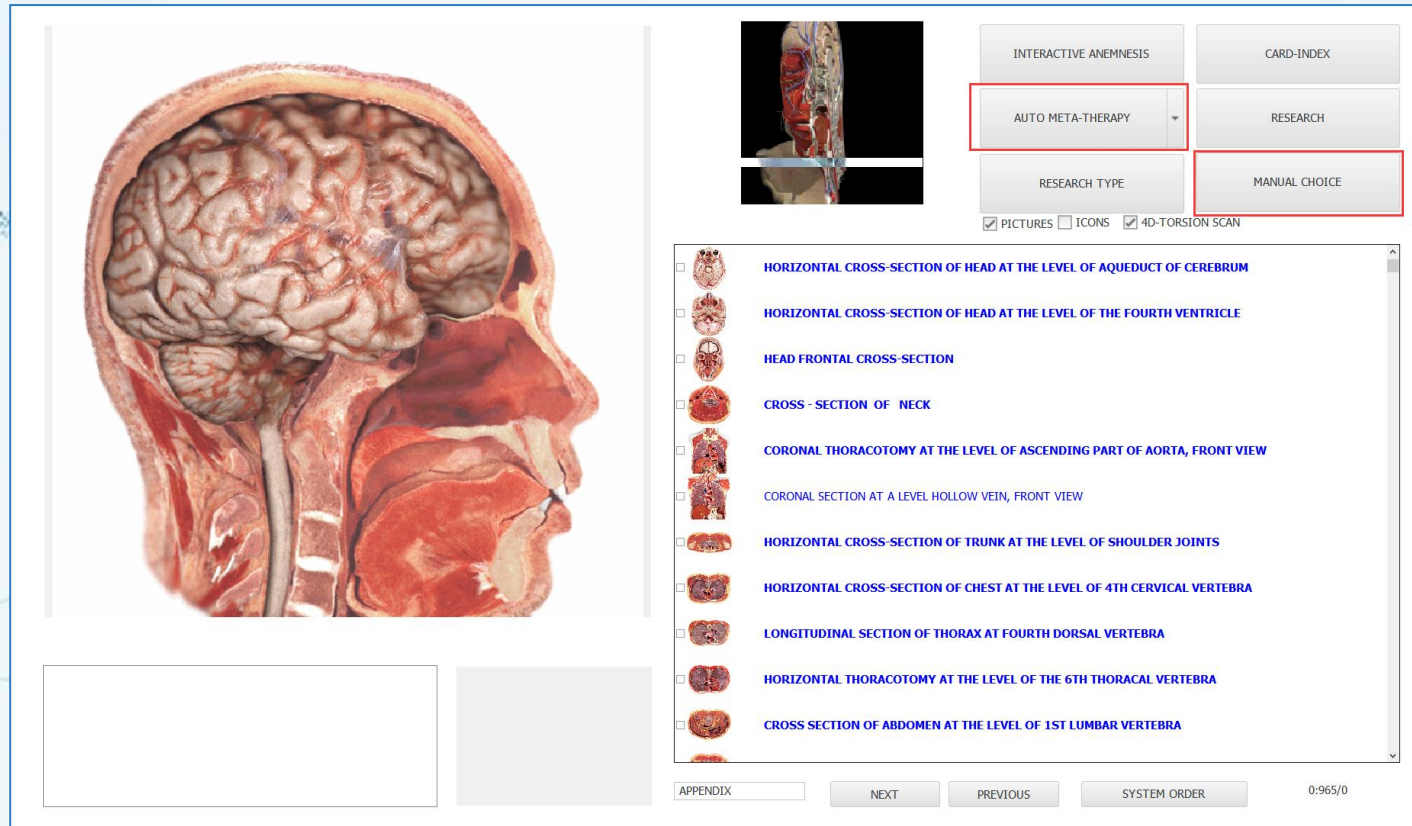


1. **ESCOLHA MANUAL** – Opções para selecionar opções de varredura pré-programadas e organizar a lista de varredura.

2. **AUTO METATERAPIA** – Terapia AUTOMÁTICA. Dará terapia a todos os órgãos digitalizados e selecionados imediatamente após clicar.

3. **4D-Torsion Scan** – Ativa fotos de órgãos e tecidos ao lado de seus nomes.

☒ 4D-TORSION SCAN

4. **IMAGENS** – Ativa a imagem 3D. Pode ser ativado ou desativado com base na preferência dos usuários JAPA tecno GOLD.

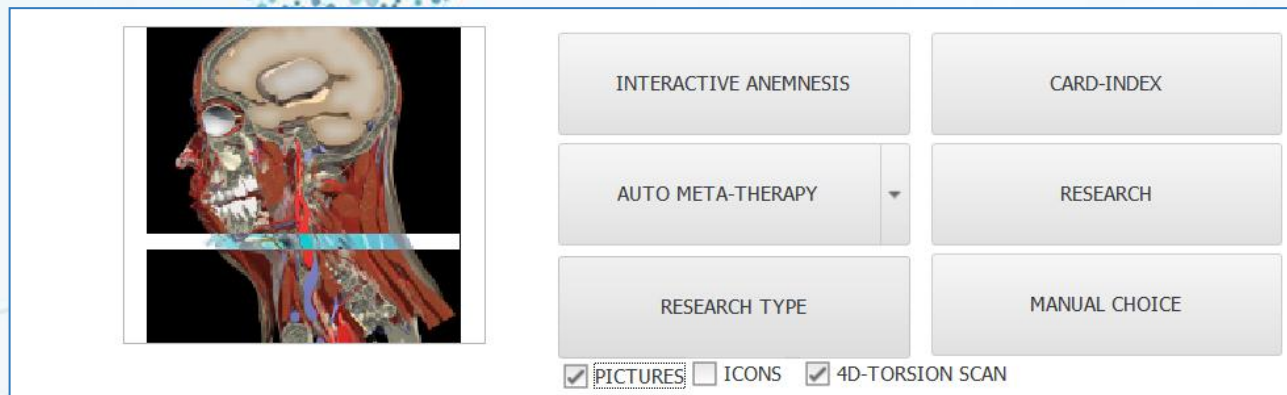

5. **TIPO DE PESQUISA** – Traz mais ou menos órgãos para varredura.


6. **PESQUISA** – Inicia a varredura quando os órgãos desejados para varredura forem selecionados.

7. **CARD INDEX** – Nos leva de volta à página CARD INDEX.

8. **ANEMNESE INTERATIVA** – Leva você para a página ANEMNESE INTERATIVA.

9. **ANEMNESE E DIAGNÓSTICO** – Listas de queixas e diagnósticos selecionados da página **ANEMNESE INTERATIVA**.

10. **CAIXA DE PESQUISA** – Permite a localização rápida de órgãos e tecidos. Digite o órgão ou tecido que procura e clique em próximo para ver todos os itens encontrados.

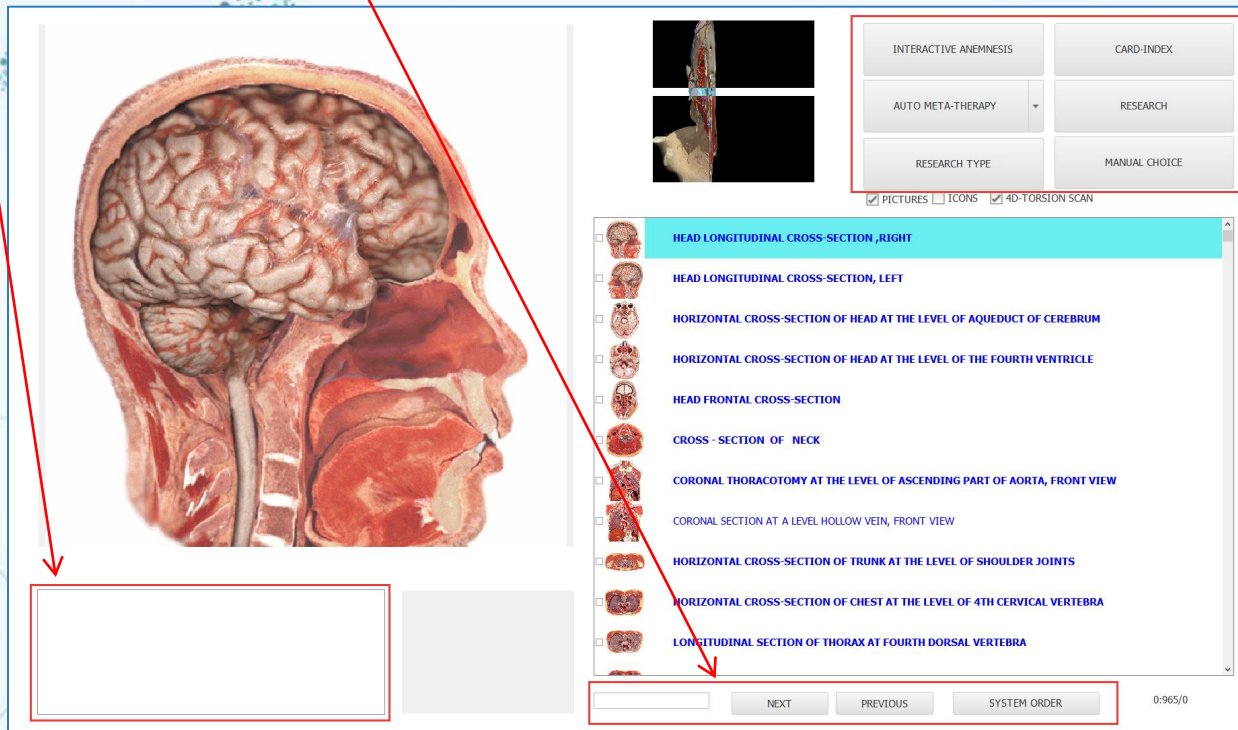

A lista de órgãos é organizada em ordem de sistema. Começando de cima, as seções transversais gerais são listadas na cor azul. Estas são combinações de órgãos e fornecem frequências de combinação. Estes são bons para terapia, mas não são os melhores para análise. A varredura de órgãos e tecidos individuais é sempre melhor para encontrar informações detalhadas e precisas.

PÁGINA DE ANÁLISE

ETALONS

CLEAR

A +

A -

☐ A # ORGANOPREPARAT
☐ B # BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS
☐ C # PATHOLOGY
☐ D # ALLERGENS
☒ E # MICROORGANISMS AND HELMINTHS
☐ F # ALLOPATHY
☐ G # HOMEOPATHY
☐ H # PHYTOTHERAPY
☐ I # NUTRICEVTICS AND PARAPHARMACEUTICALS
☐ J # FOOD
☐ K # LITHOTHERAPY
☐ L # TRACE ELEMENTS
☐ M # THERAPEUTIC COSMETOLOGY
☐ N # BACH FLOWERS
☐ O # PHYSIOTHERAPY
☐ P # EMOTION MATRIX
☐ Q # VITAMIN TABLE
☐ R # HEAVY METALS
☐ S7 SAHASRARA meridians : VC + VG
☐ S6 AJNA meridians : MC + TR
☐ S5 VISHUDHA meridians : P + GI + Sk + Sd
☐ S4 ANAHATA meridians : C + IG
☐ S3 MANIPURA meridians : F + VB + Fd + Ad
☐ S2 SVADHISTANA meridians : R + V + ALL + Ly
☐ S1 MULADHARA meridians : RP + E
☐ KEY OPTIMISATION OVERVIEW
☐ Gene Table



☐ SMART FILTER
☐ SELECT

SHOW ALL

DESCRIPTION

SORT

ADJUSTMENT

ETAON LIST ACCORDING TO DECREASING SPECTRAL SIMILARITY


0	0.000	PARANASAL SINUSES; right view
0	0.983	OPTIMUM DISTRIBUTION
X 0		Virtual model
0	0.250	RHINOVIRUSES
0	0.397	STAPHYLOCOCCUS AUREUS
0	0.471	BRANHAMELLA (NEISSERIA)
0	0.494	ASPERGILLUS FUMIGATUS
0	0.511	PENICILLIUM FREQUENTANS
0	0.516	MUCOR RACEMOSUS
0	0.534	PENICILLIUM CHRYSOGENUM
0	0.554	CANDIDA PARAPSILOSIS
0	0.559	CANDIDA ROBUSTA
0	0.565	ASPERGILLUS NIGER
0	0.567	AQUASPIRILLUM SERPENS
0	0.585	ACTINOMYCES ISRAELII
0	0.613	PENICILLIUM ROQUEFORTI
0	0.628	PENICILLIUM CAMEMBERTI
0	0.644	CANDIDA CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS
0	0.645	SACCHAROMYCES



Ao analisar órgãos por conta própria, siga os próximos passos:

1. Comece escolhendo o ETALON MICROORGANISMO E HELMINTOS.

Sempre executaremos análises manuais apenas de microrganismos e patologias. Todos os outros ETALONS serão descritos para uso individual posteriormente neste manual. Começamos com microrganismos porque muitos problemas de saúde e desequilíbrios no corpo são causados pela presença de parasitas, bactérias, vírus, cândida, etc. Quando abordamos essas infecções primeiro, muitos problemas de saúde são compensados.

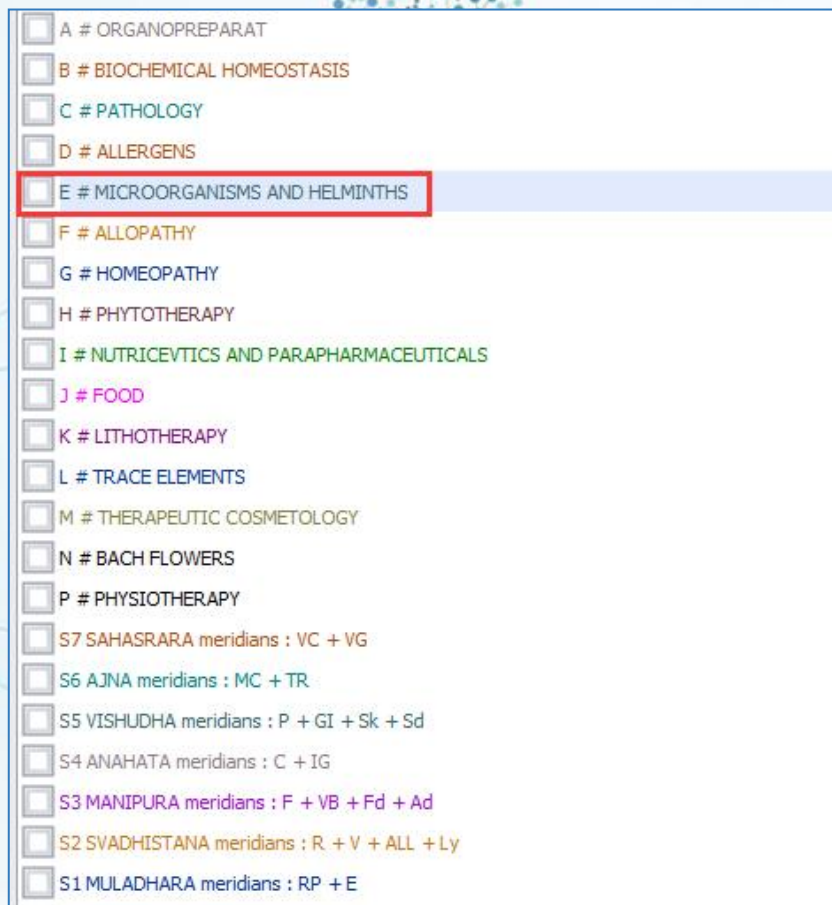

- ☐ A # ORGANOPREPARAT
- ☐ B # BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS
- ☐ C # PATHOLOGY
- ☐ D # ALLERGENS
- ☒ E # MICROORGANISMS AND HELMINTHS
- ☐ F # ALLOPATHY
- ☐ G # HOMEOPATHY
- ☐ H # PHYTOTHERAPY
- ☐ I # NUTRICEVTICS AND PARAPHARMACEUTICALS
- ☐ J # FOOD
- ☐ K # LITHOTHERAPY
- ☐ L # TRACE ELEMENTS
- ☐ M # THERAPEUTIC COSMETOLOGY
- ☐ N # BACH FLOWERS
- ☐ P # PHYSIOTHERAPY
- ☐ S7 SAHASRARA meridians : VC + VG
- ☐ S6 AJNA meridians : MC + TR
- ☐ S5 VISHUDHA meridians : P + GI + Sk + Sd
- ☐ S4 ANAHATA meridians : C + IG
- ☐ S3 MANIPURA meridians : F + VB + Fd + Ad
- ☐ S2 SVADHISTANA meridians : R + V + ALL + Ly
- ☐ S1 MULADHARA meridians : RP + E

Depois de selecionar **MICROROGANISMS AND HELMINTHS ETALON**, você verá uma lista

ETALONS

CLEAR

A +

A -

☐ A # ORGANOPREPARAT
☐ B # BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS
☐ C # PATHOLOGY
☐ D # ALLERGENS
☒ E # MICROROGANISMS AND HELMINTHS
☐ F # ALLOPATHY
☐ G # HOMEOPATHY
☐ H # PHYTOTHERAPY
☐ I # NUTRICEVICS AND PARAPHARMACEUTICALS
☐ J # FOOD
☐ K # LITHOTHERAPY
☐ L # TRACE ELEMENTS
☐ M # THERAPEUTIC COSMETOLOGY
☐ N # BACH FLOWERS
☐ O # PHYSIOTHERAPY
☐ P # EMOTION MATRIX
☐ Q # VITAMIN TABLE
☐ R # HEAVY METALS
☐ S7 SAHASRARA meridians : VC + VG
☐ S6 AJNA meridians : MC + TR
☐ S5 VISHUDHA meridians : P + GI + Sk + Sd
☐ S4 ANAHATA meridians : C + IG
☐ S3 MANIPURA meridians : F + VB + Fd + Ad
☐ S2 SVADHISTANA meridians : R + V + ALL + Ly
☐ S1 MULADHARA meridians : RP + E
☐ KEY OPTIMISATION OVERVIEW
☐ Gene Table




☐ SMART FILTER
☐ SELECT

SHOW ALL

DESCRIPTION

SORT

ADJUSTMENT

ETAON LIST ACCORDING TO DECREASING SPECTRAL SIMILARITY

0	0.000	PARANASAL SINUSES; right view
0	0.983	OPTIMUM DISTRIBUTION
0	0.250	RHINOVIRUSES
0	0.397	STAPHYLOCOCCUS AUREUS
0	0.471	BRANHAMELLA (NEISSERIA)
0	0.494	ASPERGILLUS FUMIGATUS
0	0.511	PENICILLIUM FREQUENTANS
0	0.516	MUCOR RACEMOSUS
0	0.534	PENICILLIUM CHRYSOGENUM
0	0.554	CANDIDA PARAPSILOSIS
0	0.559	CANDIDA ROBUSTA
0	0.565	ASPERGILLUS NIGER
0	0.567	AQUASPIRILLUM SERPENS
0	0.585	ACTINOMYCES ISRAELII
0	0.613	PENICILLIUM ROQUEFORTI
0	0.628	PENICILLIUM CAMEMBERTI
0	0.644	CANDIDA CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS
0	0.645	SACCHAROMYCES

* CHECKED	DATE TIME	PICTURES	NAME	ACTIVE	ENERGY	OPTIMUM DISPERSION
☐	2022/11/30 11:48:01		RACHIS, front view	S		1.343
☒	2022/12/2 16:16:28		PARANASAL SINUSES; right view RHINOVIRUSES	V		1.002
☐	2022/11/15 15:11:07		PARANASAL SINUSES; right view	S		0.846
☒	2022/12/2 16:09:34		PARANASAL SINUSES; right view	S		0.983
☐	2022/12/2 16:09:40		PARANASAL SINUSES: left view	S		1.001

49 of 113

EXIT

AUTO RESEARCH


IMPROVEMENT WORSENING

TO REPORT

PARANASAL SINUSES; right view


PARANASAL SINUSES; right view RHINOVIRUSES

WEAKENING COMPENSATORY REACTION 52%

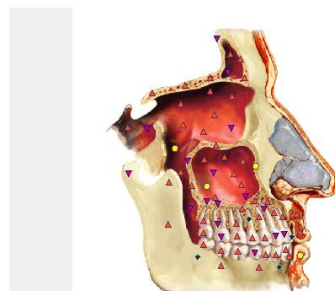


2022/12/2 16:09:34


RHINOVIRUSES

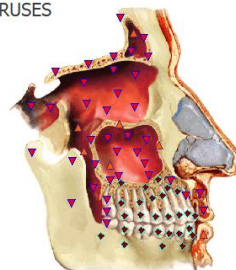

2022/12/2 16:16:28

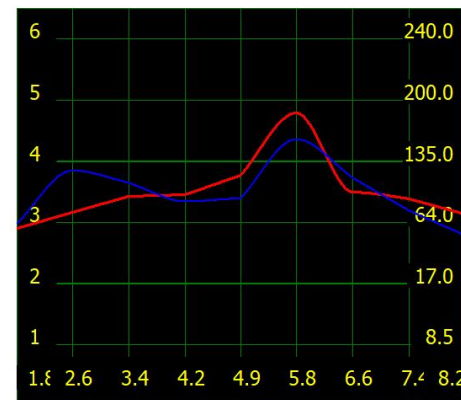

Você pode ver que a comparação é feita corretamente porque a varredura original, marcada com um “S” é marcada, enquanto o teste Vegeto marcado com um “V” é destacado. Além disso, na parte inferior as imagens mostram com e sem os microorganismos testados. A imagem à esquerda é a varredura original do órgão e a imagem à direita é a imagem do órgão com a varredura do microorganismo.

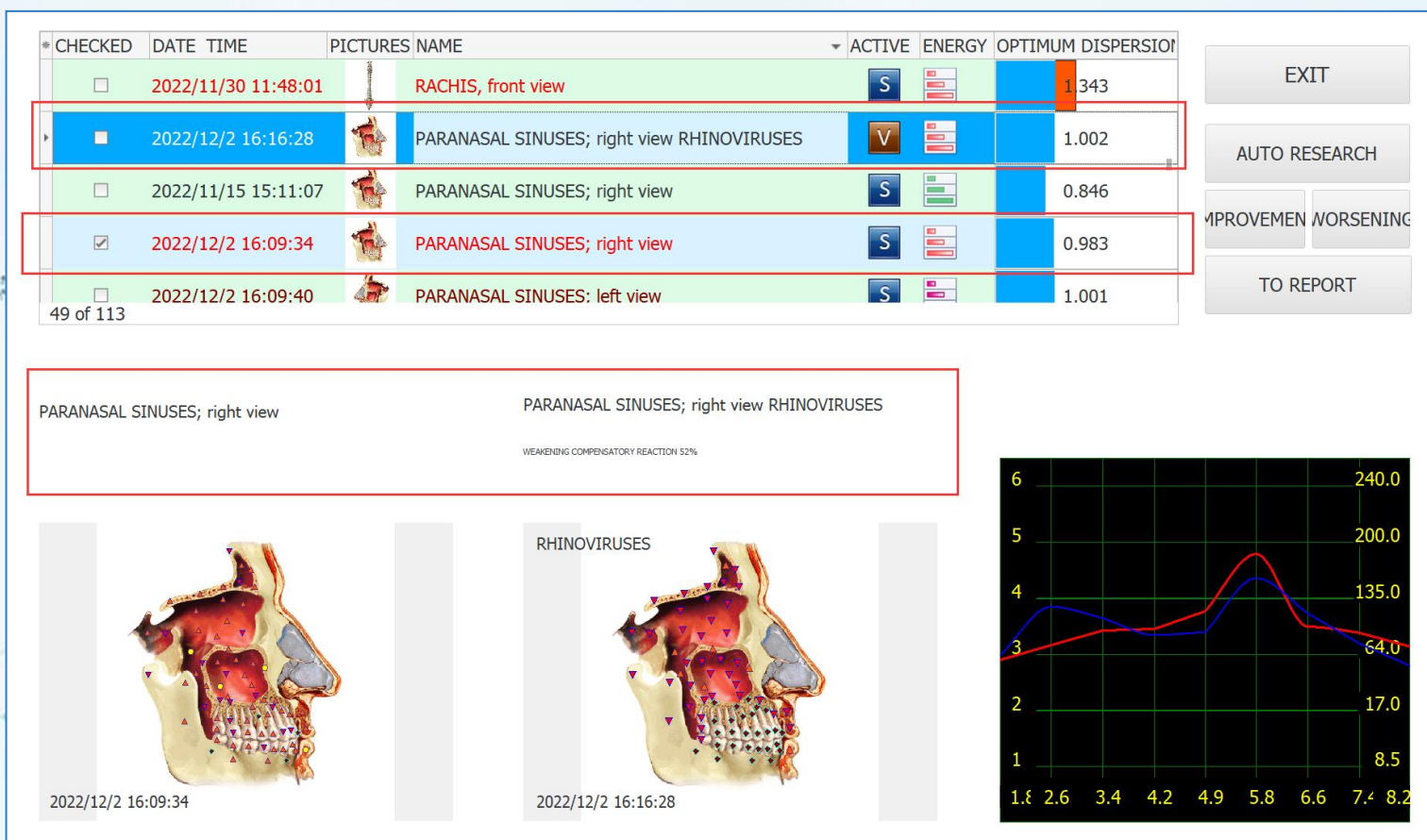


O resultado é **REAÇÃO COMPENSATÓRIA DE ENFRAQUECIMENTO 52%**. Isso significa que o órgão continuará lutando e piorando com o tempo se nada for feito sobre o supercrescimento do microrganismo **RINOVÍRUS**. Este resultado do **VEGETO TEST** confirma a descoberta na página de **ANÁLISE** de que os **RINOCÍRUS** estão realmente presentes no órgão e afetando o órgão negativamente.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Quando você deseja rastrear desequilíbrios de frequência relacionados ao câncer, é aqui que a ANÁLISE MANUAL deve ser implementada.

Para mulheres, o rastreamento do câncer de mama deve ser feito neste item específico

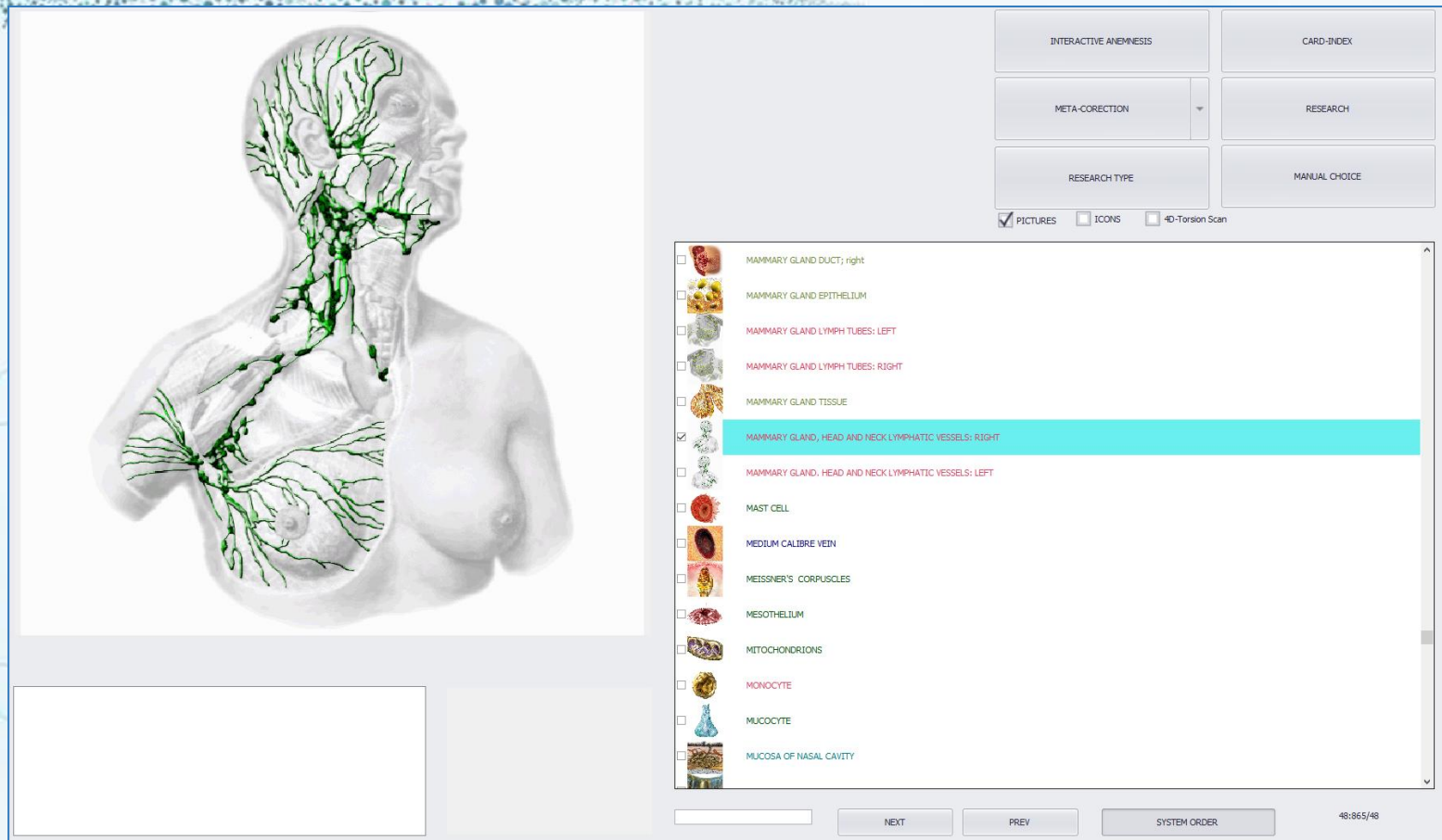

A parte mais importante para entender os **ETALONS** é entender quais são **NEGATIVOS** e quais são **POSITIVOS**.

LISTA INICIAL DE ETALONS:

ORGANOPREPARAT – Lista de frequências NECESSÁRIAS que podem ser usadas para PREPARAÇÃO DE REMÉDIOS.

HOMEOSTASE BIOQUÍMICA – Lista de hormônios, vitaminas, produtos químicos FORA DO EQUILÍBRIO

PATOLOGIA - Lista de doenças

ALÉRGICOS – Lista de alérgenos

POSITIVO (não inverter)

NEGATIVO (Inverter)

☐	A # ORGANOPREPARAT
☐	B # BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS
☐	C # PATHOLOGY
☐	D # ALLERGENS
☐	E # MICROORGANISMS AND HELMINTHS
☐	F # ALLOPATHY
☐	G # HOMEOPATHY
☐	H # PHYTOTHERAPY
☐	I # NUTRICEVTICS AND PARAPHARMACEUTICALS
☐	J # FOOD
☐	K # LITHOTHERAPY
☐	L # TRACE ELEMENTS
☐	M # THERAPEUTIC COSMETOLOGY
☐	P # PHYSIOTHERAPY

MICROGANISMOS E HELMINTES – Lista de vírus, bactérias, parasitas, candida, etc.

ALOPATIA – Lista de medicamentos alopáticos

HOMEOPATIA – Lista de remédios homeopáticos

FITOTERAPIA – Lista de plantas terapêuticas para terapias

NUTRICEVÉTICOS E PARAFARMACÊUTICOS – Relação de medicamentos farmacêuticos

ALIMENTAÇÃO – Lista de alimentos recomendados

LITOTERAPIA – Lista de pedras terapêuticas para terapia

OLIGOELEMENTOS - Lista de metais pesados

COSMETOLOGIA TERAPÊUTICA - Lista de itens de cosmetologia terapêutica

FISIOTERAPIA - Fisioterapia

O ponto importante aqui é que se um ETALON é descrito ou lista coisas positivas como remédios, terapias, recomendações alimentares, etc. mais sobre isso na seção PREPARAÇÃO DE REMÉDIO).

V – TESTE EXTERNO

V-TEST EXTERNAL permite que você teste itens externos no copo fornecido em sua embalagem.

V – A função TESTE EXTERNO encontra-se na página ANÁLISE e é melhor utilizada com o estômago vazio antes de qualquer medicação. O que você pode fazer é colocar uma dose recomendada de um suplemento diretamente no copo e testar para ver se o suplemento é adequado para a pessoa.

Os resultados são mais precisos antes da ingestão de alimentos ou medicamentos.



Antes de executar um teste, você deve escolher e escanear o órgão apropriado para o suplemento que está testando. Se você estiver testando um medicamento para tireoide, certifique-se de selecionar a tireoide para o teste, etc. No exemplo abaixo, estou testando aleatoriamente um suplemento de cálcio em um órgão que NÃO é o mais apropriado, portanto, certifique-se de aprender o processo, mas use órgãos mais apropriados para os testes.

Lembre-se de que todas as marcas de suplementos variam ligeiramente em seus ingredientes e conservantes.

Um suplemento de cálcio de uma empresa pode ter ingredientes completamente diferentes de outras marcas, portanto, ao realizar os testes em pessoas, saiba que cada pessoa reagirá de maneira diferente ao mesmo suplemento.

1. Selecione o órgão apropriado para o suplemento a ser testado
2. Use a varredura de hoje e vá até a página ANÁLISE
3. Na página ANÁLISE, clique em V – TESTE EXTERNO

The screenshot displays the 'ANÁLISE' (ANALYSIS) page of a software application. On the left, there is a list of organs and systems, each with a checkbox and a color-coded label. The central area features a 3D anatomical model of a human torso with internal organs highlighted in green and blue, alongside a line graph with two data series (blue and red) plotted against a grid. The right side of the interface contains a vertical list of analysis options, including 'EXIT', 'V-TEST EXTERNAL', 'V-TEST INTERNAL', 'REPRINTER', 'AURA', 'NLS - ANALYSIS', 'ENTROPY ANALYSIS', 'AUTO MODEL', 'ABSOLUTE MODEL', 'COMPARATIVE ANALYSIS', 'SAVE TO REPORT', and 'VIEW REPORT'. A dialog box is open in the center, titled 'Input name of tested standart', with a text input field and buttons for 'Edit', 'Clear', 'OK', and 'Cancel'.

ETALONS CLEAR A+ A-

☐ A # ORGANOPREPARAT
☐ B # BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS
☐ C # PATHOLOGY
☐ D # ALLERGENS
☐ E # MICROORGANISMS AND HELMINTHS
☐ F # ALLOPATHY
☐ G # HOMEOPATHY
☐ H # PHYTOTHERAPY
☐ I # NUTRICEUTICS AND PARAPHARMACEUTICALS
☐ J # FOOD
☐ K # LITHOTHERAPY
☐ L # TRACE ELEMENTS
☐ M # THERAPEUTIC COSMETOLOGY
☐ N # BACH FLOWERS
☐ P # PHYSIOTHERAPY
☐ S7 SAHASRARA meridians : VC + VG
☐ S6 AJNA meridians : MC + TR
☐ S5 VISHUDHA meridians : P + GI + Sk + Sd
☐ S4 ANAHATA meridians : C + IG
☐ S3 MANIPURA meridians : F + VB + Pd + Ad
☐ S2 SVADHISTANA meridians : R + Y + ALL + Ly
☐ S1 MULADHARA meridians : RP + E
☐ VITAMINS INDICATOR
☐ Minerals indicators
☐ EFAs indicators
☐ Toxins indicators
☐ Microbiology indicators
☐ Brain Disorder Table

1.8 SKELETAL SYSTEM
2.6 CONNECTIVE TISSUES, NERVES, CARDIAC VALVES
- LOOSE CONNECTIVE TISSUE, STRIATED MUSCULAR, AND CARDIAC MUSCLE;
3.4 UNSTRATIATED MUSCULAR TISSUE;
4.2 TESSELLATED EPITHELIUM OF THE DIGESTIVE TRACT;
4.9 STRATIFIED SQUAMOUS AND COLUMNAR EPITHELIA.
PARENCHYMATOUS LIVER TISSUE AND TISSUE OF THE BILIARY TRACT;
- KIDNEY TISSUE EPITHELIUM AND REPRODUCTIVE ORGANS;
5.8 LYMPHOID RINGS OF THE PHARYNX, UPPER SECTION OF THE RESPIRATORY TRACT, LYMPHATIC SYSTEM, SPLEEN, OVARIES, AND PROSTATE;
6.6 PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM, BRONCHUS EPITHELIUM, ADRENALS, AND THYROID;
7.4 CENTRAL SECTIONS OF SENSORY ANALYSERS EXCEPT THE OPTIC ONES, AND SUB CORTICAL STRUCTURES OF THE BRAIN, PONS CEREBELLI; CEREBELLUM, LIMBIC SYSTEM AND LUNGS PARENCHYMA;
8.2 RETINA, OPTIC NERVE, CEREBRAL CORTEX.

SMART FILTER
SELECT
SHOW ALL
DESCRIPTION
SORT
ADJUSTMENT
ADJUST ALL
AUTO SCAN


Input name of tested standart

Edit Clear OK Cancel

EXIT
V-TEST EXTERNAL
V-TEST INTERNAL
REPRINTER
AURA
NLS - ANALYSIS
ENTROPY ANALYSIS
AUTO MODEL
ABSOLUTE MODEL
COMPARATIVE ANALYSIS
SAVE TO REPORT
VIEW REPORT

Ao clicar em V –TEST EXTERNAL, você verá uma caixa de texto na tela

Na caixa de texto, digite o nome do suplemento e o número

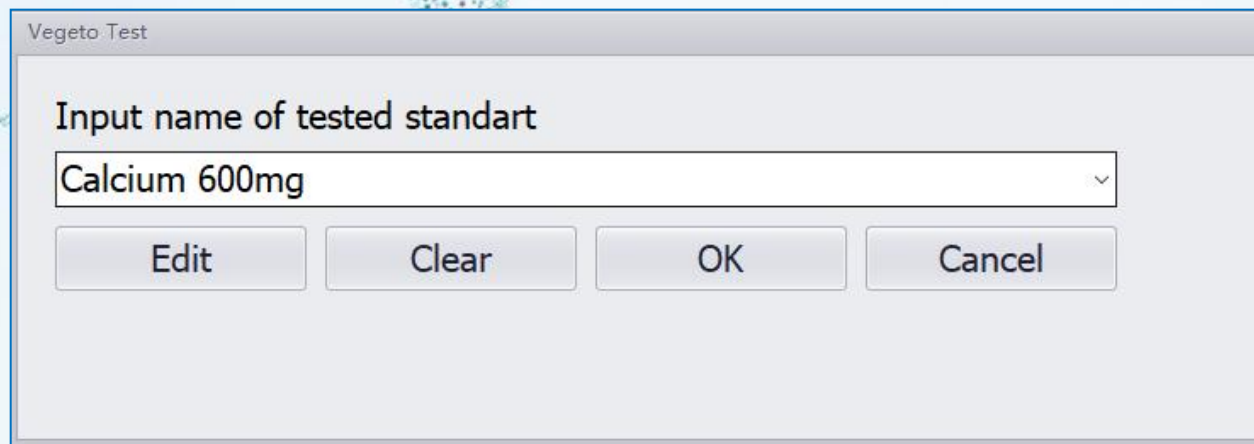

Vegeto Test

Input name of tested standart


Calcium 600mg

Edit Clear OK Cancel


Depois de digitar o nome do suplemento, SAIBA QUE ASSIM QUE CLICAR EM OK IRÁ INICIAR UM SCAN. Portanto, certifique-se de que o fone de ouvido seja usado na pessoa que está sendo testada e que o suplemento esteja no copo.

Se o frasco do suplemento recomendar 2 comprimidos todos os dias, coloque a dose recomendada no copo.

Uma varredura começará imediatamente após clicar em OK na caixa de texto e durante alguns momentos da varredura você verá o nome do suplemento testado na parte inferior da tela.

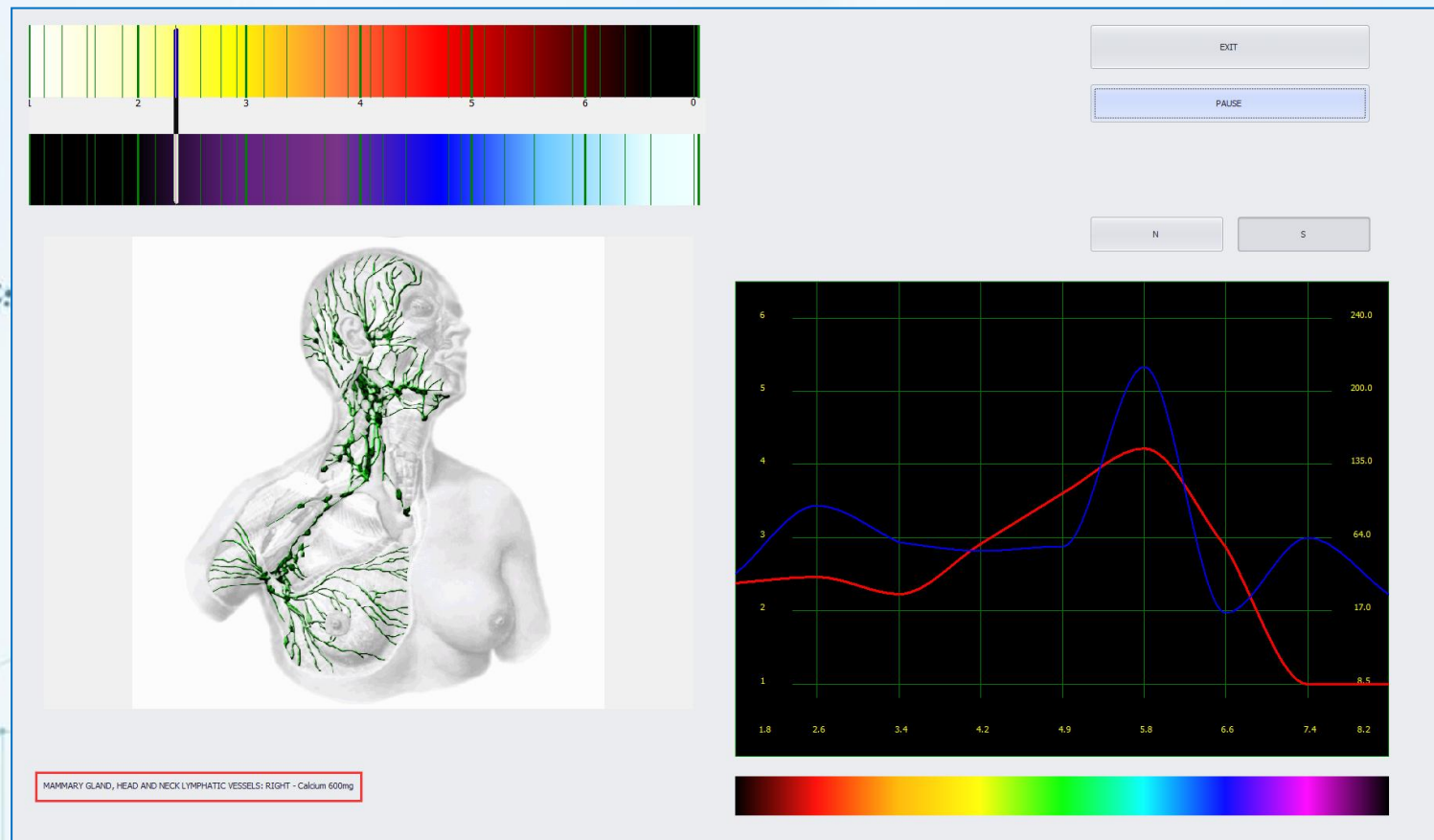

Ao final do teste, você será direcionado para a página **LOCALIZAR** onde deverá clicar na foto do gráfico para voltar à página **ANÁLISE OU** diretamente da página **LOCALIZAR**, clicar em **ANÁLISE COMPARATIVA** para ver o resultado.

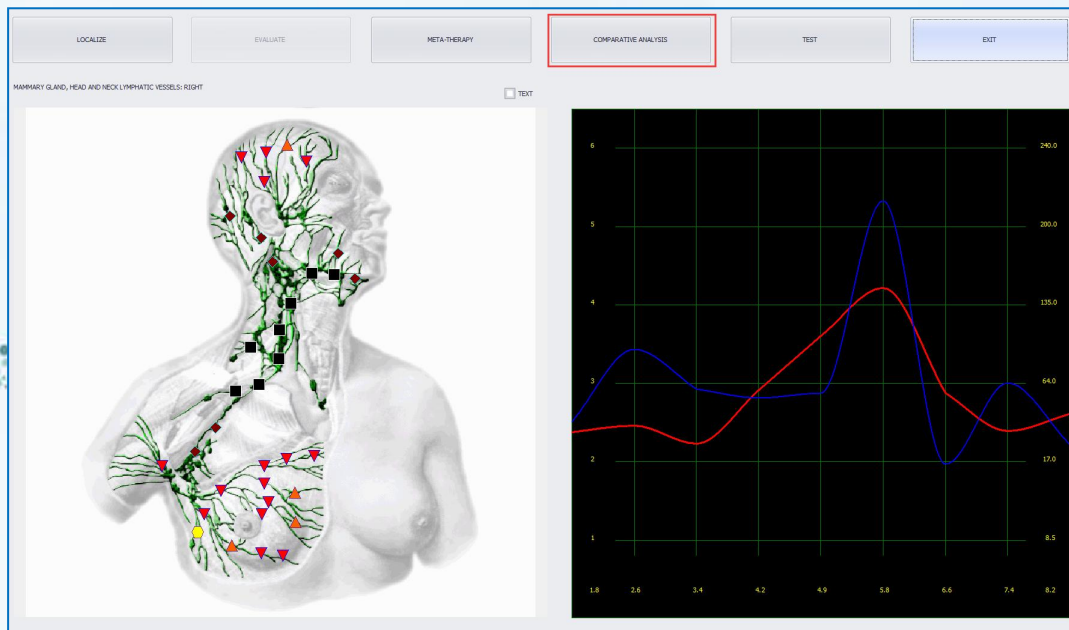

Na página **ANÁLISE OU** na página **LOCALIZAR**, clique em **ANÁLISE COMPARATIVA**

ETALING CLEAR A+ A-

☐ A # ORGANOPREPARAT
☐ B # BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS
☐ C # PATHOLOGY
☐ D # ALLERGIES
☐ E # MICROORGANISMS AND HELMINTHS
☐ F # ALLURASTHY
☐ G # HOMEOPATHY
☐ H # PHYTOTHERAPY
☐ I # NUTROCEUTICS AND PARAPHARMACEUTICALS
☐ J # FOOD
☐ K # LITHOTHERAPY
☐ L # TRACE ELEMENTS
☐ M # THERAPEUTIC COSMETOLOGY
☐ N # BACH FLOWERS
☐ P # PHYSIOTHERAPY
☐ Q7 DENTADURIA meridians : TC + VG
☐ Q8 D8B meridians : MC + TB
☐ Q1 Q8D8H meridians : P + Q2 + Q8 + Sd
☐ Q4 K8U8V8T meridians : C + 3C
☐ Q3 K8U8P8U8 meridians : F + VB + Fd + Ad
☐ Q2 S8H8D8T8V8 meridians : R + V + AL + LY
☐ S1 K8L8A8D8H8 meridians : RP + E
☐ VITAMINE INDICATOR
☐ HORMONE INDICATORS
☐ SPH4 INDICATORS
☐ TOXINS INDICATORS
☐ MICROBIOLOGY INDICATORS
☐ Brain Disorder Table

☐ SMART FILTER
☐ SELECT

SHOW ALL DESCRIPTION SORT ADJUSTMENT ADJUST ALL AUTO SCAN


ETALON LIST ACCORDING TO DECREASING SPECTRAL SIMILARITY

0	0.000	MAMMARY GLAND, HEAD AND NECK LYMPHATIC VESSELS: RIGHT
0	1.011	OPTIMAL DISTRIBUTION
X 0		Virtual model

1.8 SKELTAL SYSTEM
2.8 CONNECTIVE TISSUES, NERVES, CARDIAC VALVES
3.8 LOOSE CONNECTIVE TISSUE, STRIATED MUSCULAR, AND CARDIAC MUSCLES
4.8 STRATIFIED MUSCULAR TISSUE
5.8 STRATIFIED EPITHELIUM OF THE DIGESTIVE TRACT
6.8 STRATIFIED SQUAMOUS AND COLUMNAR EPITHELIA, ENDOCRINE GLANDS, LIVER, TISSUE AND TISSUE OF THE BILINARY TRACT
7.8 TRANSITORY EPITHELIUM AND REPRODUCTIVE ORGANS
8.8 LUTHERED RING OF THE PHARYNX, UPPER SECTION OF THE RESPIRATORY TRACT, LYMPHATIC SYSTEM, SPLEEN, CHANGEL, AND PROSTATE
9.8 PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM, BRONCHUS EPITHELIUM, ADRENALS, AND THYROID
0.8 CENTRAL SECTIONS OF SENSORY ANALYSES EXCEPT THE OPTIC ONES, AND SUB CORTICAL STRUCTURES OF THE BRAIN, PONS, CEREBELLUM, CEREBELLUM, LIMBIC SYSTEM AND LUNGS, PARSCHYAL
1.8 RETINAL, OPTIC NERVE, CEREBRAL CORTEX

EXIT
V-TEST EXTERNAL
V-TEST INTERNAL
REPORTER
AURA
NLS - ANALYSIS
ENTHROPY ANALYSIS
AUTO MODEL
ABSOLUTE MODEL
COMPARATIVE ANALYSIS
SAVE TO REPORT
VIEW REPORT

A página de ANÁLISE COMPARATIVA mostrará os resultados do teste Vegeto externo, SE você acessar a PÁGINA DE ANÁLISE COMPARATIVA diretamente após o teste.

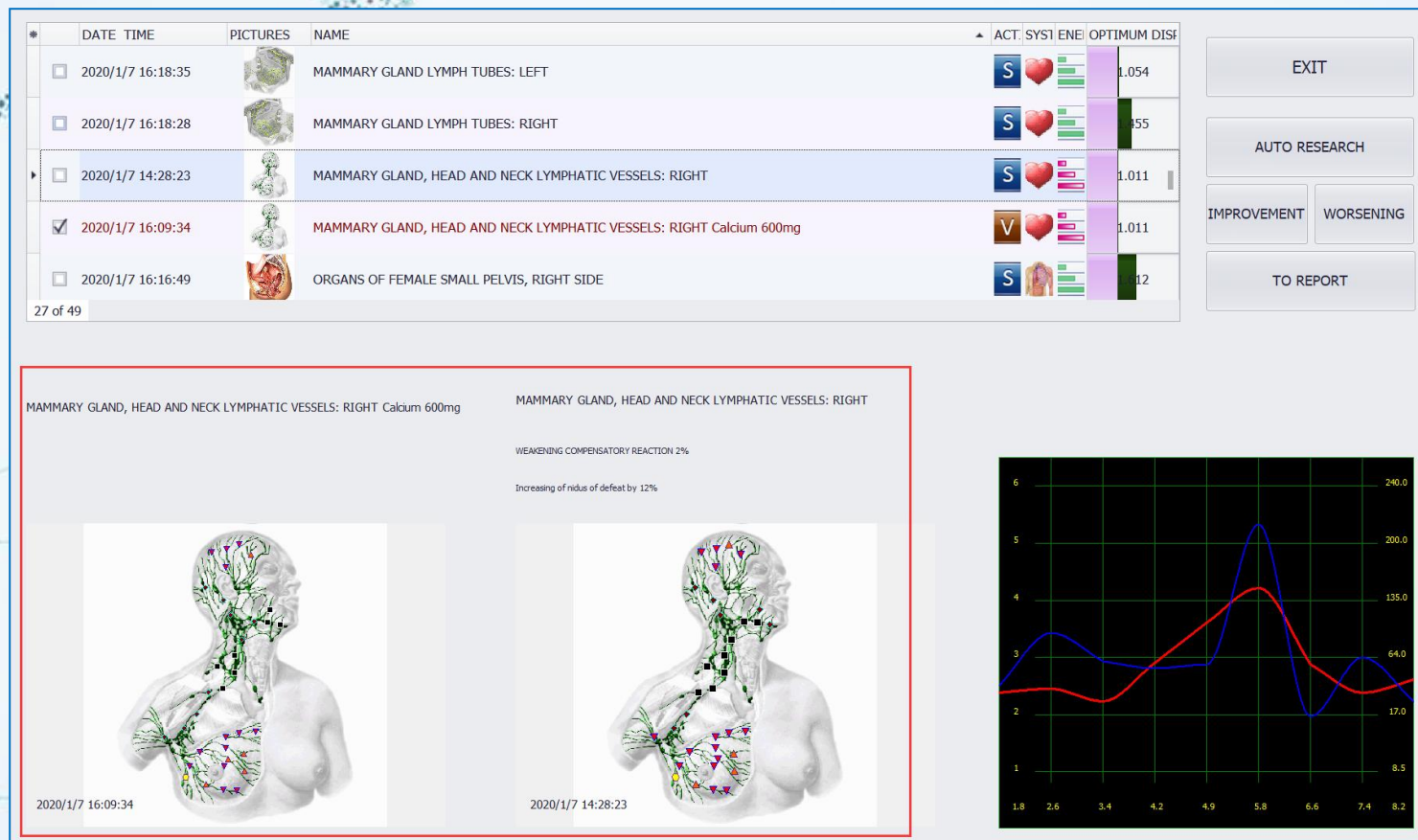

Ao clicar com o botão direito, um botão chamado “PREVIEW” aparecerá na tela, clique em **PREVIEW**. Esta seção pode ser verificada para uma descrição do problema encontrado.

148

PREPARAÇÃO DO REMÉDIO

Na página ANÁLISE, você tem a opção de criar remédios para problemas específicos encontrados, os próprios órgãos ou utilizar qualquer outro ETALON da lista.

O PROCESSO DE PREPARAÇÃO DO REMÉDIO

Os remédios devem ser feitos em um frasco conta-gotas de vidro



Os frascos conta-gotas podem ser de qualquer cor, desde que sejam de vidro. Antes de imprimir o remédio, retire a tampa de plástico e coloque no frasco apenas água ou água com uma gota de álcool.

Um remédio só com água dura uma semana

Um remédio com uma gota de álcool dura um mês

Os **REMÉDIOS** podem ser feitos para qualquer problema encontrado, para um órgão (para ajudar a equilibrar as frequências) ou usando remédios homeopáticos já criados. Na seção **ETALONS** do manual, falamos sobre **ETALONS POSITIVOS** e **NEGATIVOS**. É aqui que essas informações devem ser implementadas.

Por exemplo: Se você encontrar uma patologia que é comprovadamente um problema para a pessoa, você pode criar um remédio para atacar essa patologia e expulsá-la do corpo. Isso é feito invertendo as frequências e, portanto, equilibrando.

Você deve ver o nome do órgão em vez de um item **ETALON** na parte inferior da página **REPRINTER**, é assim que você pode confirmar que está fazendo um remédio para o órgão ou um **ETALON** selecionado. **REMÉDIOS** feitos com as **MESMAS** listas de **ETALON** podem ser combinados em um frasco. Isso significa que se você quiser fazer remédios para até 5 **MICROGANISMOS**, **PATOLOGIA**, ETC. Você pode colocar até 5 em um frasco, mas ainda precisa imprimir um de cada vez seguindo as etapas nas páginas anteriores.

Exemplo: Você selecionou a **PATOLOGIA ETALON** e tem 5 itens na lista com coeficientes baixos e confirmados como enfraquecimento com um **V – TESTE INTERNO**. Você pode fazer um remédio para todos os 5 em um frasco conta-gotas, mas seguindo as etapas para **REPRINTER**, uma de cada vez.

ETALON LIST ACCORDING TO DECREASING SPECTRAL SIMILARITY

0	0.000	MAMMARY GLAND, HEAD AND NECK LYMPHATIC VESSELS: LEFT
0	0.886	OPTIMUM DISTRIBUTION
x	0	Virtual model
0	0.422	MONONUCLEOSIS
0	0.678	LYMPHANGITIS
0	0.774	SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
0	0.784	SCLERODERMA
0	0.852	LYMPHADENITIS
0	0.882	LIPOMA OF THE MAMMARY GLAND

É importante que você faça soluções **APENAS** para problemas confirmados que estariam em seu relatório (se estiver fazendo relatório automático) ou se testado com o **V-TEST INTERNAL** à mão.

AURA

A página da aura está no software apenas para informações de informações. Ao olhar para a aura, por favor, com certeza de que você está usando uma varredura dos chakras.

Para corrigir a aura, você pode dar terapias aos chakras.

Na próxima página, você verá a página da aura original e a formação em relação a cada chakra e o que os desequilíbrios nesses chakras significam para o corpo em termos de disfunção específica do órgão.

The screenshot displays the AURA software interface. On the left, there is a list of organs and chakras with checkboxes. The central part shows a human figure with chakras and a spectral graph. The right side contains a list of organs and chakras, with the 'AURA' button highlighted in red. Below the graph, there is a table with columns for 'CHAKRAS' and 'OPTIMUM DISTRIBUTION'.

CHAKRAS	OPTIMUM DISTRIBUTION
0	0.000
0	1.923
X	0

Below the table, there is a section titled 'ETADON LIST ACCORDING TO DECREASING SPECTRAL SIMILARITY'.

E você pode verificar esses 7 etálonos para a aura:


ETALONS

CLEAR

A +

A -

☐ A # ORGANOPREPARAT
☐ B # BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS
☐ C # PATHOLOGY
☐ D # ALLERGENS
☐ E # MICROORGANISMS AND HELMINTHS
☐ F # ALLOPATHY
☐ G # HOMEOPATHY
☐ H # PHYTOTHERAPY
☐ I # NUTRICEVICS AND PARAPHARMACEUTICALS
☐ J # FOOD
☐ K # LITHOTHERAPY
☐ L # TRACE ELEMENTS
☐ M # THERAPEUTIC COSMETOLOGY
☐ N # BACH FLOWERS
☐ P # PHYSIOTHERAPY
☐ S7 SAHASRARA meridians : VC + VG
☐ S6 AJNA meridians : MC + TR
☐ S5 VISHUDHA meridians : P + GI + Sk + Sd
☐ S4 ANAHATA meridians : C + IG
☐ S3 MANIPURA meridians : F + VB + Fd + Ad
☐ S2 SVADHISTANA meridians : R + V + ALL + Ly
☐ S1 MULADHARA meridians : RP + E
☐ VITAMINS INDICATOR
☐ Minerals indicators
☐ EFAs indicators
☐ Toxins indicators
☐ Microbiology indicators
☐ Brain Disorder Table

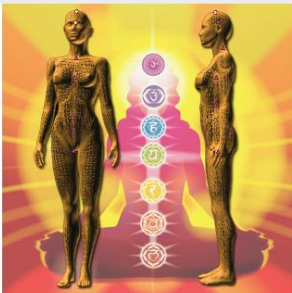

☐ SMART FILTER
☐ SELECT

SHOW ALL

DESCRIPTION

SORT


ADJUSTMENT

ADJUST ALL

AUTO SCAN

ETAON LIST ACCORDING TO DECREASING SPECTRAL SIMILARITY

0	0.000	CHAKRAS
0	1.923	OPTIMUM DISTRIBUTION
X 0		Virtual model

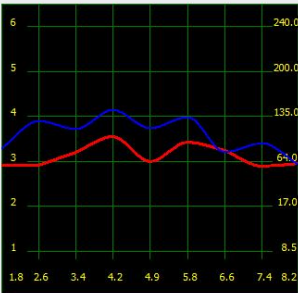

1.8 SKELETAL SYSTEM
2.6 CONNECTIVE TISSUES, NERVES, CARDIAC VALVES
- LOOSE CONNECTIVE TISSUE, STRIATED MUSCULAR, AND CARDIAC MUSCLE;
3.4 UNSTRIATED MUSCULAR TISSUE.
4.2 TESSELLATED EPITHELIUM OF THE DIGESTIVE TRACT;
4.9 STRATIFIED SQUAMOUS AND COLUMNAR EPITHELIA, PARENCHYMATOUS LIVER TISSUE AND TISSUE OF THE BILIARY TRACT;
- KIDNEY TISSUE EPITHELIUM AND REPRODUCTIVE ORGANS;
5.8 LYMPHOID RING OF THE PHARYNX, UPPER SECTION OF THE RESPIRATORY TRACT, LYMPHATIC SYSTEM, SPLEEN, OVARIES, AND PROSTATE;
6.6 PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM, BRONCHUS EPITHELIUM, ADRENALS, AND THYROID;
7.4 CENTRAL SECTIONS OF SENSORY ANALYSERS EXCEPT THE OPTIC ONES, AND SUB CORTICAL STRUCTURES OF THE BRAIN, PONS CEREBELLI, CEREBELLUM, LIMBIC SYSTEM AND LUNGS PARENCHYMA;
8.2 RETINA, OPTIC NERVE, CEREBRAL CORTEX.

EXIT

V-TEST EXTERNAL

V-TEST INTERNAL

REPRINTER

AURA

NLS - ANALYSIS

ENTHROPY ANALYSIS

AUTO MODEL

ABSOLUTE MODEL

COMPARATIVE ANALYSIS

SAVE TO REPORT

VIEW REPORT

Outras terapias no software de JAPA tecno

Embora a meta-terapia seja a principal terapia do sistema, a terapia mais eficaz e deva ser mais usada, existem outras terapias opcionais que podem ser implementadas em seus protocolos de tratamento. Essas terapias adicionais são encontradas na lista Etalon na página de análise

Fitoterapia: Uma terapia vegetal com frequências terapêuticas da planta.

The screenshot displays the JAPA tecno software interface for the Fitoterapia (Phytotherapy) section. On the left, a list of therapy options is shown, with 'H # PHYTOTHERAPY' selected and highlighted. The central area features a photograph of a plant, identified as Oxalis acetosella. To the right of the plant image is a spectral graph showing two curves (red and blue) plotted against frequency (1.8 to 8.2) and amplitude (0 to 6). Below the graph, a table titled 'ETAON LIST ACCORDING TO DECREASING SPECTRAL SIMILARITY' lists various plant species and their corresponding coefficients. The table is as follows:

0	0.000	NERVES OF BACK
0	1.325	OPTIMUM DISTRIBUTION
X 0		Virtual model
0	0.853	OXALIS ACETOSELLA*
0	0.868	RHODIOLA ROSEA*
0	0.891	ASPARAGUS OFFICINALIS*
0	0.911	RIBUS NIGRUM*
0	0.920	VERBASCUM THAPSUS*
0	0.937	CORYLUS AVELLANA*

Para usar essa terapia, preste atenção aos coeficientes mais baixos da lista, aqueles com coeficientes mais baixos, então 0,500 são os melhores absolutos e todos os outros também serão úteis. Você não precisa para os etonos internos do teste em V.

Para usar a terapia, selecione a planta que você deseja usar e clique na foto da planta. Você será levado para a página de meta-terapia, onde poderá dar terapia no órgão selecionado com a planta que você selecionou.

1.8 - Sistema esquelético (esqueleto, ossos, etc.)

2.6 - tecidos conjuntivos, nervos, válvulas cardíacas, tecido conjuntivo solto, músculo muscular estriado e cardíaco; (Nervos, sistema cardiovascular e tecidos conjuntivos)

3.4 - tecido muscular não -entrizado. (Músculos)

4.2 - epitélio teselado do trato digestivo; (Sistema digestivo)

4.9 - Estatifica epitélios escamosos e colunares. Tecido hepático parenquimatoso e tecido do trato biliar, epitélio do tecido renal e órgãos reprodutivos; (Digestão, sistema reprodutivo)

5.8 - Anel linfóide da faringe, seção superior do trato respiratório, sistema linfático, baço, ovários e prostrados; (Sistemas linfáticos e urogenitais)

6.6 - Sistema nervoso periférico, epitélio de brônquicos, supra -renais e tireóide; (Sistemas nervosos e endócrinos)

7.4 - Seções centrais dos analisadores sensoriais, exceto os ópticos, e estruturas subestímulos do cérebro, Pons Cerebelli; Cerebelo, sistema límbico e parênquima dos pulmões; (Sistemas sensoriais e nervosos)

8.2 - retina, nervo óptico, córtex cerebral. (Sistema sensorial)

Se o sistema tiver o que parece muitas coisas aleatórias, siga as dicas em vermelho para saber quais sistemas investigarem mais. Veja os ODs dos órgãos nos sistemas listados. Os gráficos são para investigar possíveis causas de raiz.